

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf des Sichler Beauty-Zahnaufhellers. Dieses bedienerfreundliche Gerät garantiert Ihnen jederzeit ein strahlend weißes Lächeln. Die moderne, schonende UV-Technologie macht Ihre Zähne schon mit wenigen Anwendungen um bis zu vier Stufen weißer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Beauty-Zahnaufheller optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Beauty-Zahnaufheller
- Gel-Stift
- zwei Mundstücke
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien Typ AA (1,5 V)

Produktdetails

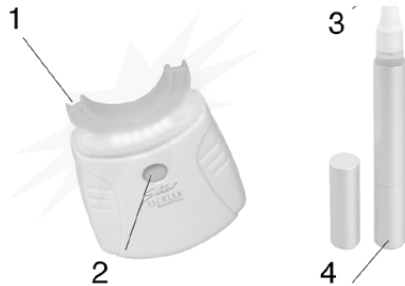

1. Mundstück (2x)
2. Ein/Aus-Taste
3. Bürstenspitze
4. Gel-Abgabe

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
- Legen Sie drei Batterien Typ AA ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität – die Minus- und Pluszeichen auf den Batterien müssen mit denen im Batteriefach übereinstimmen.
- Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie die Schraube wieder fest. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Verwendung

- Entfernen Sie die Verschlusskappe des Gel-Stiftes. Drehen Sie das untere Ende des Stiftes im Uhrzeigersinn um etwa eine Vierteldrehung, bis etwas Aufhellgel austritt.
- Tragen Sie das Gel mit der Bürstenspitze gleichmäßig dünn auf die Außenseite der Vorderzähne auf.
- Lassen Sie das Gel etwa 20 Sekunden einwirken.



Hinweis:

Das Aufhellgel kann bei einigen Personen Reizungen und Schmerzempfindlichkeit in Zähnen und Zahnfleisch auslösen. Spülen Sie in diesem Fall den Mund mit viel Wasser gründlich aus. Setzen Sie mit der Behandlung so lange aus, bis die Beschwerden vollkommen abgeklungen sind.




ACHTUNG!

Schauen Sie niemals direkt in das vom Gerät ausgehende Licht. Sie könnten Ihre Augen schädigen. Achten Sie darauf, dass Sie das Gel nicht verschlucken.

Mundstück austauschen

Sie können das Mundstück des Zahnaufhellers austauschen.

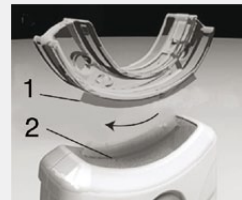

1. Führung
2. Befestigungsschiene

- Halten Sie das Gerät senkrecht, mit dem Mundstück nach oben und der Ein/Aus-Taste zu Ihnen.
- Ziehen Sie das Mundstück nun waagrecht nach rechts aus der Befestigungsschiene heraus.
- Setzen Sie das neue Mundstück (im Lieferumfang enthalten) auf die Befestigungsschiene, indem Sie die Führung nach links in die Befestigungsschiene schieben.

Reinigung

Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem angefeuchteten, weichen Tuch und etwas Spülmittel. Trocknen Sie das Gerät danach mit einem trockenen Tuch gründlich ab. Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Verwenden Sie niemals aggressive Putz- und Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren und brennbaren Geräten oder Dämpfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass das Mundstück, die Führung und die Befestigungsschiene frei von Haaren und Verschmutzungen sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4964 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtas, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
22.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4964 ein.