

# Mobiler Elektromassage-Trainer ESG-1011

8 Programme

Bedienungsanleitung





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihr neuer Elektromassage-Trainer.....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Elektromassage.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung .....	7
<b>Produktdetails.....</b>	<b>8</b>
<b>Display.....</b>	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>10</b>
<b>Massagemodus einstellen.....</b>	<b>10</b>
Intensität einstellen.....	10
Geschwindigkeit einstellen.....	11
<b>Ausschalten .....</b>	<b>11</b>
<b>Ersatzteile und Zubehör.....</b>	<b>11</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>11</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHR NEUER ELEKTROMASSAGE-TRAINER

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Elektromassage-Trainers. Verwöhnen Sie Ihren Körper mit herrlich wohltuenden sanften Elektro-Impulsen, wo auch immer Sie gerade sind: auf Reisen, in Büropausen und natürlich auch zu Hause auf dem Sofa.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Elektromassage-Trainer optimal einsetzen können.

## **Lieferumfang**

Elektromassage-Trainer ESG-1011

2 Kontakt-Pads

Kabel

Bedienungsanleitung

## **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleichzeitig mit anderen Elektromassagegeräten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## **Wichtige Hinweise zur Elektromassage**

Folgende Personen dürfen das Massagegerät nicht verwenden:

- Menschen mit einer Herzkrankheit,
- Menschen mit Neigung zu epileptischen Anfällen,
- Menschen, die einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen,
- Menschen mit hohem Fieber,
- Menschen mit starken schmerzhaften Krankheiten,
- Menschen mit unnormalem Blutdruck,
- Frauen in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt eines Kindes,
- Menschen mit bösartigen Tumoren,
- Menschen mit tuberkulösen Krankheiten.

- Auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen der Haut darf die Massage nicht angewendet werden.
- Verwenden Sie das Elektromassagegerät nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten vor der Verwendung des Elektromassagegerätes ihren Arzt konsultieren.
- Schalten Sie das Massagegerät ab, bevor Sie es bewegen.
- Halten Sie das Massagegerät stets sauber.
- Sollten Sie während der Anwendung etwas Ungewöhnliches feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht im Mundraum oder im Bereich der Genitalien.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht während Sie schlafen.
- Schalten Sie das Gerät immer ab, bevor Sie die Pads am Körper anbringen oder abnehmen.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können

Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### **Konformitätserklärung**


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5277 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.02.2016



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5277 ein.

# PRODUKTDDETAILS

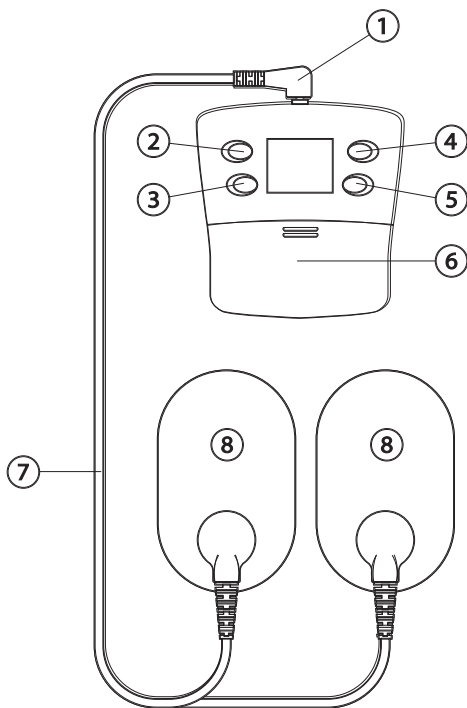


1. Kabelanschluss
2. ON/+ -Taste
3. OFF/--Taste
4. MODE-Taste
5. I/V-Taste (Intensität und Geschwindigkeit)
6. Batteriefach
7. Kabel
8. Massagepads



# DISPLAY

1. Massagetyp
2. Klopfmassage: Empfohlen zur Muskelentspannung
3. Massieren: Empfohlen bei leichter Müdigkeit
4. Kneten: Empfohlen bei Muskelkater
5. Intensität
6. Zeit
7. Geschwindigkeit

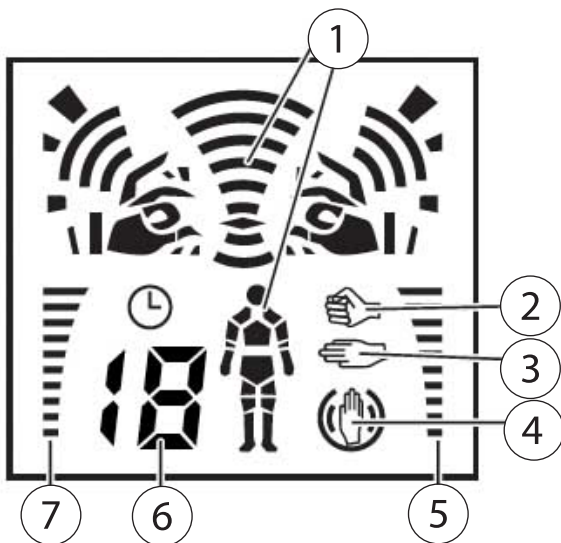

# INBETRIEBNAHME

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 Batterien des Typs AAA ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität im Inneren des Batteriefachs.
2. Verbinden Sie das Kabel mit der Buchse des Elektromassage-Trainers.
3. Verbinden Sie die Kabelenden mit den Massagepads.
4. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Massagepads.
5. Benetzen Sie die Massagepads mit einem auf Wasser basierenden Gel.
6. Befestigen Sie die Massagepads am gewünschten Körperteil.
7. Drücken Sie die ON-Taste für etwa 3 Sekunden.



## **ACHTUNG:**

*Nehmen Sie den Elektromassage-Trainer sofort ab, wenn Sie die Vibration oder Elektroimpulse als unangenehm empfinden.*

## MASSAGEMODUS EINSTELLEN

Wählen Sie mit der Taste **MODE**, welche Massagebewegungen auf welche Körperzone ausgeführt werden sollen, bis Sie eine für Sie angenehme Einstellung gefunden haben.

### **Intensität einstellen**

Mit den Tasten ▲ und ▼ kann die Intensität eingestellt werden. Diese wird in einer steigenden Anzahl Balken rechts über dem Wort **POWER** im Display angezeigt. Probieren Sie zu Beginn eine niedrige Einstellung.

### **Geschwindigkeit einstellen**

Drücken Sie zuerst die Taste **Intension/Velocity**. Danach kann mit den Tasten ▲ und ▼ die Geschwindigkeit eingestellt werden. Diese wird in einer steigenden Anzahl Balken rechts über dem Wort **SPEED** im Display angezeigt. Drücken Sie **Intension/Velocity** erneut, um wieder andere Einstellungen vornehmen zu können.

## AUSSCHALTEN

Drücken Sie in schneller Folge mehrmals die Taste **OFF**, bis den Elektromassage-Trainer aus geht.

## ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR:

Passende Pads für weitere Benutzer bzw. Ersatz-Pads erhalten Sie unter der Bestell-Nr. NC-4843-675.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 2 Batterien 1,5V / AAA (nicht enthalten)

Frequenz: 1-1200 Hz

Impulsweite: 20-400 µs

Kabellänge: 150 cm

Massagearten: 3

Verwöhnprogramme: 8

Maße: 6,5 × 6,1 × 1,4 cm

Gewicht: 30 g

**Kundenservice: 07631 / 360 - 350**  
**Importiert von:**  
**PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

**© REV1 / 24.02.2016 - EB/BS/HS//SK**