



2IN1-ELEKTRO-MASSGAGE-GERÄT MIT PADS UND MASSAGE-SCHUHEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

NC-5423-675





2IN1-ELEKTRO-MASSGAGE-GERÄT
MIT PADS UND
MASSAGE-SCHUHEN





Bedienungsanleitung **D**

Inhalt

Ihr neues Massage-Gerät	6
Technische Daten	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise und Gewährleistung	7
Entsorgung	7
Konformität.....	8
Hinweise zur Elektro-Massage	9
Produktdetails.....	9
Die Steuereinheit	9
Anzeige des Displays.....	9
Die verschiedenen Fußmassagen.....	10
Verwendung	11
Batterien einlegen.....	11
Fußmassage.....	11
Massage mit Pads	12
Anhang	14
Reinigung und Pflege	14
Lagerung	14
Kontakt und Unterstützung.....	14

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses außergewöhnlichen Elektro-Massage-Geräts. Ihr neues Massage-Gerät beherrscht neben einer wohltuenden Fußmassage auch die herkömmliche Massage und hilft Ihnen so, dem stressigen Alltag zu entfliehen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Massage-Gerät optimal einsetzen können.

• **Lieferumfang**

- Steuereinheit
- 1 Paar Massage-Schuhe
- 2 Massage-Pads
- Verbindungskabel für die Massage-Schuhe
- Verbindungskabel für die Massage-Pads
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 2 Batterien des Typs AAA (Micro)



HINWEIS:

Ersatz-Pads können Sie bei www.pearl.de unter der Produktnummer PE-3006-675 bestellen.

Technische Daten

Stromversorgung: 2 x AAA (1,5 V)

Massagedauer: 15 min

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tragen Sie die Steuereinheit und die Massage-Schuhe niemals an den Kabeln.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Importiert von:
PEARL Agency
Pearlstraße 1-3
D-79426 Buggingen



Konformität

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich das Produkt NC-5423 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

Pearl Agency
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
30.01.2010

Kutschera, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5423 ein.

Hinweise zur Elektro-Massage

Folgende Personen dürfen das Massagegerät nicht verwenden:


- Menschen mit einer Herzkrankheit
- Menschen, die einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen
- Menschen mit hohem Fieber
- Menschen mit starken schmerzhaften Krankheiten
- Menschen mit unnormalem Blutdruck
- Frauen in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt eines Kindes
- Menschen mit bösartigen Tumoren
- Menschen mit tuberkulösen Krankheiten

- Auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen der Haut darf die Massage nicht angewendet werden.
- Verwenden Sie das Elektromassagegerät nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten vor der Verwendung des Elektromassagegerätes ihren Arzt konsultieren.
- Schalten Sie das Massagegerät ab, bevor Sie es bewegen.
- Halten Sie das Massagegerät stets sauber.
- Sollten Sie während der Anwendung etwas ungewöhnliches feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht im Mundraum oder im Bereich der Genitalien.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht während Sie schlafen.


PRODUKTDDETAILS

Die Steuereinheit

1. Anschluss für ein Verbindungskabel
2. Display
3. Taste ON
4. Taste S/P
5. Taste OFF
6. Taste MODE

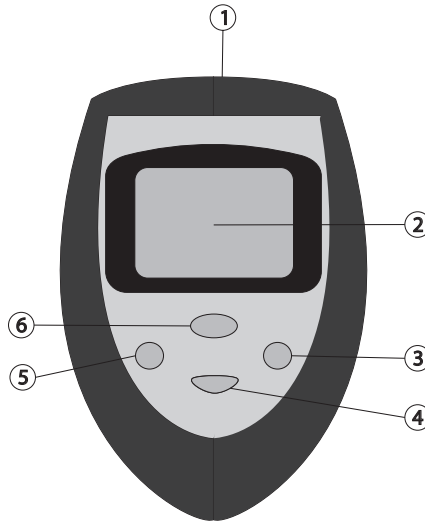



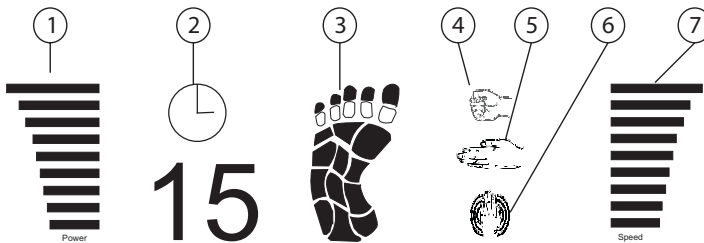


Anzeige des Displays



1. Geschwindigkeitsanzeige SPEED
2. Anzeige der Restdauer
3. Fußmassage
4. Klopfmassage
5. Zupfmassage
6. Streichmassage
7. Intensitätsanzeige POWER

Die verschiedenen Fußmassagen

Sie können fünf verschiedene Bereiche der Fußsohle massieren, um so verschiedene Körperregionen zu aktivieren.

Körperregion	Massageart	Grafik der Fußsohlen-Reflexzone
Linker Arm	Gemischte Massage mit langsamen und schnellen Elementen	
Rechter Arm	Gemischte Massage mit langsamen und schnellen Elementen	
Bauch	Konstant langsame Massage	
Linkes Bein	Tiefenmassage	
Rechtes Bein	Tiefenmassage	

VERWENDUNG

Dieses Elektro-Massage-Gerät dient zur Massage mit elektrischen Impulsen. Verwenden Sie es nicht zu einem anderen Zweck. Lesen und beachten Sie die Hinweise zur Elektro-Massage. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern oder Personen mit verringerter Aufmerksamkeit, verringertem Mitteilungsvermögen oder verringertem Einschätzungsvermögen verwendet werden. Verwenden Sie das Elektro-Massage-Gerät nicht länger als 30 Minuten täglich.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Steuereinheit. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



HINWEIS:

Wenn die Displayanzeige schwächer wird oder die Massage vor Ablauf der Restdauer beendet wird, sollten Sie die Batterien ersetzen.

Fußmassage



ACHTUNG

Nehmen Sie das Massage-Gerät sofort ab, wenn Sie die Elektroimpulse als unangenehm empfinden.

1. Klippen Sie die Massage-Schuhe an das Verbindungskabel für die Schuhe.
2. Stecken Sie das Verbindungskabel in den Anschluss für das Verbindungskabel.
3. Reinigen Sie Ihre Füße und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Stellen Sie Ihre Füße in die Massage-Schuhe.



HINWEIS:

Bleiben Sie während der Massage sitzen und halten Sie die Füße still. Die Massage-Schuhe sind nicht für das Gehen geeignet.

5. Drücken Sie die Taste ON. Das Massage-Gerät schaltet sich ein.
6. Wählen Sie mit der Taste MODE die gewünschte Massageart.



HINWEIS:

In Verbindung mit den Massage-Schuhen können Sie nur die Massage der verschiedenen Fußsohlen-Reflexzonen verwenden.

7. Drücken Sie die Taste ON, um die Intensität der Massage zu erhöhen. Es gibt 10 Intensitätsstufen.
8. Drücken Sie die Taste S/P, um zur Geschwindigkeit zu wechseln.
9. Drücken Sie die Taste ON, um die Geschwindigkeit der Massage zu erhöhen. Es gibt 10 Geschwindigkeitsstufen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Intensität oder Geschwindigkeit der Massage wieder verringern möchten, wählen Sie die entsprechende Einstellung mit der Taste S/P aus. Drücken Sie dann die Taste OFF, um die Einstellung zu verringern.

10. Wenn Sie die Massage vor Ablauf der voreingestellten Zeit beenden wollen, halten Sie die Taste OFF gedrückt, bis die Displayanzeige erlischt.

Massage mit Pads



ACHTUNG

Nehmen Sie das Massage-Gerät sofort ab, wenn Sie die Elektroimpulse als unangenehm empfinden.

1. Klippen Sie die Massage-Pads an das Verbindungskabel für diese Pads.
2. Stecken Sie das Verbindungskabel in den Anschluss für das Verbindungskabel.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Massage-Pads ab.
4. Reinigen Sie die gewünschten Körperregionen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
5. Kleben Sie die Massage-Pads an die gewünschte Körperregion.
6. Drücken Sie die Taste ON. Das Massage-Gerät schaltet sich ein.
7. Wählen Sie mit der Taste MODE die gewünschte Massageart.



HINWEIS:

In Verbindung mit den Massage-Pads können Sie nur die Klopfmassage, die Zupfmassage oder die Streichmassage verwenden.

8. Drücken Sie die Taste ON, um die Intensität der Massage zu erhöhen. Es gibt 10 Intensitätsstufen.
9. Drücken Sie die Taste S/P, um zur Geschwindigkeit zu wechseln.
10. Drücken Sie die Taste ON, um die Geschwindigkeit der Massage zu erhöhen. Es gibt 10 Geschwindigkeitsstufen.



Bedienungsanleitung **D**



HINWEIS:

Wenn Sie die Intensität oder Geschwindigkeit der Massage wieder verringern möchten, wählen Sie die entsprechende Einstellung mit der Taste S/P aus.

11. Drücken Sie dann die Taste OFF, um die Einstellung zu verringern.
12. Wenn Sie die Massage vor Ablauf der voreingestellten Zeit beenden wollen, halten Sie die Taste OFF gedrückt, bis die Displayanzeige erlischt.





ANHANG

Reinigung und Pflege

- Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie die Steuereinheit reinigen.
- Reinigen Sie die Steuereinheit nur mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie das Massage-Gerät erst wieder, wenn es komplett trocken ist.
- Reinigen Sie die Massage-Schuhe nur mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie die Massage-Schuhe erst wieder, nachdem sie komplett trocken sind.
- Reinigen Sie die Massage-Pads bei Bedarf vorsichtig unter fließendem Wasser. Legen Sie die Pads dann mit der Kontaktfläche nach oben auf eine Ebene. Kleben Sie nach dem Trocknen die Schutzfolie wieder auf die Pads.

Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör nur an trockenen Orten bei Zimmertemperatur auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit sind nicht zur Lagerung von Elektrogeräten geeignet.
- Orte mit großen Temperaturschwankungen (wie Garagen oder Keller) sind nicht zur Lagerung von Elektrogeräten geeignet.

Kontakt und Unterstützung

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen an die Serviceabteilung Ihres Händlers.

- **Telefonischer Kontakt**
Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr.
Telefon: 07631 / 360-300
- **Online-Unterstützung**
Web-Adresse: <http://www.pearl.de/support/>
Email: kundenbetreuung@pearl.de
- **Adresse**
PEARL Agency
Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen
Deutschland



