


Sistema di depilazione IPL IPL-100

Con attacco leggero, 5 livelli e occhiali protettivi

manuale operativo

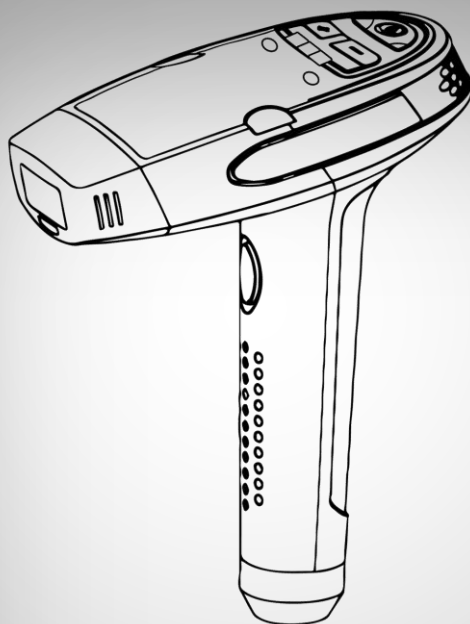

Contenuti

Il tuo nuovo sistema di depilazione IPL	4
portata di consegna	4
Accessori opzionali	4
Note importanti all'inizio	5
Istruzioni di sicurezza	5
Informazioni importanti sullo smaltimento	8
Dichiarazione di conformità	8
Dettagli del prodotto	9
uso	10
Tipi di pelle e capelli adatti	10
Tabella dei colori dei capelli e della pelle	11
Gruppi di persone vulnerabili	11
ambito di applicazione	12
preparazione	13
Test di tolleranza	13
applicazione	13
Manutenzione	16
Corso di trattamento	16
Sostituire la cartuccia della luce	16
pulizia	17
Cosa fare se la pelle reagisce negativamente?	17
Risoluzione dei problemi	17
Spina di alimentazione dell'elenco dei paesi	18
Specifiche tecniche	19

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-beauty.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo sistema di depilazione IPL

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo sistema di depilazione IPL. Riduci il tuo Peli del corpo permanenti - senza l'uso di prodotti chimici e senza dolore. Grazie alla grande finestra luminosa, non devi iniziare così spesso. Per sicurezza, il laser lampeggia solo quando il dispositivo è a contatto con la pelle. La luce laser penetra nello strato superiore della pelle, dove la luce viene convertita in calore. Riscaldando l'area circostante, la radice dei capelli subisce il danno termico desiderato, che alla fine porta alla distruzione delle cellule della radice dei capelli. Grazie alle tre diverse prese di corrente dell'alimentatore è possibile utilizzare il dispositivo anche in vacanza.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo sistema di depilazione IPL in modo ottimale.

portata di consegna

- Sistema di depilazione IPL IPL-100
- Saggio
- occhiali protettivi
- Alimentatore con tre connessioni a presa (Euro / Tipo-G / Tipo-A)

Accessori opzionali

Rasoio per la pre-rasatura (es. NX-8028)

NX-3069: cartuccia luminosa sostitutiva con 100.000 impulsi luminosi (per aree della pelle sensibili)

NX-3070: cartuccia luminosa sostitutiva con 300.000 impulsi luminosi (per aree cutanee normali)

NX-3071: occhiali di protezione dalla luce di ricambio per sistemi di epilazione IPL

Note importanti all'inizio



Leggi il manuale di istruzioni!



Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre utilizzare.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurati che il prodotto sia collegato a una presa facile da usare è accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute può essere danneggiato anche a piccole altezze.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno capito i pericoli che ne derivano.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano sorvegliati.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non utilizzare mai il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Il dispositivo è inteso solo per uso domestico o privato, ma non per uso commerciale.
- Prima di ogni utilizzo verificare che il dispositivo sia integro, se danneggiato non deve essere utilizzato.
- Non guardare mai direttamente nella fonte di luce!
- In caso di malattie della pelle o altri problemi medici, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori che contengono acqua. Rischio di scossa elettrica!

- Se il dispositivo viene utilizzato in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente dopo l'uso. La vicinanza all'acqua rappresenta un rischio, anche quando il dispositivo è spento.
- Non utilizzare il prodotto intorno agli occhi, intorno ai capezzoli, nella zona genitale o su tatuaggi o trucco permanente, o su voglie, nei o lentiggini.
- Fai un test cutaneo prima del primo utilizzo. Per fare ciò, scegli un punto sul braccio e inizia con il livello di intensità più basso. Passare a un livello di intensità superiore da 3 a 5 volte. Se ciò provoca arrossamento, gonfiore o bruciore, follicoli piliferi alterati, irritazione della pelle o altri sintomi, consultare un medico prima di utilizzare nuovamente il dispositivo. Se non noti alcun cambiamento sulla tua pelle dopo 24 ore, puoi usare normalmente il dispositivo.
- Disinfettare la finestra della luce prima e dopo ogni utilizzo spruzzando alcol o disinfettante su un batuffolo di cotone e strofinando la finestra della luce con esso. Non spruzzare alcol o disinfettante direttamente sulla finestra della luce.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso e non guardare direttamente la fonte di luce.
- Un leggero arrossamento della pelle è normale durante il trattamento. Se necessario, applicare un tampone rinfrescante dopo il trattamento.
- Dopo il trattamento, utilizzare una lozione idratante per prendersi cura delle aree della pelle trattate.
- Non utilizzare il dispositivo se nell'ultimo mese prima del trattamento hai assunto farmaci che aumentano la sensibilità della pelle alla luce. Assicurati di leggere il foglietto illustrativo del farmaco che stai assumendo.
- Durante il periodo di trattamento, non dovresti mangiare cibi che influenzano la fotosensibilità, come spinaci, canola o senape.
- Regola il livello di intensità secondo necessità (da basso ad alto). Otterrai un risultato migliore con un livello di intensità maggiore.
- Se la pelle è più scura, la reazione cutanea può essere ritardata. Pertanto, non aumentare il livello di intensità troppo rapidamente.
- Per non danneggiare il dispositivo, non utilizzare prodotti in gel o simili sulla pelle durante il trattamento.
- Il dispositivo non è impermeabile, quindi non utilizzarlo nella vasca da bagno, nella doccia o in qualsiasi altro luogo in cui potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
- Se il dispositivo si bagna mentre è acceso, spegnerlo per la propria sicurezza e scollegarlo.
- Non utilizzare il dispositivo in un luogo soggetto a grandi campi magnetici o onde elettromagnetiche.
- Evitare colpi e colpi sul dispositivo.
- Non applicare il trucco sulle parti del corpo da trattare.
- Il prodotto non è adatto a tutti i tipi di pelle. Prima di utilizzarlo per la prima volta, controlla la sezione Tipi di pelle e capelli adatti per assicurarti che il prodotto sia adatto al tuo tipo di pelle e al colore dei tuoi capelli. Il prodotto non è adatto all'uso su pelli scure e con capelli di colore chiaro.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.

- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello Il dispositivo, il cavo o la spina presentano danni visibili, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di incendio.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo energetico del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che il file Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa di corrente partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione.
- Utilizzare la presa di corrente che corrisponde alla presa di corrente.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (ad es. Vasca da bagno, Lavandino, doccia). Non prendere mai un dispositivo elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, scollegare immediatamente la spina di alimentazione.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato con i seguenti gruppi di persone:
 - bambini piccoli
 - Gli anziani
 - Persone che soffrono di infiammazione locale o sistemica
 - Persone il cui tessuto cutaneo è sensibile alla luce
 - Persone che assumono farmaci fotosensibili
 - Persone che hanno impiantato dispositivi medici elettrici (ad es. Pacemaker)
 - Donne incinte o donne che cercano di concepire
- Prima dell'uso, rimuovere tutti gli oggetti metallici dal corpo.
- Non inserire oggetti o parti del corpo nelle aperture del dispositivo.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per smaltimento professionale

contatta i punti di raccolta pubblici della tua comunità. Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta e di quelli esistenti

Per le limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni fornite dal rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità


PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-3067-675 è conforme alla direttiva DPI 89/686 / CEE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UNIONE EUROPEA.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kurtasz, A.'.

Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3067 nel campo di ricerca.

Dettagli del prodotto

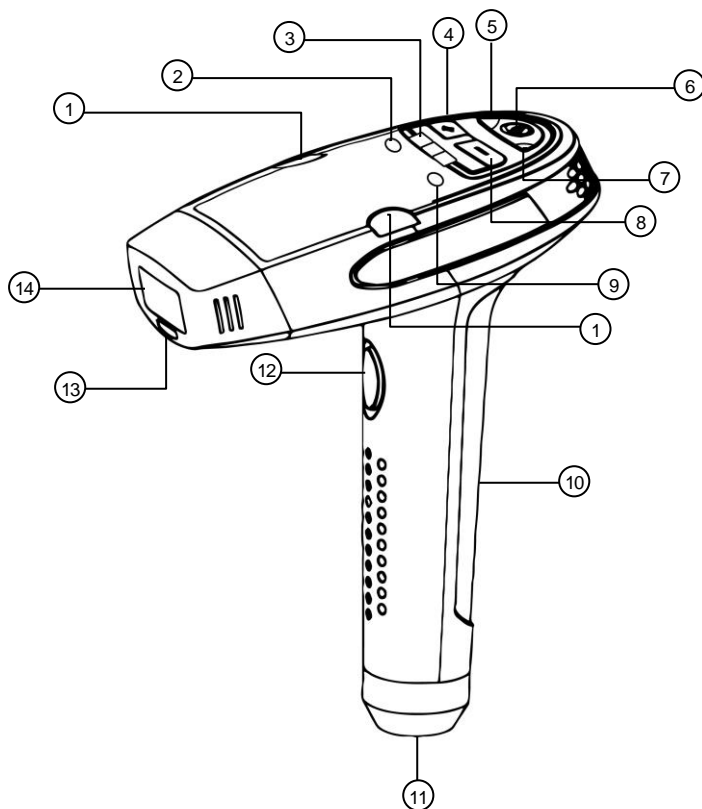

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. LED pronto | 8. pulsante [-] |
| 2. LED di manutenzione | 9. LED cartuccia luminosa |
| 3. LED di intensità | 10. Maniglia |
| 4. Tasto [+] | 11. Presa |
| 5. LED di alimentazione | 12. Pulsante impulso luminoso |
| 6. Pulsante di accensione / spegnimento | 13. Sensore della pelle |
| 7. LED di funzionamento | 14. Finestra chiara |

USO

Tipi di pelle e capelli adatti

Il trattamento risponderà meglio ad alcuni tipi di pelle e capelli rispetto ad altri.



NOTA:

Il risultato dipende dal tipo di pelle e dal colore dei capelli. La depilazione permanente è generalmente più sostenibile per i tipi di pelle chiara con i capelli scuri che per i tipi di pelle scura con i capelli chiari!

- **Capelli bianchi / biondi / grigi / rossi**

L'applicazione è per le persone con i capelli bianchi, biondi, grigi o rossi non adatto indipendentemente dal colore della pelle.

- **Capelli castano chiaro / castano scuro / neri**

L'applicazione è adatta a persone con capelli castano chiaro, castano scuro o neri, purché abbiano un tipo di pelle massima castano chiaro.

Tipo di pelle	adatto
Molto luminoso	✓
Colore avorio	✓
Beige chiaro / chiaro	✓
Marrone chiaro	✓
Marrone	✗
Marrone scuro	✗
nero	✗

Tabella dei colori dei capelli e della pelle

Hauttyp Type de peau Haarfarbe Couleur des poils	I	II	III	IV	V	VI	VII
Schwarz Noir	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	Energie / Énergie 1-2-3	Energie / Énergie 1-2	×
Dunkelbraun Brun foncé	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	Energie / Énergie 1-2-3	Energie / Énergie 1-2	×
Braun Brun	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	Energie / Énergie 1-2-3	Energie / Énergie 1-2	×
Dunkelblond Blond foncé	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	Energie / Énergie 1-2-3	Energie / Énergie 1-2	×
Hellblond Blond clair	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	Energie / Énergie 1-2-3	Energie / Énergie 1-2	×
Rot Roux	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	Energie / Énergie 1-2-3	Energie / Énergie 1-2	×
Grau / Weiß Gris / Blanc	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 4-5	Energie / Énergie 3-4-5	Energie / Énergie 3-4	×	×	×



Gruppi di persone vulnerabili


Il trattamento con il dispositivo generalmente non è adatto ai seguenti gruppi di persone:

- Bambini sotto i 14 anni
- Gli anziani
- Pazienti con malattie cardiache, ipertensione, tumori maligni o malattie infettive della pelle
- Persone che in passato hanno sofferto di sensibilità alla luce
- diabetico
- Persone che sono sottoposte a trattamento con oli essenziali allo stesso tempo
- donne incinte o donne che cercano solo di concepire
- Donne durante le mestruazioni
- Persone che sono soggette a cicatrici
- Persone che hanno assunto aspirina o immunosoppressori
- Persone che sono state esposte a una forte luce solare nelle ultime due settimane prima del trattamento
- Persone che hanno preso il sole o hanno abbronzato cosmetici nelle ultime 24 ore

ambito di applicazione

Il dispositivo può essere utilizzato solo sulle seguenti aree del corpo:

- Attaccatura dei capelli
- Guance
- Labbro superiore
- mossa
- Ascelle
- Seno (non sui capezzoli!)
- povero
- pancia
- Zona bikini (non nell'area genitale!)
- Coscia
- Parte inferiore della gamba

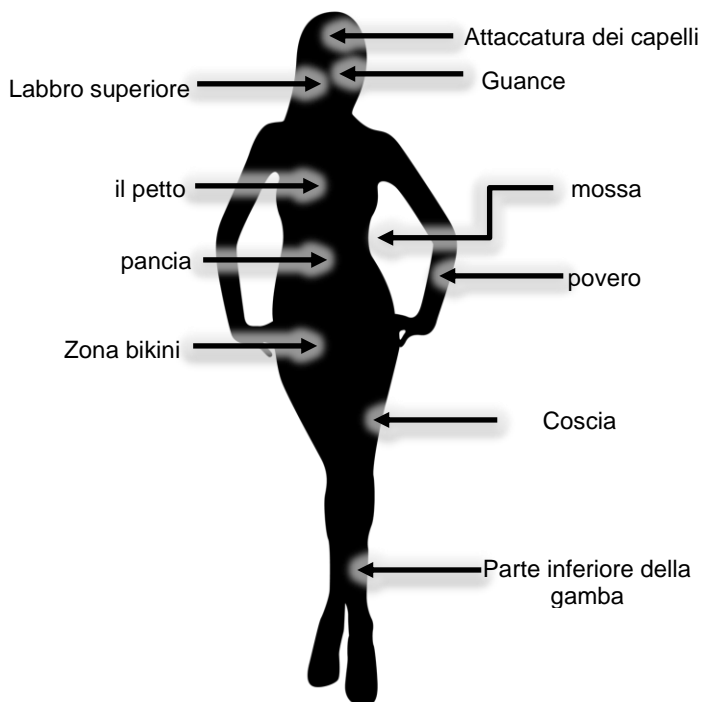

preparazione

1. Radere i capelli sulla zona da trattare (1-3 mm).
2. Quindi pulire e asciugare la zona della pelle.
3. Trova una piccola area poco appariscente sulla zona della pelle ed esegui un test di tolleranza.

Test di tolleranza



NOTA:

Effettuare un test di tolleranza anche se si desidera utilizzare un livello di intensità maggiore su un'area di pelle già risultata positiva.

1. Indossa gli occhiali di sicurezza.
2. Accendi il depilatore.
3. Scegli un livello di intensità basso (es. 1 o 2). Se l'area della pelle è già stata trattata con successo, selezionare il livello di intensità più elevato desiderato.
4. Metti il tuo depilatore sulla pelle nell'area selezionata.
5. Premere il pulsante dell'impulso luminoso.
6. Aspetta trenta minuti. Quindi controllare le condizioni dell'area irradiata. Se non ci sono anomalie, puoi continuare il trattamento sul resto della zona della pelle.



ATTENZIONE!

Se l'area irradiata è arrossata o gonfia, attendere 24 ore. Quindi ripetere il test di tolleranza. Se risulta di nuovo negativo, il dispositivo di rimozione dei peli non può funzionare sull'area della pelle selezionata può essere applicato.

applicazione

L'IPL (luce pulsata intensa) è un ulteriore sviluppo dell'epilazione laser. I capelli vengono rimossi con luce intensamente pulsata: i pigmenti di colore dei follicoli piliferi assorbono la luce emessa. In modo che la pelle non venga danneggiata, il calore viene trasferito attraverso il

Il fusto del capello è diretto nella parte profonda del follicolo pilifero e lì distrugge la papilla.



ATTENZIONE!

Assicurati di leggerli tutti prima di usarli per la prima volta Istruzioni di sicurezza. Controlla di avere la pelle e il tipo di capelli giusti. Assicurati di farne uno un test di tolleranza nella zona poco appariscente.

1. Selezionare la spina di alimentazione appropriata per la presa.



Tipo-C
Spina Euro



Tipo-G
Spina del Commonwealth



Digitare un
NEMA 1-15

2. Far scorrere la spina di alimentazione in modo che si adatti alla presa dell'alimentatore. La spina di alimentazione deve scattare in posizione con un clic udibile.



3. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente del dispositivo di rimozione dei capelli e una presa adatta.
4. Il LED di alimentazione si illumina di verde.
5. Premi il pulsante di accensione. Il LED di funzionamento si illumina di rosso, i LED di disponibilità si illuminano di verde.
6. Impostare il livello di intensità desiderato (1-5) con i pulsanti [+] e [-].



NOTA:

Iniziare il trattamento con un livello di intensità basso e quindi aumentarlo nei trattamenti successivi, a condizione che il rispettivo test di tolleranza per il livello di intensità successivo sia positivo.


Livello di intensità	LED di intensità	azione
1	1	brilla
2	1	brilla
	2	lampeggia
3	1 e 2	brilla
4	1 e 2	brilla
	3	lampeggia
5	1 e 2 e 3	brilla

8. Indossa gli occhiali di sicurezza. Se non si desidera utilizzare gli occhiali protettivi, evitare di guardare il lampo di luce.
9. Applicare il dispositivo di rimozione dei capelli sulla zona di pelle desiderata con un angolo di 90°. Il contatto con la pelle è confermato dal lampeggio rapido dei LED di pronto.



NOTA:

Poiché la stessa area può essere irradiata solo 2-3 volte di seguito, è necessario pensare in anticipo a una sequenza, ad esempio dall'alto verso il basso e da destra a sinistra.

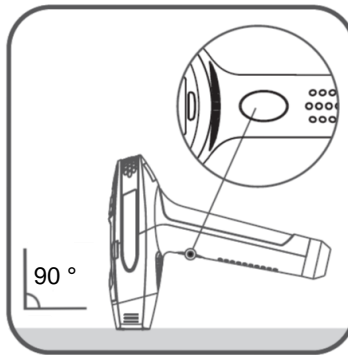

10. Premere il pulsante impulso luminoso. Viene emesso un lampo di luce.
11. Passa al punto successivo con il tuo depilatore.
12. Attendere che i LED Ready si accendano.
13. Quindi premere il pulsante impulso luminoso.
14. Ripetere i passaggi 9-11 fino a quando l'intera area della pelle è stata irradiata.
15. Spegni il dispositivo di rimozione dei capelli premendo il pulsante di accensione / spegnimento. Quindi scollegarlo dall'alimentazione.



NOTA:

Dopo cinque minuti senza alcun input, il dispositivo di rimozione dei capelli si spegnerà automaticamente.

16. Lascia raffreddare il depilatore per almeno 10 minuti.
17. Pulire la finestra della luce come descritto in Pulizia.



NOTA:

Si prega di notare che con questo tipo di trattamento solo uno risultati visibili si verificano in seguito.

Per la frequenza di utilizzo fare riferimento alla tabella nella sezione Corso di trattamento.

Manutenzione

Dovresti prenderti cura della tua pelle circa 20 minuti dopo l'applicazione.



ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle istruzioni per la cura elencate può portare al rosso, causare la pelle gonfia o lo scolorimento a lungo termine della pelle.

- Pulire le aree della pelle trattate con acqua bollita e fredda
- Applicare un gel di aloe vera o una crema idratante sulle zone della pelle trattate.
- Non esporre la zona della pelle alla luce solare diretta per almeno due ore dopo il trattamento. Dopodiché, assicurati di applicare la protezione solare prima di esporti al sole.
- Non fare un bagno caldo, doccia o sauna dopo il trattamento.
- Evitare il contatto con acqua clorata per 48 ore.

Corso di trattamento

mese	Frequenza di applicazione	Risultato
1	ogni 5 giorni	Nessun cambiamento visibile
2	ogni 7 giorni	I capelli diventano più sottili e morbidi. Diventa nero quando fai la doccia Capannone follicoli piliferi.
3	ogni 15 giorni	La crescita dei capelli si è fermata. I capelli non ricrescono dopo essere stati strappati. Alcuni nuovi peli crescono solo in luoghi isolati.
4	ogni 30 giorni	Non ci sono più capelli da vedere e i capelli non ricrescono più.

Sostituire la cartuccia della luce

La testa della lampada ha un'aspettativa di vita di circa 15 anni se usata correttamente. Se il LED della cartuccia della luce si accende, la testa della lampada deve essere sostituita.

1. Spegni il dispositivo di rimozione dei capelli e scollegalo dalla fonte di alimentazione.
2. Lascia raffreddare per almeno 10 minuti.
3. Estrarre semplicemente la cartuccia della luce verso la parte anteriore.
4. Far scorrere la nuova cartuccia della luce nella fessura del dispositivo di rimozione dei capelli.

pulizia

Pulire la finestra della luce dopo ogni trattamento con un panno morbido leggermente umido. Non utilizzare panni imbevuti di alcool.

Cosa fare se la pelle reagisce negativamente?

È doloroso da usare.

- La percezione del dolore varia da persona a persona. In rari casi, l'applicazione può quindi essere percepita come fastidiosa (leggera sensazione di bruciore). Questa sensazione di solito dura solo per un breve momento (circa 1 minuto).

La pelle è leggermente arrossata / si brucia facilmente.

- Questa è una normale risposta al trattamento. Nella maggior parte dei casi, questo disagio scompare da solo dopo un po'. Tuttavia, se persiste per più di 24 ore, contattare il servizio clienti e / o consultare un medico.

Puzza di capelli bruciati.

- L'odore dei capelli bruciati è un'indicazione che i capelli non erano stati rasati correttamente (1-3 mm) prima del trattamento. L'odore è normale e non è motivo di preoccupazione.

Risoluzione dei problemi

Il depilatore non si accende.

- Collegare il dispositivo a una presa adatta. Utilizzare un adattatore per spina di alimentazione che corrisponda alla presa di corrente.
- Premi il pulsante di accensione. Quando il dispositivo è acceso, il LED di funzionamento si illumina di rosso.




Nonostante si prema il pulsante impulso luminoso, non viene emesso alcun "lambo luminoso".

- Assicurati che il tuo depilatore sia posizionato direttamente sulla pelle con un angolo di 90 °. Per motivi di sicurezza, un lambo di luce si verifica solo in caso di contatto con la pelle.
- La cartuccia della luce è esaurita (il LED della cartuccia della luce si accende). Sostituire la cartuccia della luce.
- Non premere il pulsante impulso luminoso finché i LED di pronto non si accendono.

Il depilatore si spegne automaticamente.

- Per motivi di sicurezza, il dispositivo di rimozione dei capelli si spegne automaticamente dopo 3-5 minuti senza alcun input.

Spina di alimentazione dell'elenco dei paesi

<p>Spina Euro (UE) (Tipo-C)</p>	
<p>Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Azzorre, Isole Baleari, Bangladesh, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cile, Cina, Danimarca, Germania, Gibuti, Costa d'Avorio, Eritrea, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Guinea francese, Gabon, Georgia, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guadalupa, Guinea, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Isola di Man, Iraq, Iran, Islanda, Israele, Italia, Giordania, Cambogia, Camerun, Isole del Canale, Isole Canarie, Capo Verde, Kazakistan, Kirghizistan, Comore, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Croazia, Cuba, Kuwait, Laos, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Madeira, Mali, Marocco, Martinica, Mauritania, Mauritius, Macedonia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Nepal, Paesi Bassi, Niger, Corea del Nord, Norvegia, Oman, Austria, Timor orientale, Pakistan, Paraguay, Perù, Filippine, Perù, Portogallo, Ruanda, Romania, Federazione Russa, Zambia, Svezia, Svizzera, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, St. Vincent e Grenadine, Sudan, Sud Sudan, Sud Africa, Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Repubblica Centrafricana Sudan, Sud Sudan, Sud Africa, Corea del Sud, Suriname, Siria, Tagikistan, Thailandia, Togo, Repubblica Ceca, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Repubblica Centrafricana</p>	
<p>Spina del Commonwealth (Regno Unito) Tipo-G</p>	
<p>Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, Cina, Dominica, El Salvador, Isole Falkland, Gambia, Ghana, Gibilterra, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Indonesia, Isola di Man, Iraq, Irlanda, Yemen, Giordania, Cambogia, Isole del Canada, Qatar, Kenya, Kuwait, Libano, Macao, Malawi, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Zambia, Arabia Saudita, Sierra Leone, Zimbabwe, Singapore, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Due Grenadines, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Vietnam, Cipro</p>	
<p>Tipo A (USA) NEMA 1-15</p>	
<p>Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Cina, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Giappone, Yemen, Virgin Isole, Isole Cayman, Cambogia, Canada, Colombia, Cuba, Laos, Libano, Liberia, Maldive, Messico,</p>	

Micronesia, Montserrat, Nicaragua, Antille Olandesi, Niger, Okinawa, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita Arabia, Saint Vincent e Grenadine, Tahiti, Taiwan, Thailandia, Trinidad e Tobago, USA, Venezuela, Vietnam

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		12 V DC / 3 A
adattatore di alimentazione	Ingresso	100-240 V AC 50/60 Hz 1 A
	produzione	12 V DC / 3 A
	Lunghezza del cavo	185 cm
Spettro luminoso		560-1.200 nm
Intervallo di tempo tra gli impulsi luminosi		2-3 secondi
Livelli di intensità		5
Impulsi luminosi		100.000
Durata della cartuccia della luce		fino a 15 anni
Finestra chiara		4 cm ²
Spegnimento automatico		3-5 minuti
Sensore della pelle		✓
Temperatura ambiente		20-60 °C
Umidità ambientale		20-90% (senza condensa)
Dimensioni		20 x 8 x 16 cm
Peso		353 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 18 dicembre 2017 - BS // MN