

# IPL-Haarentfernungs-System IPL-130.lcd

Mit 2 Aufsätzen, Display, 5 Stufen, Schutzbrille

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neues Haarentfernungs-System .....</b>	<b>3</b>
Lieferumfang .....	3
Optionales Zubehör .....	3
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>4</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
Gegenanzeigen .....	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	8
Konformitätserklärung .....	8
<b>Produktdetails .....</b>	<b>9</b>
Display .....	10
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>10</b>
<b>Empfindlichkeits-Test durchführen .....</b>	<b>10</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>11</b>
IPL-Technologie (Intense Pulsed Light) .....	11
Manueller Modus / automatischer Modus .....	11
Aufsätze .....	12
Behandlungsschritte Haarentfernung .....	12
Behandlungsschritte für die Aknebehandlung .....	13
Nach der Verwendung .....	14
Behandlungsaufbau .....	14
Reinigung und Aufbewahrung .....	14
Problemlösungen .....	15
<b>Technische Daten .....</b>	<b>16</b>
<b>Länderliste Steckdosenanschlüsse .....</b>	<b>16</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte  
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-beauty.de](http://www.sichler-beauty.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neues Haarentfernungs-System

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Haarentfernungs-Systems. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Haarentfernungs-System optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Haarentferner
- 2 Aufsätze
- Netzteil mit 3 verschiedenen Steckdosenanschlüssen
- Schutzbrille
- Bedienungsanleitung

## Optionales Zubehör

- Rasierer (z.B. NX-8028)
- Lichtschutzbrille (NX-3071)

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Das Gerät ist nur für den häuslichen oder privaten Gebrauch, jedoch nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Unversehrtheit des Gerätes, bei Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Bei bestehenden Hautkrankheiten oder anderen medizinischen Bedenken fragen Sie ihren Arzt vor Benutzung des Gerätes.
- Das Gerät aus hygienischen Gründen nur bei einer Person anwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern benutzen, die Wasser enthalten. Stromschlaggefahr!
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Bereich der Augen, um die Brustwarzen, im Genitalbereich oder auf Tattoos bzw. permanentem Make-Up sowie auf Geburtsmalen, Muttermalen oder Sommersprossen.
- Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Hauttest durch. Wählen Sie hierfür eine Stelle am Arm und beginnen Sie mit der niedrigsten Intensitätsstufe. Wechseln Sie 3 bis 5 Mal zu einer höheren Intensitätsstufe. Wenn sich daraufhin eine Rötung, Schwellung oder Verbrennung, veränderte Haarfollikel, Hautirritationen oder andere Beschwerden zeigen, halten Sie Rücksprache mit einem Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Wenn Sie nach 24 Stunden keine Hautveränderung feststellen, können Sie das Gerät normal verwenden.

- Desinfizieren Sie das Lichtfenster vor und nach jeder Verwendung, indem Sie Alkohol oder Desinfektionsmittel auf einen Wattebausch sprühen und damit das Lichtfenster abreiben. Sprühen Sie den Alkohol oder das Desinfektionsmittel nicht direkt auf das Lichtfenster.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle!
- Tragen Sie während der Verwendung die Schutzbrille. Achten Sie darauf, auch mit Schutzbrille niemals in die Lichtquelle zu blicken!
- Während der Behandlung ist eine leichte Rötung der Haut normal. Legen Sie nach der Behandlung gegebenenfalls ein Kühlkissen auf.
- Sollte Sie während der Behandlung einen Geruch von verbranntem Haar wahrnehmen, haben Sie die betreffende Hautstelle nicht gründlich genug rasiert.
- Verwenden Sie nach der Behandlung Feuchtigkeitslotion oder Aloe Vera Gel zur Pflege der behandelten Hautpartien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie im letzten Monat vor der Behandlung Medikamente, die die Lichtempfindlichkeit der Haut verstärken, eingenommen haben. Beachten Sie unbedingt die Packungsbeilage der von Ihnen eingenommenen Medikamente.
- Während des Behandlungszeitraums sollten Sie keine Nahrungsmittel zu sich nehmen, die die Lichtempfindlichkeit beeinflussen, wie z.B. Spinat, Raps oder Senf.
- Stellen Sie die Intensitätsstufe nach Bedarf ein (von niedrig bis hoch). Mit einer höheren Intensitätsstufe werden Sie ein besseres Ergebnis erzielen.
- Bei dunklerer Haut kann die Hautreaktion verzögert auftreten. Erhöhen Sie deshalb die Intensitätsstufe nicht zu schnell.
- Um das Gerät nicht zu beschädigen, verwenden Sie während der Behandlung keine Gelprodukte oder Ähnliches auf der Haut.
- Das Gerät ist nicht wasserfest, verwenden Sie es deshalb nicht in der Badewanne, Dusche oder an anderen Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Falls das Gerät in eingeschaltetem Zustand nass geworden ist, schalten Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen große Magnetfelder oder elektromagnetische Wellen auftreten.
- Tragen Sie kein Make-up auf zu behandelnde Körperstellen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange und nicht zu häufig auf einer Hautstelle.
- Wenn die Haut 24 Stunden nach der Verwendung immer noch rot und geschwollen ist, suchen Sie einen Arzt auf, bevor Sie das Gerät ggf. wieder verwenden.
- Blockieren Sie keine Öffnungen des Geräts während der Verwendung.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in leicht entzündlicher oder explosiver Umgebung.
- Achten Sie darauf, den während der Behandlung den Raum gut zu belüften.



- es ist verboten, das Gerät in der Wanne, Dusche oder im Wasser zu benutzen.



- lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Gegenanzeigen

Die Behandlung mit dem Gerät ist **nicht geeignet** für:

- Kinder unter 14 Jahren,
- Patienten mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck, bösartigen Tumoren und infektiösen Hautkrankheiten,
- Personen, die in der Vergangenheit an Lichtempfindlichkeit litten oder Diabetes haben,
- Personen, die in den letzten 6 Wochen andere Behandlungen zur Haarentfernung durchgeführt haben,
- Personen, die gleichzeitig eine Behandlung mit ätherischen Ölen durchführen,
- Schwangere oder Frauen während der Menstruation,
- Frauen, die stillen oder versuchen, schwanger zu werden,
- Personen, die zu Narbenbildung neigen,
- Personen, die Aspirin oder Immunsuppressiva eingenommen haben,
- Personen, die in den letzten 2 Wochen vor der Behandlung starkem Sonnenlicht ausgesetzt waren oder im Solarium waren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Haut gebräunt oder verbrannt ist, führen Sie einen Empfindlichkeits-Test Ihrer Haut durch (siehe Kapitel **Vor der ersten Verwendung**) und warten Sie 24 Stunden, ob sich Irritationen zeigen.
- Personen, die Selbstbräuner aufgetragen haben,
- die oberen Augenlider,
- Personen, die lokale oder systemische Entzündungen haben
- Personen mit lichtempfindlicher Haut oder Personen, die vor der Behandlung Medikamente eingenommen haben, die die Lichtempfindlichkeit der Haut verstärken,
- Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des implantierten Geräts führen!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3068-675 in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie 89/686/EWG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*


Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3068 ein.






## Produktdetails

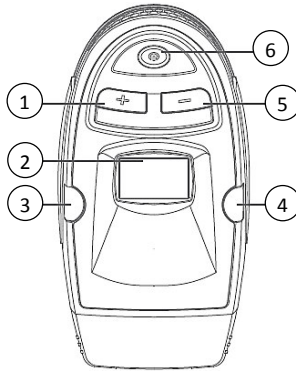

- 1. Plus-Taste
- 2. Display
- 3. Bereitschafts-LED 1
- 4. Bereitschafts-LED 2
- 5. Minus-Taste
- 6. Ein/Aus-Taste

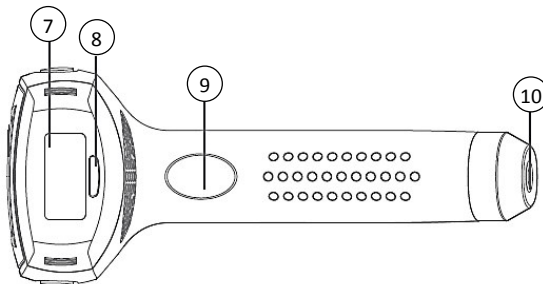

- 7. Lichtfenster
- 8. Hautsensor
- 9. Laser-Taste
- 10. Netzteilanschluss

## Display



Displayanzeige	Funktion	Parameter
HR (Hair removal)	Epilation	300.000 Impulse
SR (Skin rejuvenation)	Hautverjüngung, Aknebehandlung	100.000 Impulse
Zahl	Verbleibende Betriebszeit	-
Balken	Laserstufe	1 – 5 Stufen

## Inbetriebnahme

Wählen Sie den passenden Steckdosenanschluss (Euro, Typ-g, Typ-c10) aus und schieben Sie ihn auf den Stecker des Netzteils. Achten Sie darauf, dass er korrekt einrastet. Um einen Anschluss wieder zu entfernen, drücken Sie auf die PUSH-Taste unter dem Aufsatz und ziehen Sie ihn ab.

## Empfindlichkeits-Test durchführen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder zum ersten Mal auf einer neuen Hautstelle verwenden, führen Sie auf einem kleinen Hautbereich einen Empfindlichkeits-Test durch.



### **ACHTUNG!**

**Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie alle metallischen Gegenstände wie Ringe, Armbänder, Ketten usw. vom Körper entfernt haben! Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts führen!**

1. Rasieren Sie die Körperhaare auf der zu behandelnden Stelle und reinigen Sie die Körperstelle.
2. Setzen Sie den Aufsatz mit dem gelben Lichtfenster 100.000 auf das Gerät.



3. Reinigen und desinfizieren Sie den Aufsatz, insbesondere das Lichtfenster.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Geräts und das andere Ende mit einer Steckdose. Es erscheint **OFF** im Display. Es erscheint **SR HR** im Display.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken. Das Display schaltet sich ein. Das Gerät befindet sich im manuellen Modus.
6. Drücken Sie die Minus- oder Plus-Taste, um eine geringe Laserstufe (1. oder 2. Stufe) einzustellen.
7. Setzen Sie die Schutzbrille auf.
8. Setzen Sie dann den Kopf des Gerätes mit dem Lichtfenster im 90°-Winkel auf die Haut auf. Wenn der Hautsensor Kontakt zur Haut hat und die Bereitschaftsanzeigen des Gerätes grün leuchten, drücken Sie die Laser-Taste. Geben Sie 2 bis 3 Lichtimpulse auf den Hautbereich ab.
9. Prüfen Sie nach 30 Minuten den Zustand der Hautstelle. Wenn sie keine Irritationen aufweist, können Sie das Gerät dort verwenden. Sollte Ihre Haut rot und geschwollen sein, warten Sie 24 Stunden. Ist die Haut weiterhin rot und geschwollen, suchen Sie einen Arzt auf. Sind die Irritationen abgeklungen, testen Sie die Hautstelle erneut.

## Verwendung



### **ACHTUNG!**

**Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie alle metallischen Gegenstände wie Ringe, Armbänder, Ketten usw. vom Körper entfernt haben! Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts führen!**



### **HINWEIS:**

*Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Haut gebräunt oder verbrannt ist, führen Sie einen Empfindlichkeitstest auf Ihrer Haut (siehe Kapitel **Vor der ersten Verwendung**) durch.*

## IPL-Technologie (Intense Pulsed Light)

Das Laserlicht durchdringt die oberste Hautschicht. Durch die Umwandlung des Lichtes in Wärme und durch das Erhitzen der näheren Umgebung, erleidet die Haarwurzel einen gewollten Wärmeschaden, der schließlich zur Zerstörung der Haarwurzel-Zellen führt.

## Manueller Modus / automatischer Modus

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät standardmäßig im manuellen Modus. Wenn Sie die Laser-Taste drücken, wird ein Lichtimpuls ausgegeben. Dieser Modus ist besonders für die Behandlung kleiner Hautbereiche geeignet.

Um in den automatischen Modus zu wechseln, drücken Sie die Laser-Taste für 2 Sekunden. Es erklingen 4 Signaltöne und das Gerät wechselt in den automatischen Modus. Dieser Modus eignet sich besonders für die Behandlung großer Hautbereiche.

Sobald Sie das Gerät auf die Haut aufsetzen, gibt das Gerät automatisch Lichtimpulse aus, ohne dass Sie die Laser-Taste drücken.



### **ACHTUNG!**

*Wenn sich das Gerät im automatischen Modus befindet, achten Sie darauf, dass kein anderer Bereich, als der gewünschte, dem Laser ausgesetzt wird. Lassen Sie niemanden den Aufsatz berühren.*

## **Aufsätze**

<b>Aufsatz</b>	<b>Behandlung</b>
Gelbes Lichtfenster 100.000	SR / HR
Gelbes Lichtfenster 300.000	SR



### **HINWEIS:**

*Verwenden Sie nur einen Aufsatz pro Tag auf einer Hautstelle. Wenn Sie eine Behandlung mit einem anderen Aufsatz durchführen wollen, warten Sie einen Tag, bevor Sie ihn verwenden.*

## **Behandlungsschritte Haarentfernung**


1. Rasieren Sie die Körperhaare auf der zu behandelnden Stelle und reinigen Sie die Körperstelle.
2. Setzen Sie den Aufsatz mit dem gelben Lichtfenster 100.000 auf das Gerät.



3. Reinigen und desinfizieren Sie den Aufsatz, insbesondere das Lichtfenster.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Geräts und das andere Ende mit einer Steckdose. Es erscheint **OFF** im Display.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken. Das Display schaltet sich ein. Es erscheint **SR HR** im Display.
6. Stellen Sie mit den Minus- und Plus-Tasten die gewünschte Laserstufe ein. Starten Sie immer auf der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Intensität nur langsam!
7. Setzen Sie die Schutzbrille auf.
8. Verwenden Sie das Gerät entsprechend des gewählten Modus (siehe Kapitel **Manueller Modus** bzw. **Automatischer Modus**).
  - **Manueller Modus:** Setzen Sie den Kopf des Gerätes mit dem Lichtfenster im 90°-Winkel auf die Haut auf. Wenn der Hautsensor Kontakt zur Haut hat und die Bereitschaftsanzeigen des Gerätes grün leuchten, können Sie mit der Behandlung

beginnen. Drücken Sie die Laser-Taste. Geben Sie 2 bis 3 Lichtimpulse auf einen zu behandelnden Bereich ab, bevor Sie das Gerät auf den nächsten Bereich setzen. Achten Sie darauf, dass sich die zu behandelten Bereiche jeweils um ein Drittel überschneiden. Zeit zwischen den Lichtimpulsen: 5 – 6 Sekunden.

- **Automatischer Modus:** Setzen Sie den Kopf des Gerätes mit dem Lichtfenster im 90°-Winkel auf die Haut auf. Wenn der Hautsensor Kontakt zur Haut hat, wird der Lichtimpuls automatisch ausgegeben. Wiederholen Sie den Vorgang 2 – 3 Mal, bevor Sie das Gerät auf den nächsten Bereich setzen. Achten Sie darauf, dass sich die zu behandelten Bereiche jeweils um ein Drittel überschneiden. Wenn Sie das Gerät dauerhaft auf eine Hautstelle halten, ohne es zu bewegen, stoppen nach 8 Sekunden die Lichtimpulse. Zeit zwischen den Lichtimpulsen: 2 – 3 Sekunden.

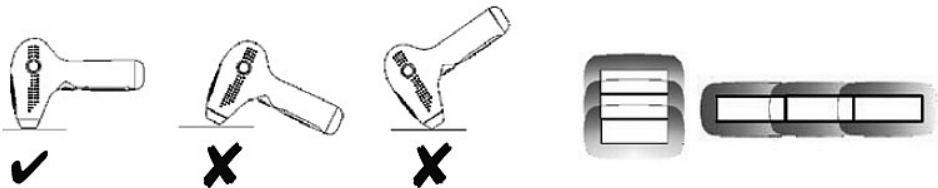

9. Drücken Sie nach der Verwendung die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie das Gerät länger als 5 Minuten nicht verwenden, schaltet es sich automatisch aus.

## Behandlungsschritte für die Aknebehandlung

1. Reinigen Sie die zu behandelnde Körperstelle.
2. Setzen Sie den Aufsatz mit dem gelben Lichtfenster 300.000 auf das Gerät.



3. Reinigen und desinfizieren Sie den Aufsatz, insbesondere das Lichtfenster.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Geräts und das andere Ende mit einer Steckdose. Es erscheint **OFF** im Display.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken. Das Display schaltet sich ein. Es erscheint **SR** im Display.
6. Stellen Sie mit den Minus- und Plus-Tasten die gewünschte Laserstufe ein. Starten Sie immer auf der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Intensität nur langsam!
7. Setzen Sie die Schutzbrille auf.
8. Setzen Sie den Kopf des Gerätes mit dem Lichtfenster im 90°-Winkel auf die Haut auf. Wenn der Hautsensor Kontakt zur Haut hat und die Bereitschaftsanzeigen des Gerätes grün leuchten, drücken Sie die Laser-Taste.

9. Geben Sie einen Lichtimpuls auf den zu behandelnden Bereich ab, bevor Sie das Gerät auf den nächsten Bereich setzen. Achten Sie darauf, dass sich die zu behandelten Bereiche jeweils um ein Drittel überschneiden.

## Nach der Verwendung

- Wenn Ihre Haut nach der Behandlung irritiert ist, kühlen Sie sie gegebenenfalls mit einem Kühlkissen für 30 – 60 Minuten.
- Reinigen Sie Ihre Haut mit kaltem Wasser.
- Warten Sie nach der Behandlung 20 Minuten, bevor Sie eine Feuchtigkeitslotion oder Aloe Vera Gel auf die Haut auftragen. Verwenden Sie keine Produkte, die Ihre Haut reizen.
- Setzen Sie die Haut nach der Behandlung für 2 Stunden keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Tragen Sie einen Sonnenschutz auf, bevor Sie in die Sonne gehen.
- Duschen Sie nicht warm und nehmen Sie kein Dampfbad.
- Schwimmen Sie in den 2 Tagen nach der Behandlung nicht in chlorhaltigem Wasser.



### HINWEIS:

*Beachten Sie unbedingt die oben genannten Hinweise. Andernfalls kann es zu geschwollener Haut sowie zu kurzzeitigen oder längerfristigen Hautverfärbungen kommen!*

## Behandlungsaufbau

Bitte beachten Sie, dass das Behandlungsergebnis abhängig vom Hauttyp ist. Der Haarwuchs ist bei jedem Menschen unterschiedlich und ist abhängig von Lebensalter, Körpergewicht, Stoffwechsel, Hormonhaushalt, ethnischer Abstammung, Medikamenteneinnahme und weiteren Faktoren.

Führen Sie im ersten Monat maximal 2 Behandlungen pro Woche durch, ab dem zweiten Monat nur noch 1 Behandlung pro Woche. Führen Sie die nächste Behandlung durch, wenn ca. 30 Prozent der Haare auf der behandelten Fläche nachgewachsen sind.

Führen Sie eine Aknebehandlung ein- bis zweimal die Woche durch. Nach 2 bis 3 Monaten sollten Sie eine Verbesserung der Haut wahrnehmen.

## Reinigung und Aufbewahrung

Ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie den Steckdosenanschluss. Lassen Sie das Gerät für mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie das Lichtfenster mit einem weichen feuchten Tuch ohne Alkohol säubern. Lassen Sie es trocknen und bewahren Sie es an einem gut belüfteten und trockenen Ort auf. Achten Sie darauf, das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.


## Problemlösungen

- **Das Display schaltet sich nicht ein.**  
Prüfen Sie, ob Sie das Gerät korrekt mit dem Netzteil verbunden haben und verbinden Sie es ggf. erneut.
- **Das Gerät lässt sich nicht einschalten.**  
Sie haben ggf. zu kurz auf die Ein/Aus-Taste gedrückt. Drücken Sie sie erneut.
- **Die HR- und SR-Anzeige blinkt im Display.**  
Sie haben den Aufsatz nicht korrekt auf das Gerät aufgesetzt. Setzen Sie es erneut auf das Gerät. Schalten Sie dazu das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **Der Laser funktioniert nicht, wenn auf die Laser-Taste gedrückt wird.**
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Aufsatz Ihre Haut berühren.
  2. Das Licht im Aufsatz hat sein Lebensende erreicht. Ersetzen Sie den Aufsatz.
  3. Das Gerät ist noch nicht in Bereitschaft. Warten Sie, bis die Bereitschafts-LEDs grün leuchten.
- **Das Gerät schaltet sich automatisch aus.**  
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie ca. 3 – 5 Minuten keine Eingabe vorgenommen haben. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste wieder ein.



## Technische Daten

Stromversorgung	100 – 240 V, 50/ 60 Hz, < 36 W
Laserstufen	5 Stufen
Abschaltautomatik	Nach ca. 3 – 5 Minuten
Lebensdauer der Lampe	Ca. 15 Jahre (bei empfohlener Nutzung)
Lichtspektrum	560 nm – 1.200 nm
Aufsätze	100.000, 300.000
Laserbereich	4 cm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur	20 – 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%, nicht kondensierend
Abmessungen	190 x 150 x 70 mm
Gewicht	550 g

## Länderliste Steckdosenanschlüsse

Eurostecker (Typ-C)	
<p>Ägypten, Äquatorialguinea, Äthiopien, Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbaidshan, Azoren, Balearen, Bangladesch, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Französisch-Guinea, Gabun, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Insel Man, Irak, Iran, Island, Israel, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgistan, Komoren, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Niederlande, Niger, Nordkorea, Norwegen, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Peru, Portugal, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Südsudan, Südafrika, Südkorea, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik</p>	



<p>Commonwealth-Stecker Typ-G</p>	
<p>Bahrain, Bangladesch, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, China, Dominica, El Salvador, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Indonesien, Insel Man, Irak, Irland, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanainseln, Katar, Kenia, Kuwait, Libanon, Macau, Malawi, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Zypern</p>	
<p>Typ-A NEMA 1-15</p>	
<p>Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Bermuda, Bolivien, Brasilien, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Japan, Jemen, Jungferninseln, Kaimaninseln, Kambodscha, Kanada, Kolumbien, Kuba, Laos, Libanon, Liberia, Malediven, Mexiko, Mikronesien, Montserrat, Nicaragua, Niederländische Antillen, Niger, Okinawa, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien, St. Vincent und die Grenadinen, Tahiti, Taiwan, Thailand, Trinidad und Tobago, USA, Venezuela, Vietnam</p>	





Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 07.06.2018 – LZ/FR/MN

## IPL-130.lcd

# Épilateur à lumière pulsée réglable sur 5 niveaux

avec 2 têtes d'impulsions lumineuses, écran LCD et lunettes de protection

## Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouvel épilateur</b> .....	<b>3</b>
Contenu .....	3
Accessoires en option.....	3
<b>Consignes préalables</b> .....	<b>4</b>
Consignes de sécurité.....	4
Contre-indications .....	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	7
Déclaration de conformité .....	7
<b>Description du produit</b> .....	<b>8</b>
Écran.....	9
<b>Mise en marche</b> .....	<b>9</b>
<b>Effectuer un test de sensibilité</b> .....	<b>9</b>
<b>Utilisation</b> .....	<b>10</b>
Technologie IPL (lumière intense pulsée) .....	10
Mode manuel / Mode automatique.....	10
Embouts.....	11
Étapes de l'épilation .....	11
Étapes pour le traitement de l'acné .....	12
Après utilisation.....	13
Construction de l'épilation .....	13
Nettoyage et stockage .....	13
Dépannage .....	13
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>14</b>
<b>Prise d'alimentation secteur par pays</b> .....	<b>14</b>

# Votre nouvel épilateur

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet épilateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Épilateur
- 2 embouts
- Adaptateur secteur à 3 fiches différentes
- Lunettes de protection
- Mode d'emploi

## Accessoires en option :

(non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Tondeuse (p. ex. NX8028)
- Lunettes de protection (NX3071)

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Assurez-vous que l'eau ou l'humidité ne puisse pas pénétrer dans l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.



- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Lors de l'utilisation d'un dispositif à laser, vous devez absolument veiller à ce que le rayon laser soit orienté de façon à ce qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de projection et qu'aucun rayon reflété de manière involontaire (par le biais d'objets réfléchissants, p. ex.) ne parvienne jusqu'à l'endroit où se trouvent les personnes présentes.
- Le rayonnement laser peut être dangereux si le rayon laser ou sa réflexion atteint un œil sans protection adéquate.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans cette notice.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique et privé uniquement, et ne peut être utilisé à des fins publicitaires.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne le mettez pas en marche s'il présente des dommages visibles.
- Si vous souffrez d'affections cutanées ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou autres récipients contenant de l'eau. Risque de choc électrique !
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le de l'alimentation électrique immédiatement après l'utilisation. La proximité de l'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez pas le produit à proximité de vos yeux, mamelons, organes génitaux, tatouages, de votre maquillage permanent, de vos taches ou marques de naissance ou de vos taches de rousseur.
- Effectuez un test sur votre peau avant la première utilisation. Choisissez pour ce faire une zone sur votre bras et commencez avec le niveau de puissance le plus bas. Passez à un niveau d'intensité plus élevé 3 à 5 fois. Si vous présentez une rougeur, un gonflement ou une brûlure, une altération des follicules pileux, une irritation de la peau ou toute autre anomalie, consultez un médecin avant d'utiliser à nouveau l'appareil. Si vous ne constatez aucune altération de votre peau au bout de 24 h, vous pouvez utiliser l'appareil normalement.
- Désinfectez la fenêtre lumineuse avant et après chaque utilisation en vaporisant de l'alcool ou du désinfectant sur une boule de coton et en frottant la fenêtre lumineuse. Ne vaporisez pas l'alcool ou le désinfectant directement sur la fenêtre lumineuse.
- Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse.
- Pendant l'utilisation, portez toujours les lunettes de protection. Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse, même avec les lunettes de protection !
- Il est normal que la peau présente une légère rougeur pendant le traitement. Appliquez si besoin un coussin rafraîchissant après le traitement.
- Si vous remarquez une odeur de poils brûlés pendant le traitement, vous n'avez pas suffisamment rasé la zone de la peau concernée.

- Après le traitement, utilisez une lotion hydratante ou un gel à l'aloë vera pour soigner les zones traitées de la peau.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez pris un traitement médicamenteux susceptible d'augmenter la sensibilité de votre peau à la lumière dans le courant du dernier mois. Lisez impérativement la notice des médicaments que vous prenez.
- Pendant la période de traitement, ne mangez pas d'aliments susceptibles d'affecter la photosensibilité, tels que des épinards, du colza ou de la moutarde.
- Réglez l'intensité selon votre besoin (de faible à élevé). Le niveau d'intensité le plus élevé permet d'atteindre un meilleur résultat.
- Les réactions cutanées peuvent se manifester plus tardivement sur les peaux plus foncées. N'augmentez pas le niveau d'intensité trop rapidement.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, n'utilisez pas de gel ou produits similaires sur votre peau pendant le traitement.
- L'appareil n'étant pas étanche, ne l'utilisez pas dans une baignoire, une douche ou tout autre endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- Pour des raisons de sécurité, si l'appareil est mouillé alors qu'il est en fonctionnement, éteignez-le et débranchez la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits dans lesquels d'importants champs magnétiques ou électromagnétiques agissent.
- N'appliquez pas de maquillage sur la zone à traiter.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur une même portion de peau.
- Si votre peau est encore rouge et enflée après 24 h, consultez votre médecin avant de réutiliser l'appareil.
- N'obstruez pas les ouvertures de l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou le connecteur est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement facilement inflammable ou explosif.
- Veillez à bien aérer la pièce pendant le traitement.



- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans une baignoire, une douche ou dans l'eau.



- lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Contre-indications

Cet appareil ne **convient pas** pour :

- Les enfants de moins de 14 ans,
- Les patients atteints de troubles cardiaques, d'hypertension artérielle, de tumeurs malignes et de maladies cutanées infectieuses,
- Les personnes ayant souffert d'hypersensibilité à la lumière ou présentant du diabète,
- Les personnes ayant suivi un autre traitement visant à supprimer les poils dans les 6 dernières semaines,
- Les personnes suivant dans le même temps un traitement à base d'huiles essentielles,

- Les femmes enceintes ou les femmes en période de menstruation,
- Les femmes qui allaitent ou qui tentent d'avoir un enfant,
- Les personnes qui tendent à avoir des cicatrices,
- Les personnes prenant de l'aspirine ou des immunosuppresseurs,
- Les personnes ayant été exposées à de forts rayons du soleil ou ayant utilisé un solarium dans les 2 semaines précédant le traitement, Si vous ne savez pas si votre peau est bronzée ou brûlée, effectuez un test de sensibilité sur peau (voir le chapitre **Avant la première utilisation**) et attendez 24 heures pour vérifier si l'irritation se forme.
- Les personnes utilisant de l'autobronzant,
- Les paupières supérieures,
- Les personnes présentant une inflammation systémique ou locale,
- Les personnes dont la peau est sensible à la lumière ou ayant pris un traitement médicamenteux susceptible d'augmenter la sensibilité de la peau à la lumière,
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil implanté. Dans le cas contraire, vous risquez un dysfonctionnement de l'appareil implanté !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3068 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 89/686/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension


*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

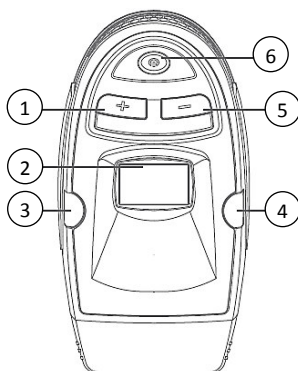

1. Touche Plus
2. Écran
3. Voyant LED 1
4. Voyant LED 2
5. Touche Moins
6. Touche Marche/Arrêt

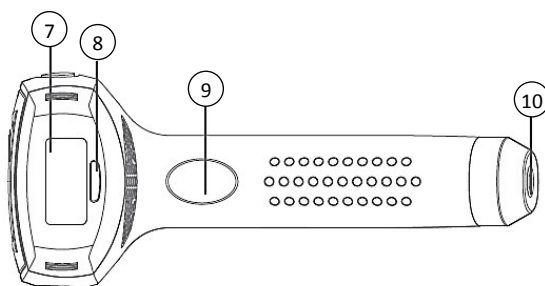

7. Fenêtre lumineuse
8. Capteur de peau
9. Touche Laser
10. Prise d'alimentation

## Écran



Affichage de l'écran	Fonction	Paramètres
HR (Hair removal)	Épilation	300000 impulsions
SR (Skin rejuvenation)	Rajeunissement de la peau, traitement de l'acné	100000 impulsions
Chiffre	Autonomie en fonctionnement restante	-
Barres	Niveau de laser	1 – 5 h

## Mise en marche

Choisissez la fiche adaptée (euro, type G ou C10) et insérez-la sur la fiche de l'adaptateur secteur. Veillez à ce qu'elle s'enclenche bien. Pour débrancher l'appareil, appuyez sur la touche PUSH située sous l'embout et tirez-le pour le sortir.

## Effectuer un test de sensibilité

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, ou si vous l'appliquez sur une nouvelle zone de peau, effectuez un test de sensibilité sur une petite portion de peau.



### ATTENTION !

**Avant utilisation, assurez-vous d'avoir retiré tous vos objets métalliques (bagues, bracelets, chaînes, etc.) de votre corps ! Dans le cas contraire, vous risquez un dysfonctionnement de l'appareil !**

1. Rasez les poils de la zone à traiter et nettoyez cette partie.
2. Placez l'embout avec la fenêtre lumineuse jaune 100000 sur l'appareil.



3. Nettoyez et désinfectez l'embout, en particulier la fenêtre lumineuse.

4. Reliez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation secteur de l'appareil, et branchez l'autre extrémité à une prise murale. L'écran affiche **OFF**, puis **SR HR**.
5. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'écran s'allume. L'appareil se trouve en mode manuel.
6. Appuyez sur les touches Plus ou Moins pour régler un niveau de laser bas (niveau 1 ou 2).
7. Enfilez les lunettes de protection.
8. Placez la tête de l'appareil pourvu de la fenêtre lumineuse sur votre peau en un angle de 90°. Si le capteur de peau est en contact avec la peau et si les voyants de l'appareil brillent en vert, appuyez sur la touche Laser. Appliquez 2 à 3 impulsions lumineuses sur la zone de peau.
9. Vérifiez l'état de la zone de peau au bout de 30 minutes. Si aucune irritation n'apparaît, vous pouvez continuer d'utiliser l'appareil. Si votre peau est rouge et enflée, attendez 24 h. Si la rougeur et le gonflement persiste, consultez un médecin. Si l'irritation s'atténue, testez à nouveau votre zone de peau.

## Utilisation

### **ATTENTION !**

***Avant utilisation, assurez-vous d'avoir retiré tous vos objets métalliques (bagues, bracelets, chaînes, etc.) de votre corps ! Dans le cas contraire, vous risquez un dysfonctionnement de l'appareil !***



### **NOTE :**

*Si vous ne savez pas si votre peau est bronzée ou brûlée, effectuez un test de sensibilité sur peau (voir le chapitre **Avant la première utilisation**).*

## Technologie IPL (lumière intense pulsée)

La lumière du laser pénètre la partie superficielle de la peau. La lumière est convertie en chaleur, ce qui a pour conséquence le réchauffement de l'environnement le plus proche ; la racine du poil subit alors des dommages thermiques voulus, entraînant la destruction des cellules de la racine du poil.

## Mode manuel / Mode automatique

Après l'allumage, l'appareil se trouve automatiquement en mode manuel. Lorsque vous appuyez sur la touche Laser, une impulsion lumineuse est envoyée. Ce mode est conçu pour le traitement de petites zones de peau.

Pour basculer en mode automatique, maintenez la touche Laser enfoncée pendant 2 secondes. 4 signaux sonores se font entendre et l'appareil bascule en mode automatique. Ce mode est conçu pour le traitement de grandes zones de peau. Dès que l'appareil est appliqué sur la peau, il envoie automatiquement des impulsions lumineuses sans que vous ayez à appuyer sur la touche Laser.



### ATTENTION !

*Lorsque l'appareil se trouve en mode automatique, veillez à n'appliquer le laser que sur la zone de peau que vous avez choisi et à ne pas toucher d'autres zones. Ne laissez personne toucher l'embout.*

## Embouts

Embout	Traitement
Fenêtre lumineuse jaune 100000	SR / HR
Fenêtre lumineuse jaune 300000	SR



### NOTE :

*N'utilisez qu'un seul embout sur une même zone de peau par jour. Si vous souhaitez traiter la zone de peau avec un autre embout, attendez le jour d'après.*


## Étapes de l'épilation

1. Rasez les poils de la zone à traiter et nettoyez cette partie.
2. Placez l'embout avec la fenêtre lumineuse jaune 100000 sur l'appareil.



3. Nettoyez et désinfectez l'embout, en particulier la fenêtre lumineuse.
4. Reliez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation secteur de l'appareil, et branchez l'autre extrémité à une prise murale. L'écran affiche **OFF**.
5. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. L'écran s'allume. L'écran affiche **SR HR**.
6. Réglez le niveau de laser avec les touches Plus ou Moins. Commencez toujours avec le niveau le plus bas et n'augmentez l'intensité que lentement.
7. Enfilez les lunettes de protection.
8. Utilisez l'appareil conformément au mode choisi (cf. chapitre **Mode manuel** ou **Mode automatique**).
  - **Mode manuel** : Placez la tête de l'appareil pourvu de la fenêtre lumineuse sur votre peau en un angle de 90°. Si le capteur de peau est en contact avec la peau et si les voyants de l'appareil brillent en vert, vous pouvez commencer le traitement. Appuyez sur la touche Laser. Appliquez 2 à 3 impulsions lumineuses sur la zone de peau à traiter, avant de déplacer l'appareil sur la prochaine zone de peau. Veillez à ce que les zones à traiter se chevauchent les unes les autres d'un tiers. Écart entre les impulsions lumineuses : 5 à 6 secondes.

- **Mode automatique** : Placez la tête de l'appareil pourvu de la fenêtre lumineuse sur votre peau en un angle de 90°. Si le capteur de peau est en contact avec la peau, une impulsion lumineuse est envoyée. Répétez le processus 2 à 3 fois avant d'orienter l'appareil sur une nouvelle zone de peau. Veillez à ce que les zones à traiter se chevauchent les unes les autres d'un tiers. Si vous maintenez l'appareil en continu sur une même zone de peau sans bouger, les impulsions lumineuses s'arrêtent au bout de 8 secondes. Écart entre les impulsions lumineuses : 2 à 3 secondes.

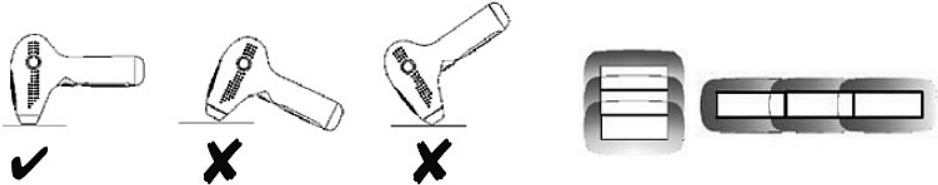

9. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt après utilisation pour éteindre l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes, ce dernier s'éteint automatiquement.

## Étapes pour le traitement de l'acné

1. Nettoyez la zone de peau à traiter.
2. Placez l'embout avec la fenêtre lumineuse jaune 300000 sur l'appareil.



3. Nettoyez et désinfectez l'embout, en particulier la fenêtre lumineuse.
4. Reliez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation secteur de l'appareil, et branchez l'autre extrémité à une prise murale. L'écran affiche **OFF**.
5. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. L'écran s'allume. L'écran affiche **SR**.
6. Réglez le niveau de laser avec les touches Plus ou Moins. Commencez toujours avec le niveau le plus bas et n'augmentez l'intensité que lentement.
7. Enfilez les lunettes de protection.
8. Placez la tête de l'appareil pourvu de la fenêtre lumineuse sur votre peau en un angle de 90°. Si le capteur de peau est en contact avec la peau et si les voyants de l'appareil brillent en vert, appuyez sur la touche Laser.
9. Appliquez une impulsion lumineuse sur la zone de peau à traiter, avant de déplacer l'appareil sur la prochaine zone de peau. Veillez à ce que les zones à traiter se chevauchent les unes les autres d'un tiers.



## Après utilisation

- Si votre peau est irritée après le traitement, rafraîchissez-la si besoin avec un coussin rafraîchissant pendant 30 à 60 minutes.
- Nettoyez votre peau à l'eau froide.
- Attendez 20 minutes après le traitement avant d'appliquer une lotion hydratante ou de l'aloë vera sur votre peau. N'utilisez pas de produit irritant la peau.
- N'exposez pas votre peau traitée au rayonnement direct du soleil pendant les 2 heures qui suivent. Protégez-vous du soleil avant de sortir au soleil.
- Ne vous douchez pas à l'eau chaude et ne prenez pas de bains de vapeur.
- Ne nagez pas dans une eau chlorée dans les 2 jours qui suivent le traitement.



### NOTE :

*Vous devez impérativement tenir compte des instructions des instructions ci-dessus. Sinon, votre peau risque de gonfler et de changer de couleur pour une durée plus ou moins longue.*

## Construction de l'épilation

Notez que le résultat du traitement dépend du type de peau. La pousse des poils diffère pour chaque individu et dépend de l'âge, du poids du corps, du métabolisme, de l'équilibre hormonal, de l'origine ethnique, de la prise de médicaments, et d'autres facteurs.

Pendant le premier mois, ne traitez votre peau que 2 fois par semaine. Pendant le deuxième mois, ne traitez votre peau qu'une fois par semaine. N'effectuez le traitement suivant que lorsque 30 % des poils ont repoussé sur la zone de peau traitée.

Ne procédez au traitement de l'acné qu'une à deux fois par semaine. Vous devez remarquer une amélioration de votre peau au bout de 2 à 3 mois.

## Nettoyage et stockage

Débranchez la fiche d'alimentation et retirez la fiche. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant de nettoyer la fenêtre lumineuse avec un chiffon doux humide sans alcool. Laissez-le sécher et rangez-le dans un endroit bien aéré et sec. Assurez-vous de ranger l'appareil hors de portée des enfants.

## Dépannage

- **L'écran ne s'allume pas.**  
Vérifiez que l'appareil est correctement relié à l'adaptateur secteur. Rebranchez-le si besoin.
- **L'appareil ne s'allume pas.**  
Il est possible que vous ayez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. Appuyez à nouveau dessus.

- **L'affichage HR et SR clignote à l'écran.**

Vous n'avez pas inséré l'embout correctement sur l'appareil. Réinstallez-le sur l'appareil. Éteignez pour ce faire l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation.

- **Le laser ne fonctionne pas même lorsque la touche Laser est appuyée.**

1. Assurez-vous que l'embout touche votre peau. 2. L'ampoule dans l'embout est en fin de vie. Remplacez l'embout. 3. L'appareil n'est pas encore prêt à l'emploi. Attendez que les voyants LED brillent en vert.


- **L'appareil s'éteint automatiquement.**

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque vous n'effectuez aucune saisie pendant 3 à 5 minutes. Rallumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	100 – 240 V, 50/ 60 Hz, < 36 W
Niveaux de laser	5 niveaux
Arrêt automatique	Après 3 – 5 min
Spectre lumineux	560 Nm – 1200 Nm
Embouts	100000 / 300000
Zone du laser	4 cm <sup>2</sup>
Température de fonctionnement	20 – 60 °C
Humidité relative de l'air	20 – 90 %, non condensée
Dimensions	190 x 150 x 70 mm
Poids	550 g

## Prise d'alimentation secteur par pays

Fiche Type C	
<p>Açores, Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Baléares, Bangladesh, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Corée du Nord, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Érythrée, Espagne Saint-Vincent-et-les Grenadines, Estonie, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Guinée française, Hongrie, Ile de Man, Îles Anglo-Normandes, Îles Canaries, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Laos, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Madère, Mali, Maroc, Martinique, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Norvège, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas,</p>	

Pérou, Pérou, Philippines, Portugal, République centrafricaine,, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Suède, Suisse, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor Oriental, Togo, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Vietnam, Zambie

Fiche du Commonwealth  
Type G



Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Belize, Bhoutan, Botswana, Brunei, Cambodge , Chine, Chypre, Dominique, El Salvador, Émirats arabes unis, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Ile de Man, Îles Canaries, Îles Falkland, Indonésie, Irak, Irlande, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Macao, Malawi, Malte, Maurice, Myanmar, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sierra Leone, Singapour, Tanzanie, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Type A  
NEMA 1-15



Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Arabie Saoudite, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Cambodge, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, États-Unis, Guam, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Caïmans, Îles Vierges , Jamaïque, Japon, Laos, Liban, Libéria, Maldives, Mexique, Micronésie, Montserrat, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto Rico, Saint Vincent et les Grenadines, Samoa, Tahiti, Taiwan, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Venezuela, Vietnam, Yémen

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02