

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kalt- und Warmkompressen. Verwenden Sie die Kompressen nach Bedarf warm oder kalt. Legen Sie sie in den Vliesbezug, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Kalt- und Warmkompressen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x große Kompressen
- 2x mittlere Kompressen
- 2x kleine Kompressen
- 3x Vliesbezüge
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Vliesbezug		100 % Polyester 40°C-Wäsche
Maße der Kompressen	Groß	29 × 12 cm
	Mittel	14,5 × 13 cm
	Klein	15,5 × 8,5 cm
Gewicht der Kompressen	Groß	350 g
	Mittel	140 g
	Klein	130 g

Verwendung

Ihre Kompressen können warm oder kalt verwendet werden. Achten Sie bei der Anwendung bitte darauf, dass die Temperatur der Komresse nicht zu extrem für Ihre Haut ist.

1. Warmkompressen



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass die Komresse niemals direkten Kontakt mit heißen Oberflächen hat, da sie sonst beschädigt wird.

1.1. In der Mikrowelle erhitzen

1. Erhitzen Sie die Komresse in der Mikrowelle. Achten Sie darauf, dass die Komresse nicht zu heiß wird.



HINWEIS:

Die Erhitzungszeit in der Mikrowelle ist von der Größe der Komresse und Leistung Ihrer Mikrowelle abhängig. Bei Mikrowellen mit einer Leistung von 600 W empfehlen wir bei 100 % die folgenden Zeiten:

- Kleine Komresse: 30 Sekunden
- Mittlere Komresse: 1 Minute
- Große Komresse: 2 Minuten

2. Prüfen Sie, ob die Komresse die gewünschte Temperatur hat. Sollte dies nicht der Fall sein, erhitzen Sie sie in 10-Sekunden-Schritten, bis die gewünschte Temperatur vorliegt.
3. Geben Sie die Komresse in einen passenden Vliesbezug.
4. Legen Sie die Komresse auf die gewünschte Stelle.

1.2. Im Wasserbad erhitzen


1. Erhitzen Sie die Komresse im Wasserbad (4 – 10 Minuten). Achten Sie darauf, dass die Komresse nicht zu heiß wird.
2. Testen Sie nach 4 Minuten bitte das erste Mal, ob die gewünschte Temperatur erreicht ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein, testen Sie die Temperatur bitte jede Minute, bis die gewünschte Temperatur vorliegt.
3. Geben Sie die Komresse in einen passenden Vliesbezug.
4. Legen Sie die Komresse auf die gewünschte Stelle.

2. Kaltkompressen

1. Legen Sie die Komresse für 1 – 2 Stunden in Ihr Gefrierfach.
2. Geben Sie die Komresse in einen passenden Vliesbezug.
3. Legen Sie die Komresse auf die gewünschte Stelle.

Reinigung

- Reinigen Sie die Komresse mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Vliesbezug bei 40 °C in der Waschmaschine.

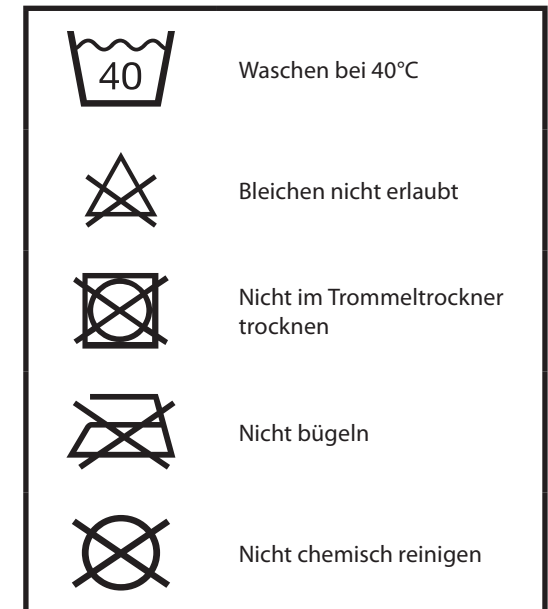

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Halten Sie es von spitzen oder scharfen Gegenständen und heißen Oberflächen fern.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Sofern Gel ausläuft oder Beschädigungen zu sehen sind, entsorgen Sie das Produkt. Verwenden Sie, wenn möglich, geeignete Handschuhe. Vermeiden Sie dabei Kontakt mit der Haut und den Augen! Waschen Sie Ihre Hände nach der Entsorgung.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4876-675 in Übereinstimmung mit der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4876 ein.



INTCO MEDICAL(HK)Co., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG



MedNet GmbH
Borkstr. 10, 48163 Münster, Germany



Bedienungsanleitung lesen



Verwendbar bis:



NX-4876

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces compresses chaudes et froides.

Les compresses peuvent rafraîchir ou réchauffer vos muscles, selon vos besoins. Placez-les dans leur housse en tissu polaire pour éviter un contact direct avec votre peau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 grandes compresses
- 2 compresses moyennes
- 2 petites compresses
- 3 housses
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Housse		100 % polyester
		Lavable à 40 °C
Dimensions compresses	Grande	29 × 12 cm
	Moyenne	14,5 × 13 cm
	Petite	15,5 × 8,5 cm
Poids compresses	Grande	350 g
	Moyenne	140 g
	Petite	130 g

Utilisation

Les compresses peuvent être utilisées chaudes ou froides. Lorsque vous appliquez une compresse, assurez-vous d'abord que sa température n'est pas excessive pour votre peau.

1. Compresses chaudes



ATTENTION !

Veillez à ce que la compresse n'entre jamais en contact direct avec une surface chaude. Vous risquez sinon de l'endommager.

1.1. Chauffage par four à micro-ondes

1. Placez la compresse au four à micro-ondes. Veillez à ne pas trop chauffer la compresse.



NOTE :

Le temps de chauffage au four à micro-ondes dépend de la taille de la compresse et de la puissance de votre four à micro-ondes. Pour les fours à micro-ondes d'une puissance de 600 W, nous recommandons les temps suivants :

- petite compresse : 30 secondes
- compresse moyenne : 1 minute
- grande compresse : 2 minutes

2. Vérifiez si la compresse a atteint la température souhaitée. Dans le cas contraire, réchauffez-la encore pendant 10 secondes. Procédez ainsi jusqu'à ce qu'elle soit à la bonne température.
3. Glissez la compresse dans la housse.
4. Placez la compresse sur votre corps.

1.2. Chauffage au bain-marie

1. Placez la compresse dans un bain-marie (4 à 10 minutes). Veillez à ne pas trop chauffer la compresse.
2. Au bout de 4 minutes, vérifiez si la température souhaitée a été atteinte. Dans le cas contraire, réchauffez-la encore pendant 1 minute. Procédez ainsi jusqu'à ce qu'elle soit à la bonne température.
3. Glissez la compresse dans la housse.
4. Placez la compresse sur votre corps.

2. Compresses froides

1. Placez la compresse au congélateur pendant 1 à 2 heures.
2. Glissez la compresse dans la housse.
3. Placez la compresse sur votre corps.

Nettoyage

- Nettoyez la compresse à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié.
- Nettoyez la housse à 40 °C à la machine à laver.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Tenez-le à l'écart des objets pointus ou tranchants et des surfaces chaudes.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Si le produit est endommagé ou si le gel fuit, jetez le produit. Si possible, utilisez des gants. Évitez tout contact avec votre peau ou vos yeux. Lavez-vous les mains après avoir jeté le produit.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- En cas de contact avec les yeux : rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consultez un médecin.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4876 conforme à la directive 93/42/CEE actuelle du Parlement Européen, relative aux dispositifs médicaux.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



INTCO MEDICAL(HK)Co., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG



MedNet GmbH
Borkstr. 10, 48163 Münster, Germany



Lire le mode d'emploi !



Utilisable jusqu'au :



NX-4876