

Heizgürtel/ Schulter- Heizkissen

Bedienungsanleitung



NX-7452



NX-7455

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Ihr neuer Heizgürtel/ neues Schulter-Heizkissen | 3 |
| Lieferumfang | 3 |
| Produktvarianten..... | 3 |
| Wichtige Hinweise zu Beginn | 4 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung..... | 7 |
| Konformitätserklärung | 7 |
| Verwendung | 8 |
| Reinigung und Pflege..... | 9 |
| Aufbewahrung | 10 |
| Fehlerbehebung | 10 |
| Technische Daten..... | 11 |

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.wilson-gabor.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Heizgürtel/ neues Schulter-Heizkissen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Heizgürtels/ Schulter-Heizkissens. Die kuschelige Wärme unterstützt die Blutzirkulation und somit die Entspannung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Heizgürtel/ Ihr neues Schulter-Heizkissen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Heizgürtel/ Schulter-Heizkissen
- Steuerungseinheit mit Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-7452: Elektrischer Heizgürtel für Rücken und Bauch, 100 W, bis 125 cm
- NX-7455: Schulter-Heizkissen mit 3 Heizstufen und Timer, 50 x 55 cm

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Regel- und/oder Steuereinheiten auf die für den ununterbrochenen Gebrauch empfohlene Einstellung, wenn das Produkt wahrscheinlich während eines ausgedehnten Zeitraums benutzt werden soll, z. B. wenn der Benutzer während der Verwendung einschläft.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es einlagern.
- Bewahren Sie das Produkt in vollständig abgekühlten Zustand an einem trockenen, kühlen Ort auf.
- Vermeiden Sie, das Produkt zu stark zu falten, und legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Wenn der Heizgürtel/ das Heizkissen, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Produkt nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Produkt zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei

denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden, Verbrennungen, Schwellungen, Blutergüssen oder anderen Verletzungen.
- Fragen Sie einen Arzt vor der Verwendung um Rat, wenn Sie an Thrombose oder Krampfadern leiden.
- Unterbrechen Sie die Verwendung, wenn Sie sich nicht wohl fühlen; dies gilt insbesondere für hitzeempfindliche Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Tiere.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in zusammengefaltetem Zustand.
- Achten Sie darauf, dass der Thermostat immer neben dem Produkt platziert wird, um korrekt funktionieren zu können; legen Sie ihn nicht auf oder unter das Produkt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-7452-675 und NX-7455-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7452 oder NX-7455 ein.



Verwendung

Entfalten Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen und verbinden Sie das Verbindungsstück mit dem Stecker des Heizgürtels/ Heizkissens. Verbinden Sie anschließend den Netzstecker mit einer Steckdose.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass der Heizgürtel/ das Heizkissen locker aufliegt und Luft zwischen dem Heizgürtel/ Heizkissen und Ihrem Körper zirkulieren kann. Vermeiden Sie einen Hitzestau.

Schalten Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen ein, indem Sie den Schalter auf die Position 1 schieben. Die LED-Anzeige leuchtet blau. Nach einigen Minuten werden Sie feststellen, dass der Heizgürtel/ das Heizkissen aufgeheizt wird.

Stellen Sie über die Steuerungseinheit die gewünschte Temperatur ein:

1 = niedrige Temperatur (empfohlene Einstellung für eine längere Verwendung)

2 = mittlere Temperatur

3 = hohe Temperatur (nicht empfohlen für eine längere Verwendung)

Der Heizgürtel/ das Heizkissen schaltet sich automatisch nach 90 Minuten ununterbrochenem Gebrauch ab. Die LED-Anzeige blinkt.

Schalten Sie in diesem Fall den Heizgürtel/ das Heizkissen aus, indem Sie den Schalter auf die Position 0 schieben. Wenn Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen weiter verwenden möchten, schalten Sie ihn wieder ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

Schalten Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen nach der Verwendung aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Lassen Sie ihn abschließend vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Entfernen Sie vor der Reinigung die Steuereinheit, damit diese keinen Schaden nimmt.

1. Trennen Sie Heizgürtel oder Heizkissen von der Stromversorgung. Lassen Sie sie vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie die Steuereinheit.
3. Reinigen Sie den kalten Heizgürtel / das kalte Heizkissen von Hand oder in der Waschmaschine (40°C, Feinwäsche).
4. Lassen Sie Heizgürtel oder Heizkissen an der Luft trocknen. Sie dürfen nicht in den Trockner gegeben oder gebügelt werden!



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Steuereinheit nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Schalten Sie Heizgürtel oder Heizkissen nicht ein, solange diese noch nass oder feucht sind.

Aufbewahrung

Falten Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen vorsichtig, wenn Sie ihn aufbewahren möchten.

Bewahren Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen an einem trockenen, kühlen Ort auf.

Überprüfen Sie den Heizgürtel/ das Heizkissen sowie das Kabel, die Steuerungseinheit und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen; nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.

Verwenden Sie keinen chemischen Mottenschutz.

Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Heizgürtel/ das Heizkissen, diese könnten den Heizgürtel/ das Heizkissen beschädigen.

Fehlerbehebung

Der Heizgürtel/ das Heizkissen heizt sich nicht auf:
Überprüfen Sie, ob der Heizgürtel/ das Heizkissen mit der Stromversorgung verbunden ist und der Heizgürtel/ das Heizkissen eingeschaltet ist.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung | 220 bis 240 V / 50 Hz |
| Nennleistung | 100 W |
| 3 Heizstufen | 53°C, 63°C, 73°C ±5°C |
| Automatische Abschaltung | nach ca. 90 Min. |
| Maße | NX-7452: bis 125 cm Körperumfang NX-7455: 50 x 55 cm |

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 10.01.2019 – BS/EX:JaW//MP

Ceinture chauffante / Coussin chauffant épaule et nuque Mode d'emploi

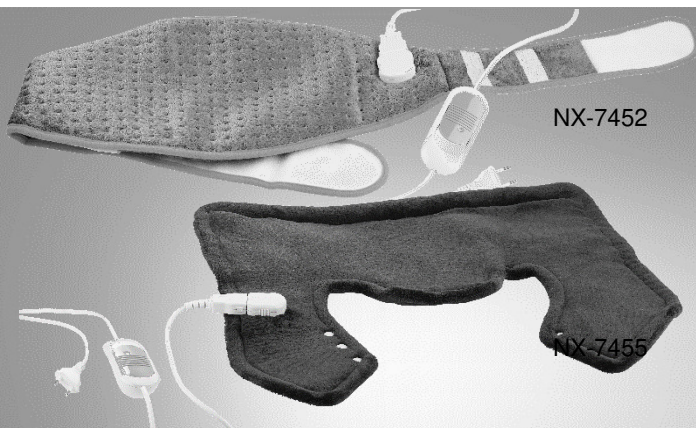


Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Votre nouvelle ceinture chauffante, votre nouveau coussin chauffant, | 3 |
| Contenu | 3 |
| Variantes du produit..... | 3 |
| Consignes préalables | 4 |
| Consignes de sécurité..... | 4 |
| Consignes importantes concernant le traitement des déchets | 7 |
| Déclaration de conformité | 8 |
| Utilisation | 9 |
| Nettoyage et entretien..... | 10 |
| Stockage..... | 10 |
| Dépannage | 11 |
| Caractéristiques techniques | 11 |

Votre nouvelle ceinture chauffante, votre nouveau coussin chauffant,

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette ceinture chauffante ou de ce coussin chauffant pour épaule et nuque. La chaleur agréable qu'elle procure favorise la circulation du sang et la détente.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ceinture chauffante / Coussin chauffant épaule et nuque
- Unité de commande avec adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX7452 : ceinture chauffante électrique 100 W à longueur réglable 125 cm
- NX7455 : coussin chauffant épaule et nuque 50 x 55 cm à 3 niveaux de chauffe et minuteur

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Lorsque l'appareil doit être utilisé pendant une durée prolongée (par exemple si l'utilisateur s'endort pendant l'utilisation), utilisez l'unité de commande pour sélectionner le niveau recommandé pour l'utilisation en continu.

- Utilisez uniquement l'accessoire fourni.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, et seulement lorsqu'il est complètement refroidi.
- Évitez de plier fortement le produit. Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si la ceinture ou le coussin chauffant, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.
- N'utilisez pas le produit sur des plaies ouvertes, des brûlures, des parties enflées, des ecchymoses ou d'autres blessures.
- Demandez conseil à un médecin avant d'utiliser ce produit en cas de thrombose ou de varice.

- Interrompez immédiatement l'utilisation si vous ne vous sentez pas bien. Ceci est valable en particulier pour les personnes sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas le produit sur des animaux.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est plié.
- Assurez-vous que le thermostat est toujours placé à côté du produit afin de pouvoir fonctionner correctement. Ne le placez jamais sur ou sous le produit.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-7452 et NX-7455, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Utilisation

Dépliez la ceinture ou le coussin chauffant et reliez le bloc de jonction au connecteur de la ceinture ou du coussin chauffant(e). Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.



ATTENTION !

Vérifiez que la ceinture ou le coussin chauffant n'est pas trop serré(e) et que l'air peut circuler entre la ceinture ou le coussin chauffant et votre corps. Évitez de créer une accumulation de chaleur.

Pour allumer la ceinture ou le coussin chauffant, placez l'interrupteur sur la position 1. Le voyant brille alors en bleu. Après quelques minutes, vous allez constater que la ceinture ou le coussin chauffant chauffe.

Réglez la température souhaitée à l'aide de l'unité de commande :

1 = température faible : réglage recommandé pour une utilisation prolongée

2 = température moyenne

3 = température élevée (n'est pas recommandée pour une utilisation prolongée)

La ceinture ou le coussin chauffant s'arrête automatiquement après 90 minutes d'utilisation ininterrompue. Le voyant LED clignote.

Dans ce cas, éteignez la ceinture ou le coussin chauffant en plaçant l'interrupteur sur la position 0.

Si vous souhaitez continuer à utiliser la ceinture ou le coussin chauffant, rallumez-la et réglez la température souhaitée.

Éteignez la ceinture ou le coussin chauffant après utilisation et débranchez-le de l'alimentation électrique. Ensuite, laissez-la complètement refroidir.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Avant de nettoyer le produit, retirez l'unité de commande afin d'éviter tout dommage.

1. Débranchez la ceinture ou le coussin de l'alimentation électrique. Laissez-les refroidir complètement.
2. Sortez l'unité de commande
3. Nettoyez la ceinture / le coussin à la main ou à la machine (40 °C, linge délicat).
4. Laissez sécher la ceinture à l'air libre. Ne les placez pas au sèche-linge et ne les repassez pas !



ATTENTION !

Assurez-vous que l'unité de commande ne rentre pas en contact avec du linge mouillé. N'allumez pas le coussin ou la ceinture tant que ces derniers sont encore mouillés ou humides.

Stockage

Pliez la ceinture ou le coussin chauffant avec précaution lorsque vous souhaitez la/le ranger.

Rangez la ceinture ou le coussin chauffant dans un endroit sec et frais.

Vérifiez la ceinture ou le coussin chauffant, le câble, l'unité de commande et le connecteur régulièrement pour vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

N'utilisez pas d'antimite chimique.

Ne posez pas d'objet lourd sur la ceinture ou le coussin chauffant, car cela pourrait l'endommager.

Dépannage

La ceinture ou le coussin chauffant ne chauffe pas : vérifiez que la ceinture ou le coussin chauffant est reliée à l'alimentation électrique et qu'elle est allumée.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|--|
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance nominale | 100 W |
| 3 niveaux de chauffe | 53 °C, 63 °C, 73 °C ± 5 °C |
| Arrêt automatique | Après environ 90 min |
| Dimensions | NX7452 : longueur réglable jusqu'à 125 cm NX7455 : 50 x 55 cm |

Importé par :

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02