

## Estimado cliente,

Gracias por comprar estas básculas de baño de viaje 5 en 1. Esta báscula le brinda información detallada sobre su peso corporal.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva balanza.


## alcance de entrega

- Básculas personales de viaje 5 en 1 con 2 pilas AAA
- operación manual


## Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	2 pilas AAA
Capacidad de peso	3-150 kilogramos
Unidad de escala	100 gramos
Unidades de medida	kg / libra
Porcentaje de grasa corporal	4-45% (según IMC)
Contenido de agua	27,8-66% (según BM) I.
Masa muscular	en%
Proporción ósea	en%
pantalla LCD	8 x 5 cm
Espacios de almacenamiento	10
Encendido / apagado automático	si
Dimensiones	31 x 21 x 2 centímetros
Peso	aprox.1,1 kg

## Detalles de producto

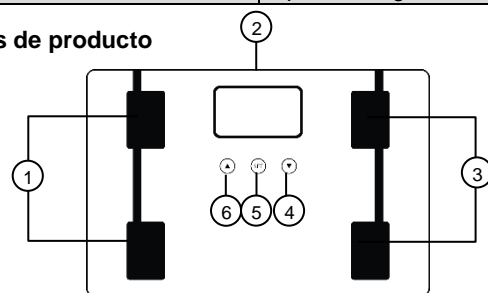

- |   |                              |   |                   |
|---|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Electrodos del pie izquierdo | 4 | Tecla [▼]         |
| 2 | Monitor                      | 5 | [Botón de ajuste] |
| 3 | Electrodos del pie derecho   | 6 | Tecla [▲]         |

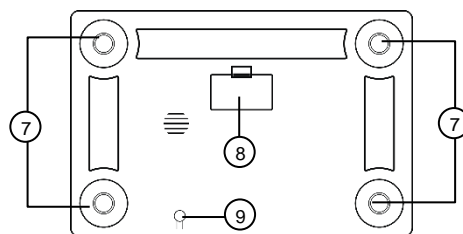

- |   |                              |   |                   |
|---|------------------------------|---|-------------------|
| 7 | Pies antideslizantes         | 9 | Clave de unidades |
| 8 | Compartimiento de la batería |   |                   |

## Anuncios de display

monitor	importancia
Grasa	Porcentaje de grasa corporal demasiado bajo
Saludable	Porcentaje de grasa corporal óptimo
Sobregrasado	Porcentaje de grasa corporal demasiado alto
Obeso	Tendencia a la obesidad
	Porcentaje de grasa corporal
	Contenido de agua
	Masa muscular
	Proporción ósea

## Insertar / cambiar pilas

Dé la vuelta a su báscula y abra el compartimiento de la batería. Instale dos pilas AAA. Observe la información sobre polaridad en el compartimiento de la batería. Vuelva a cerrar el compartimiento de la batería.

## Seleccionar unidad de medida

Presione el botón de unidades en la parte inferior de su escala. Cada vez que presiona el botón, cambia a una unidad de medida diferente.

## utilizar

1. Coloque su báscula sobre una superficie plana, dura y seca.
2. Presione brevemente el centro de la escala con el pie para encenderla. La pantalla muestra 0.0.



NOTA:

*Este paso solo es necesario si su báscula se ha movido.*

3. Párese en la balanza con los pies secos. Asegúrese de colocar correctamente los pies sobre los electrodos.
4. Quédese quieto, se determinará su peso. Si el peso ya no cambia (por ejemplo, debido a movimientos), la pantalla parpadea dos veces. El peso medido se muestra permanentemente en la pantalla.
5. Bájese de su escala. Se apaga automáticamente después de unos 10 segundos y la pantalla se apaga.

## Crear perfil personal

Su saldo tiene diez ubicaciones de memoria en las que se pueden guardar los datos personales de los miembros de su hogar. Se necesitan perfiles para determinar la grasa corporal, el porcentaje de agua, la masa muscular y el porcentaje de hueso.



NOTA:

*Los botones reaccionan muy rápidamente a la presión. Así que tóquelo brevemente.*

1. Toque la tecla [ESTABLECER]. El número de la ubicación de la memoria parpadea en la pantalla. Utilice los botones [▲] y [▼] para seleccionar la ubicación de memoria deseada (01-10).



NOTA:

*Anote a quién se le ha asignado qué espacio de almacenamiento.*

2. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste.
3. El símbolo de hombre o mujer parpadea a la derecha de la pantalla. Utilice los botones [▲] y [▼] para establecer el género que desea.
4. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste.
5. La edad parpadea en la pantalla (predeterminado: 19). Utilice los botones [▲] y [▼] para establecer la edad deseada (10-99).
6. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste.
7. La indicación de tamaño parpadea en la pantalla (predeterminado: 174). Utilice los botones [▲] y [▼] para establecer la altura requerida.

8. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste. Los valores establecidos aparecen en rápida sucesión en la pantalla, luego se muestra 0.0.

### Análisis corporal

En el análisis corporal, la grasa corporal, el porcentaje de agua, la masa muscular y el porcentaje de hueso se determinan en función del perfil guardado y los datos de medición.

1. Toque la tecla [ESTABLECER]. El número de la ubicación de la memoria parpadea en la pantalla.
2. Utilice los botones [▲] y [▼] para seleccionar su perfil guardado (por ejemplo, 01). El número de la ubicación de la memoria parpadea brevemente, luego los datos almacenados se muestran uno tras otro.
3. Espere hasta que aparezca 0.0 en la pantalla. Párese sobre la balanza descalzo y con los pies secos. Asegúrese de que sus pies estén colocados correctamente sobre los electrodos.
4. El peso medido se muestra primero en la pantalla. Luego, los puntos de espera aparecen en la pantalla. Los siguientes resultados de medición ahora se muestran en% uno tras otro:

Porcentaje de grasa corporal - porcentaje de agua - masa muscular - porcentaje de hueso

Hombre de porcentaje de grasa corporal				
Años	bajo	normal	alto	Muy alto
17-20	<18	18-28	29-33	> 33
21-42	<20	20-30	31-35	> 35
43-65	<21	21-31	32-36	> 36
66-100	<22	22-32	33-37	> 37

Porcentaje de grasa corporal mujer				
Años	bajo	normal	alto	Muy alto
17-20	<15	15-21	22-26	> 26
21-42	<17	17-23	24-28	> 28
43-65	<18	18-24	25-29	> 29
66-100	<19	19-25	25-30	> 30

### Resolución de problemas

- ERR se muestra en la pantalla. Se superó la capacidad de peso de su báscula. La capacidad máxima de peso es de 150 kg.
- LO aparece en la pantalla.

Reemplace las baterías con dos baterías nuevas del mismo tipo (AAA).

### limpieza

Limpie su balanza regularmente con un paño suave y húmedo. No use detergentes fuertes ni alcohol.

### las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No se suba a la báscula con los pies húmedos o mojados - ¡Riesgo de resbalar!
- Este producto no es apto para las siguientes personas: personas con marcapasos u otros implantes médicos, mujeres embarazadas, diabéticos, personas con restricciones físicas o médicas.
- No exponga la báscula a temperaturas extremas o alta humedad.
- Quítese los calcetines antes de pesar.
- No sobrecargue la báscula.
- La báscula solo está diseñada para uso doméstico privado y no para uso comercial o médico.
- ADVERTENCIA: El dispositivo permite que la corriente eléctrica fluya a través del usuario para realizar mediciones. El dispositivo no debe ser utilizado por personas con marcapasos u otro dispositivo médico implantado. Antes de usar este producto, consulte con su médico si está embarazada o puede estarlo.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

### Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

### Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara por la presente que el producto NX-7478-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NX-7478 en el campo de búsqueda.