

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato queste bilance pesapersona da viaggio 5in1. Questa bilancia fornisce informazioni dettagliate sul peso corporeo.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla nuova bilancia.


portata di consegna

- Bilance pesapersona da viaggio 5 in 1 incl. 2 batterie AAA
- manuale operativo


Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	2 batterie AAA
Capacità di peso	3-150 kg
Unità di scala	100 grammi
Unità di misura	kg / lb
Percentuale di grasso corporeo	4-45% (secondo BMI)
Contenuto di acqua	27,8-66% (secondo BM) I.
Massa muscolare	in %
Proporzione ossea	in %
display LCD	8 x 5 cm
Spazi di archiviazione	10
Accensione / spegnimento automatico	sì
Dimensioni	31 x 21 x 2 cm
Peso	circa 1,1 kg

Dettagli del prodotto

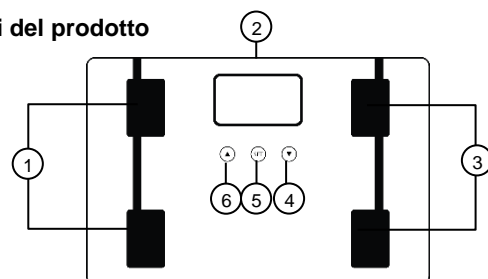

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1 Elettrodi del piede sinistro | 4 Tasto [▼] |
| 2 Schermo | 5 Pulsante [SET] |
| 3 Elettrodi del piede destro | 6 Tasto [▲] |

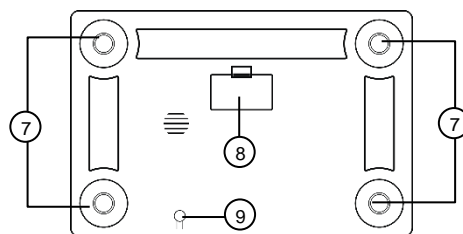

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 7 Piedi antiscivolo | 9 Tasto unità |
| 8 Compartimento della batteria | |

Visualizza annunci

Schermo	importanza
	Percentuale di grasso corporeo troppo bassa
	Percentuale di grasso corporeo ottimale
	Percentuale di grasso corporeo troppo alta
	Tendenza all'obesità
	Percentuale di grasso corporeo
	Contenuto di acqua
	Massa muscolare
	Proporzione ossea

Inserire / sostituire le batterie

Capovolgi la bilancia e apri il vano batteria. Installa due batterie AAA. Rispettare le informazioni sulla polarità nel vano batteria. Chiudere nuovamente il vano batterie.

Selezione unità di misura

Premi il pulsante delle unità nella parte inferiore della bilancia. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa a una diversa unità di misura.

uso

1. Posiziona la bilancia su una superficie piana, dura e asciutta.

2. Premere brevemente il centro della scala con il piede per accenderla. Il display mostra 0.0.



NOTA:

Questo passaggio è necessario solo se la bilancia è stata spostata.

3. Stai in piedi sulla bilancia con i piedi asciutti. Assicurati di posizionare correttamente i piedi sugli elettrodi.
4. Stai fermo, il tuo peso sarà determinato. Se il peso non cambia più (es. A causa di movimenti), il display lampeggia due volte. Il peso misurato viene visualizzato in modo permanente sul display.
5. Scendi dalla tua bilancia. Si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi e il display si spegne.

Crea profilo personale

La bilancia dispone di dieci posizioni di memoria in cui è possibile salvare i dati personali dei membri della famiglia. I profili sono necessari per determinare il grasso corporeo, la percentuale di acqua, la massa muscolare e la percentuale di ossa.



NOTA:

I pulsanti reagiscono molto rapidamente alla pressione. Quindi toccalo brevemente.

1. Sforare il tasto [SET]. Il numero della posizione di memoria lampeggia sul display. Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per selezionare la posizione di memoria desiderata (01-10).



NOTA:

Prendere nota di chi è stato assegnato a quale spazio di archiviazione.

2. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata.
3. Il simbolo per uomo o donna lampeggia a destra del display. Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per impostare il sesso desiderato.
4. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata.
5. L'età lampeggia sul display (impostazione predefinita: 19). Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per impostare l'età desiderata (10-99).
6. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata.
7. L'indicazione delle dimensioni lampeggia sul display (impostazione predefinita: 174). Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per impostare l'altezza richiesta.

8. Toccare il pulsante [SET], l'impostazione viene salvata. I valori impostati vengono visualizzati in rapida successione sul display, quindi viene visualizzato 0.0.

Analisi del corpo

Nell'analisi corporea, il grasso corporeo, la percentuale di acqua, la massa muscolare e la percentuale di ossa vengono determinate in base al profilo salvato e ai dati di misurazione.

1. Sforare il tasto [SET]. Il numero della posizione di memoria lampeggia sul display.
2. Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per selezionare il profilo salvato (es. 01). Il numero della posizione di memoria lampeggia brevemente, quindi i dati memorizzati vengono visualizzati uno dopo l'altro.
3. Attendere fino a quando 0.0 viene visualizzato sul display. Stai in piedi sulla bilancia a piedi nudi e con i piedi asciutti. Assicurati che i tuoi piedi siano posizionati correttamente sugli elettrodi.
4. Il peso misurato viene visualizzato per primo sul display. Quindi i punti di attesa vengono visualizzati sul display. I seguenti risultati di misurazione vengono ora visualizzati in% uno dopo l'altro:

Percentuale di grasso corporeo - Percentuale di acqua - Massa muscolare - Percentuale di ossa

Uomo di percentuale di grasso corporeo				
Età	Basso	normale	alto	Molto alto
17-20	<18	18-28	29-33	> 33
21-42	<20	20-30	31-35	> 35
43-65	<21	21-31	32-36	> 36
66-100	<22	22-32	33-37	> 37

Donna percentuale di grasso corporeo				
Età	Basso	normale	alto	Molto alto
17-20	<15	15-21	22-26	> 26
21-42	<17	17-23	24-28	> 28
43-65	<18	18-24	25-29	> 29
66-100	<19	19-25	25-30	> 30

Risoluzione dei problemi

- ERR viene visualizzato sul display. La capacità di carico della bilancia è stata superata. La portata massima è di 150 kg.
- Sul display appare LO.

Sostituire le batterie con due batterie nuove dello stesso tipo (AAA).

pulizia

Pulisci regolarmente la bilancia con un panno umido e morbido. Non utilizzare detergenti aggressivi o alcol.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non salire sulla bilancia con i piedi umidi o bagnati - pericolo di scivolamento!
- Questo prodotto non è adatto alle seguenti persone: persone con pacemaker o altri impianti medici, donne in gravidanza, diabetici, persone con limitazioni fisiche o mediche.
- Non esporre la bilancia a temperature estreme o alta umidità.
- Togliti i calzini prima di pesare.
- Non sovraccaricare la bilancia.
- La bilancia è intesa solo per uso domestico privato e non per uso commerciale o medico.
- **AVVERTENZA:** il dispositivo consente alla corrente elettrica di fluire attraverso l'utente per effettuare misurazioni. Il dispositivo non deve essere utilizzato da chiunque abbia un pacemaker o un altro dispositivo medico impiantato. Prima di utilizzare questo prodotto, chiedi consiglio al tuo medico se sei incinta o potresti essere incinta.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-7478-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7478 nel campo di ricerca.