

Vibrations-Fußplatte WBV-60.exp

Mit 2 Expandern, für Tätigkeiten im Sitzen, 60 W

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Vibrations-Fußplatte	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise.....	4
Gesundheits-Hinweise.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Vibrations-Fußplatte	8
Fernbedienung	8
Inbetriebnahme	9
Knopfzelle in Fernbedienung einsetzen.....	9
Verwendung	9
Reinigung	10
Problemlösungen.....	10
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Vibrations-Fußplatte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Vibrations-Fußplatte. Sorgen Sie bei Tätigkeiten im Sitzen für Entspannung: Lassen Sie Ihre Füße und Beine von den Vibrationen durchrütteln. Die Vibrationen haben eine Massage-Wirkung für Füße, Waden und Oberschenkel. Bedienen Sie die Vibrations-Fußplatte bequem per Fernbedienung. Mit den Expandern können Sie dabei auch noch Arme und Oberkörper trainieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Vibrations-Fußplatte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Vibrations-Fußplatte WBV-60.exp
- 2 Expander
- Netzkabel
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht

benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen! Nur in trockener Umgebung benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
- Springen Sie nicht auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf einen festen, ebenen und feuchtigkeitsunempfindlichen
- Untergrund.
- Nach der Benutzung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Vor dem Training mit dem Gerät sollten Sie sich immer sorgfältig aufwärmen, z. B. mit Dehnungsübungen.
- Steigern Sie das Tempo und die Trainingsdauer nur allmählich.
- Das Gerät darf immer nur von einer Person benutzt werden.
- Eine Anwendung sollte ununterbrochen nicht länger als 10 Minuten dauern.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nie am Netzkabel und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.

- Schalten Sie das Gerät über die Ein/Aus-Taste aus, bevor Sie den Stecker ziehen.
- Schlafen Sie während des Gebrauchs nicht ein.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Gebrauch, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gesundheits-Hinweise

- Beenden Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn Sie Übelkeit, Schmerzen in Gelenken oder anderen Bereichen, einen unregelmäßigen Herzschlag oder andere ungewöhnliche Symptome haben.
- Wenn Sie lange keinen Sport getrieben haben, ein Herzproblem, neurologische Probleme, Durchblutungsstörungen oder orthopädische Probleme haben, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

Personen mit folgenden Beschwerden oder Implantaten sollten **vor der Verwendung einen Arzt konsultieren:**

- Herz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Bluthochdruck
- Akute Thrombose
- Akuter Leistenbruch
- Schwere Diabetes
- Epilepsie
- Schwere Migräne
- Bösartiger Tumor
- Herzschrittmacher, Metallimplantate, künstliche Gelenke oder Gliedmaßen, Stents, Spirale, Metallplatten oder Nägel.
- Jegliche kürzlich aufgetretene Erkrankung oder Infektion
- Tiefe Venenthrombose
- Krebs
- Osteoporose
- Gleichgewichtsstörungen
- Durchblutungsstörungen
- neurologische Probleme

Folgende Personen **dürfen das Gerät nicht verwenden:**

- Schwangere
- Kinder
- Wenn Sie sich vor kurzer Zeit einer Operation unterziehen mussten
- Wenn Sie Knie-, Schulter-, Rücken- oder Nackenverletzungen haben.
- Wenn Sie Netzhautprobleme haben.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7940-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7940 ein.




Produktdetails

Vibrations-Fußplatte

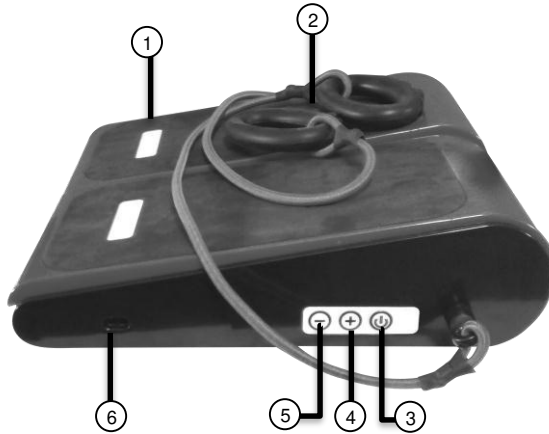

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Fuß-Ablage | 4. + -Taste |
| 2. Expander | 5. - -Taste |
| 3. Ein/Aus-Taste | 6. Netzkabel-Buchse |

Fernbedienung

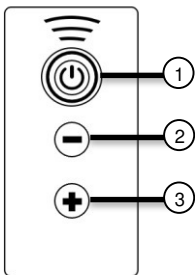

1. Ein/Aus-Taste
2. - -Taste
3. + -Taste

Inbetriebnahme

Knopfzelle in Fernbedienung einsetzen

1. Drehen Sie Ihre Fernbedienung um, so dass die Rückseite nach oben zeigt.
2. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, indem Sie das geriffelte Ende nach innen drücken und gleichzeitig das Batteriefach herausziehen.
3. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2025 (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein, der Plus-Pol zeigt nach oben.
4. Schieben Sie das Batteriefach bis zum Anschlag in die Fernbedienung.

Verwendung



HINWEIS:


Die Vibrations-Fußplatte ist für den Gebrauch im Sitzen konzipiert. Stehen Sie nicht auf das Gerät. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück und legen Sie anschließend eine kurze Pause ein.

1. Stellen Sie Ihre Vibrations-Fußplatte auf einen ebenen, festen Untergrund. Platzieren Sie Ihre Vibrations-Fußplatte so, dass Sie Ihre Füße von Ihrem Sitzplatz aus bequem draufstellen können.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrer Vibrations-Fußplatte und einer geeigneten Steckdose. Ein Signalton erklingt.
3. Nehmen Sie Ihren Sitzplatz ein und platzieren Sie Ihre Füße auf den Fußablagen Ihrer Vibrations-Fußplatte. Üben Sie keinen Druck aus!



HINWEIS:

Wird eine der Fußablagen der Vibrations-Fußplatte mit ≥ 40 kg belastet, schaltet sie sich automatisch aus.

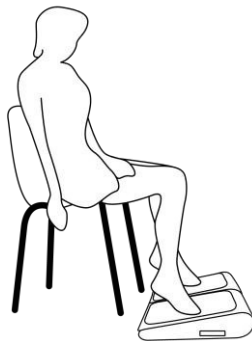

4. Schalten Sie Ihre Vibrations-Fußplatte ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die Fußplatte beginnt zu vibrieren.
5. Stellen Sie mit den Tasten + und – die gewünschte Vibrations-Frequenz ein.

6. Nehmen Sie gegebenenfalls die Expander in die Hand, um Trainingsübungen für Arme und Oberkörper auszuführen.
7. Schalten Sie Ihre Vibrations-Fußplatte durch Drücken der Ein/Aus-Taste aus. Die Vibration stoppt.



HINWEIS:

Verwenden Sie die Vibrations-Fußplatte nicht länger als 10 Minuten am Stück. Legen Sie anschließend eine kurze Pause ein. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Ihre Vibrations-Fußplatte nach 15 Minuten automatisch aus.

8. Trennen Sie Ihre Vibrations-Fußplatte von der Stromversorgung.

Reinigung

1. Schalten Sie Ihre Vibrations-Fußplatte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie Ihre Vibrations-Fußplatte mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen wie z.B. Scheuermilch oder andere Reinigungsmittel.

Problemlösungen

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie die Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt verbunden ist.

Das Gerät vibriert nicht.

- Schalten Sie die Vibrations-Fußplatte durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein.

Das Gerät hat plötzlich den Betrieb eingestellt.

- Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt verbunden ist.
- Nach 15 Minuten schaltet sich Ihre Vibrations-Fußplatte automatisch aus.
- Das Gerät ist durch pausenlosen Gebrauch überhitzt. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut in Gebrauch nehmen.
- Es wurde zu starker Druck auf eine der Fußablagen der Vibrations-Fußplatte ausgeübt. Wenn eine der Fußablagen der Vibrations-Fußplatte mit ≥ 40 kg belastet wird, schaltet sie sich automatisch aus. Verringern Sie die Belastung und schalten Sie die Vibrations-Fußplatte erneut ein.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025
Funk-Frequenz	433,92 MHz
Max. Sendeleistung	< 10 dBm
Vibrations-Frequenz-Stufen	10
Automatische Abschaltung	nach 15 Minuten
Maße	11,5 x 33 x 35 cm
Gewicht	5,4 kg

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 09.01.2019 – BS//GK

WBV-60

Repose-pieds à vibrations

avec tendeurs pour les bras et 10 niveaux de fréquence

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau repose-pieds à vibrations	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour la santé	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité.....	7
Description du produit	8
Repose-pieds à vibrations	8
Télécommande.....	8
Mise en marche	9
Insertion de la pile bouton dans la télécommande.....	9
Utilisation	9
Nettoyage	10
Dépannage	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau repose-pieds à vibrations

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce repose-pieds à vibrations. Détendez-vous lors de vos activités assises : les vibrations ont un effet massant sur les pieds, les cuisses et les mollets. Pratique : vous contrôlez l'appareil avec la télécommande. Et grâce aux tendeurs, vous pouvez en plus faire travailler tout le haut du corps !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Repose-pieds à vibrations WBV-60.exp
- 2 tendeurs
- Câble d'alimentation
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoire requis : 1 pile bouton CR2025 (non fournie, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Consignes préalables

- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou tout autre système de commande à distance. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage professionnel.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Ne vous tenez pas (ni assis, ni debout) sur l'appareil.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur. Utilisez le produit uniquement dans un environnement sec.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé.
- Ne sautez pas sur l'appareil.
- Placez l'appareil uniquement sur une surface dure, plane et résistante à l'humidité.
- Après l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Avant l'utilisation de l'appareil, commencez toujours par vous échauffer soigneusement, avec des étirements par exemple.
- N'augmentez le rythme et la durée de la pratique que progressivement.
- L'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Ne le faites pas fonctionner pendant plus de 10 minutes d'affilée.
- Ne portez, tirez ou tournez jamais l'appareil en le tenant par le câble d'alimentation, et ne coincez pas le câble.
- En cas de dysfonctionnement, ne réparez pas l'appareil vous-même. Les réparations doivent être réalisées par un SAV autorisé uniquement.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt avant de débrancher la fiche d'alimentation.
- Vous ne devez pas vous endormir pendant l'utilisation.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à une source de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou si vous êtes sous l'influence de drogue, de médicaments ou de l'alcool.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour la santé

- Si vous ressentez des nausées, des douleurs dans les articulations ou dans d'autres zones, si vous présentez une fréquence cardiaque irrégulière ou tout autre symptôme inhabituel, interrompez l'utilisation et consultez immédiatement un médecin.
- Si vous n'avez pas pratiqué de sport depuis longtemps, ou si vous présentez un problème cardiaque, neurologique, circulatoire ou orthopédique, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.

Les personnes présentant les pathologies ou implants suivants doivent **demandeur conseil à leur médecin avant utilisation** :

- Troubles cardiaques et cardiovasculaires
- Hypertension artérielle
- Thrombose aiguë
- Hernie inguinale aiguë
- Diabète sévère
- Épilepsie
- Céphalée sévère
- Tumeur maligne
- Stimulateur cardiaque, implant métallique, articulation ou membre artificiel, endoprothèse, dispositif intra-utérin, plaques métalliques, broches.
- Maladies ou infections survenues récemment
- Thrombose veineuse profonde
- Cancer
- Ostéoporose
- Troubles de l'équilibre
- Troubles de la circulation sanguine
- Problèmes neurologiques

Les personnes suivantes **ne doivent pas utiliser l'appareil** :

- Les femmes enceintes
- Les enfants
- Si vous avez subi une opération récente
- Si vous êtes blessé au genou, à l'épaule, au dos ou au cou.
- Si vous présentez des problèmes rétinien.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-7940, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

Repose-pieds à vibrations

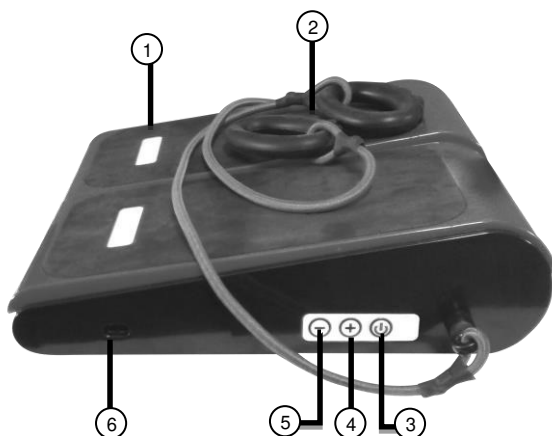

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Zone de contact avec le pied | 4. Touche + |
| 2. Tendeurs | 5. Touche - |
| 3. Touche Marche/Arrêt | 6. Prise câble |

Télécommande

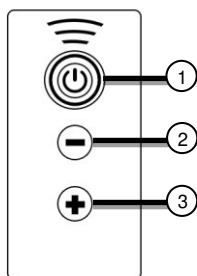

- 1 Touche Marche/Arrêt
2. Touche -
3. Touche +

Mise en marche

Insertion de la pile bouton dans la télécommande

1. Retournez le repose-pieds de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
2. Ouvrez le compartiment à pile de la télécommande : poussez l'extrémité rainurée vers l'intérieur tout en faisant sortir le compartiment à pile vers l'extérieur.
3. Insérez une pile bouton CR2025 (non fournie) dans le compartiment à pile. Le pôle + doit être orienté vers le haut.
4. Réinsérez le compartiment à piles dans la télécommande, jusqu'à la butée.

Utilisation



NOTE :


Le repose-pieds à vibrations est conçu pour être utilisé assis. Ne vous tenez pas debout sur l'appareil. *N'utilisez pas l'appareil plus de 10 minutes d'affilée. Faites ensuite une courte pause.*

1. Posez le repose-pieds à vibrations sur une surface plane et rigide. Placez le repose-pieds à vibrations de manière à ce que vous puissiez y poser vos pieds confortablement en étant assis sur votre siège.
2. Branchez le câble d'alimentation au repose-pieds à vibrations et dans une prise de courant adaptée. Un signal sonore retentit.
3. Assoyez-vous sur votre siège, et placez chaque pied sur la zone de contact prévue sur le repose-pieds à vibrations. N'exercez pas de pression.



NOTE :

Si une des zones de contact doit supporter une charge ≥ 40 kg, le repose-pieds à vibrations s'arrête immédiatement.

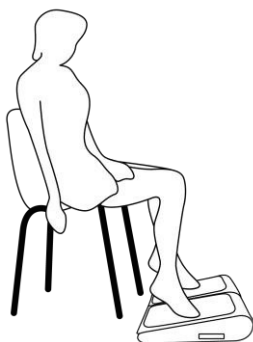

4. Pour allumer le repose-pieds à vibrations, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le repose-pieds à vibrations commence à vibrer.
5. Utilisez les touches [+] et [-] pour régler le niveau de fréquence souhaité pour les vibrations.

6. Si vous le souhaitez, prenez les tendeurs en main afin de faire travailler les bras et le haut du corps.
7. Éteignez le repose-pieds à vibrations à l'aide du bouton marche/arrêt. Les vibrations s'arrêtent.



NOTE :

N'utilisez pas le repose-pieds à vibrations plus de 10 minutes d'affilée. Faites ensuite une courte pause. Pour des raisons de sécurité, le repose-pieds à vibrations s'éteint automatiquement après 15 minutes.

8. Débranchez le repose-pieds à vibrations de l'alimentation électrique.

Nettoyage

1. Éteignez le repose-pieds à vibrations et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Pour nettoyer le repose-pieds à vibrations, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié. N'utilisez pas de substance agressive (produit abrasif ou autre produit nettoyant par exemple).

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas.

- Vérifiez l'alimentation électrique. Vérifiez que le câble d'alimentation est branché correctement.

L'appareil ne vibre pas.

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

L'appareil a soudainement cessé de fonctionner

- L'alimentation électrique a été interrompue. Vérifiez que le câble d'alimentation est branché correctement.
- Le repose-pieds à vibrations s'éteint automatiquement après 15 minutes.
- L'appareil a surchauffé en raison d'une utilisation sans pause. Laissez l'appareil refroidir avant de reprendre l'utilisation.
- Une trop forte pression a été exercée sur les surfaces de contact des pieds du repose-pieds à vibrations. Si une des zones de contact doit supporter une charge ≥ 40 kg, le repose-pieds à vibrations s'arrête immédiatement. Diminuez la charge et rallumez le repose-pieds à vibrations.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	60 W
Télécommande	1 pile bouton CR2025
Fréquence sans fil	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	< 10 dBm
Niveaux de fréquence des vibrations	10
Arrêt automatique	Après 15 minutes
Dimensions	11,5 x 33 x 35 cm
Poids	5,4 kg

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 09.01.2019 – BS//GK