

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Munddusche, mit dem Sie schonend Ihre Zahnzwischenräume reinigen und Ihr Zahnfleisch massieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Munddusche mit Wassertank optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Munddusche mit Wassertank
- 2 Multifunktionsdüsen
- 2 Interdentalbürsten
- 1 Standarddüse
- Bedienungsanleitung

### Produktdetails

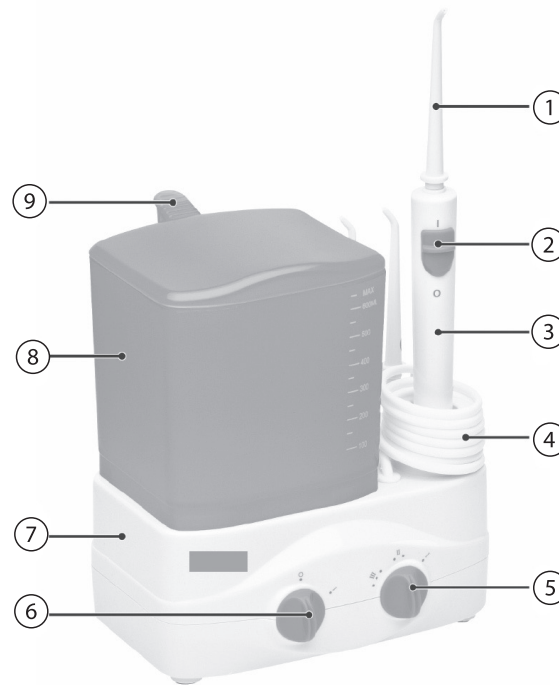

1. Aufsteckdüse
2. Wasserzulauf-Schalter
3. Griffstück
4. Wasserschlauch
5. Wasserdruckregler
6. Ein/Aus-Schalter
7. Gehäuse
8. Wassertank
9. Hebel

### Inbetriebnahme

1. Spülen Sie den Wassertank und die Düse mit lauwarmem Wasser, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Trocknen Sie beide Teile anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig ab. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise unter **Reinigung und Pflege**.
2. Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Gehäuse, öffnen Sie mithilfe des Hebels den Deckel und füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser. Die Wassertemperatur sollte höchstens 40 °C betragen. Achten Sie darauf, dass Sie den Behälter maximal bis zu der Markierung **MAX** füllen. Schließen Sie den Deckel.
3. Setzen Sie den Wassertank mit der Skalierung nach vorne wieder fest auf das Gehäuse.
4. Nehmen Sie eine Aufsteckdüse oder -bürste. Stecken Sie die Düse bzw. Bürste auf das Griffstück. Achten Sie dabei darauf, dass die Düse bzw. Bürste fest auf dem Griffstück sitzt und die Öffnung nach vorne zeigt (in Richtung Wasserzulauf-Schalter). Sie entfernen die Düse aus dem Griffstück, indem Sie sie einfach herausziehen.

### Multifunktionsdüse



Diese Multifunktionsdüse verfügt über zwei Einstellungsoptionen:

**Monostrahl:** Ein Strahl für gezieltes Reinigen

**Brausestrahl:** Zum allgemeinen Reinigen und Massieren des Zahnfleisches

Durch Drehen des farbigen Düsenkopfes können Sie die gewünschte Funktion einstellen.

## Interdentalbürste:



Die Interdentalbürste kombiniert Düse und Bürste. Sie eignet sich besonders für Zahnzwischenräume und alle schwer zugänglichen Bereiche.

## Verwendung



### ACHTUNG!

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen oder es längere Zeit nicht verwendet haben, kann es vorkommen, dass sich Luft im Wasserzulauf im Gehäuseinneren befindet. Das hat zur Folge, dass das

Gerät nicht funktionsfähig ist. Entfernen Sie in diesem Fall den Wassertank vom Boden. Füllen Sie einen Teelöffel Wasser in den Wassereinlass am Gehäuse (das Gegenstück zum Sperrventil im Tankboden). Setzen Sie den Wassertank wieder ein. Das Gerät ist nun voll einsatzfähig.



### HINWEIS:

Verwenden Sie die Munddusche, nachdem Sie Ihre Zähne mit Zahnpasta und -bürste gereinigt haben.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose in der Nähe des Geräts.
2. Schalten Sie das Gerät am Gehäuse ein, indem Sie den linken Ein/Aus-Schalter auf **I** drehen. Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie den Ein/Aus-Schalter auf **0**.
3. Regulieren Sie den Wasserdruck mithilfe des rechten Drehschalters:

<b>I</b>	Niedriger Wasserdruck für eine sanfte Reinigung von empfindlichem Zahnfleisch
<b>II</b>	Mittlerer Wasserdruck zur Massage des Zahnfleisches
<b>III</b>	Hoher Wasserdruck für die Reinigung der Zahnzwischenräume und unterhalb des Zahnfleischrandes



### HINWEIS:

Leichtes Zahnfleischbluten in den ersten Tagen der Anwendung ist normal und kein Grund zur Sorge. Benutzen Sie das Gerät regelmäßig weiter. Normalerweise verschwindet das Zahnfleischbluten nach einigen Tagen. Sollte das Zahnfleischbluten jedoch nicht nachlassen, konsultieren Sie ihren Zahnarzt.

4. Schalten Sie den Wasserzulauf-Schalter auf **I** und spülen Sie mit hohem Wasserdruck die Düse über dem Waschbecken ca. 5 bis 10 Sekunden durch, bevor Sie die Munddusche verwenden. Schalten Sie danach den Wasserzulauf-Schalter wieder aus und stellen Sie den für die Anwendung gewünschten Wasserdruck ein.
5. Führen Sie die Düse der Munddusche in den Mund. Richten Sie sie auf die zu reinigenden Zahnzwischenräume.
6. Beugen Sie sich etwas über das Waschbecken und halten Sie die Düse mit einem Abstand von ca. 1 cm an die Zahnzwischenräume.
7. Schalten Sie den Wasserzulauf der Düse ein, indem Sie den Wasserzulauf-Schalter am Griffstück auf **I** stellen.
8. Halten Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken ablaufen kann. Beginnen Sie mit der Reinigung der hinteren Backenzähne. Führen Sie die Düsenspitze entlang des Zahnfleischrandes und halten Sie kurz zwischen den Zähnen an. Reinigen Sie alle Bereiche um und zwischen den Zähnen.



### HINWEIS:

Halten Sie die Munddusche während des Gebrauchs immer aufrecht, damit Sie ein optimales Reinigungsergebnis erzielen.

Mit dem Wasserzulauf-Schalter am Griffstück können sie den Wasserfluss jederzeit unterbrechen, indem Sie ihn auf **0** stellen. Schalten Sie nach dem Ende der Anwendung den Wasserzulauf und das Gerät aus. Lassen Sie das Gerät nach einer Anwendungsdauer von 10 Minuten abkühlen, um eine Überlastung zu vermeiden.

## Reinigung und Pflege

- Entleeren Sie den Wassertank und -zulauf nach jeder Anwendung vollständig, um die Bildung von Bakterien zu verhindern. Halten Sie hierfür das Griffstück ins Waschbecken.
- Schalten Sie das Gerät am Gehäuse und den Wasserzulauf am Griffstück ein und lassen Sie das Gerät laufen, bis der Wasserbehälter vollständig entleert ist. Schalten Sie das Gerät danach aus.
- Spülen Sie nun den Wassertank mit klarem, lauwarmem Wasser aus. Trocknen Sie ihn anschließend mit einem weichen Tuch ab.
- Spülen Sie die Düse unter fließendem, warmem Wasser gründlich aus.
- Reinigen Sie das Gehäuse und das Griffstück mit einem feuchten Tuch.

## Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Undichtigkeit zwischen Düse und Griffstück	Düse sitzt nicht vollständig auf dem Griffstück	Düse abnehmen und neu einsetzen
Zu geringer Druck/Keine Flüssigkeitszufuhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertank ist nicht ausreichend mit Flüssigkeit gefüllt</li> <li>Anschluss des Wassertanks ist verstopft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasser auffüllen</li> <li>Wassertank mit warmem Leitungswasser und etwas Essig füllen. So lange laufen lassen, bis Wassertank vollständig entleert ist und mit klarem Wasser nachspülen</li> </ul>
Gerät startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steckdose ist defekt</li> <li>Ladekontakte sind verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob die Steckdose funktioniert und gegebenenfalls die Steckdose wechseln</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte sauber und frei sind.</li> </ul>

## Technische Daten

- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Stromverbrauch: max. 35 W
- Wassertank-Füllmenge: 650 ml
- Schutzart: IPX 7
- Gewicht: 670 g

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Wasserwechseln. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Gehäuse und das Griffstück fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Gehäuse und das Griffstück niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern in den Wassertank und in die Öffnung des Griffstücks.
- Benutzen Sie die Munddusche nie während Sie baden oder duschen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht in die Badewanne, Dusche oder das Waschbecken fallen kann. Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Richten Sie den Wasserstrahl nicht unter die Zunge, auf die Augen, in die Ohren, die Nase oder auf andere empfindliche Bereiche. Das Gerät kann Druckwerte erzeugen, die in diesen Bereichen Verletzungen verursachen können.
- Sollten Sie eine Zahnsperre tragen oder unter einer Erkrankung des Mund- oder Rachenraumes leiden, konsultieren Sie vor Anwendung der Munddusche Ihren Zahnarzt. Nicht bei offenen Wunden an der Zunge verwenden.
- Füllen Sie den Wassertank nur mit Wasser oder von Ihrem Zahnarzt empfohlenen Zusätzen (d.h. Mundwasser oder verschriebene Lösungen). Verwenden Sie kein Mundwasser oder -spülungen, die Jod oder Bleiche enthalten.
- Entfernen Sie Mundschmuck (Piercings) vor Gebrauch der Munddusche.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Benutzungsdauer von 10 Minuten abkühlen, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8037 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
19.03.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-8037 ein.