

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fußmassagegeräts. Kräftige Rollenmassage und verschiedene Massage-Einstellungen garantieren entspannende Fußmassage mit Stimulierung der Reflexzonen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Fußmassagegerät optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fußmassagegerät
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


Spannung	230 V
Leistung	40W
Eingangsstrom	Max. 1,2 A
Stromversorgung Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025
Intensitätsstufen	2
Timer	15 Minuten
Max. Schuhgröße	47
Material Innenfutter	85% Polyester, 15% Polyethan
Kabellänge	140 cm
Maße	49 x 49 x 26 cm
Gewicht	ca. 5 kg



ACHTUNG!

Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen mit Herzerkrankungen oder die elektrische Medizingeräte wie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.

Produktdetails

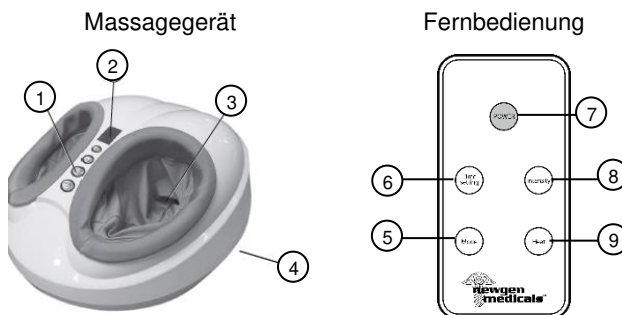

1. Bedienelement
2. Anzeige und Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung
3. Stofftasche / Öffnung für die Füße
4. Stromanschluss (Unterseite)
5. Modus-Taste
6. Timer-Taste
7. Ein/Aus-Taste
8. Intensitäts-Taste
9. Wärme-Taste

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie den Stecker mit der Haussteckdose
2. Verwenden Sie das Gerät nur im Sitzen, da es sonst beschädigt werden kann.
3. Positionieren Sie das Fußmassagegerät vor einem Stuhl oder einer Couch, so dass Sie bequem Ihre Füße in die Öffnungen des Geräts führen können.
4. Stecken Sie Ihre Füße in die Öffnungen und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Power-Taste an der Vorderseite drücken.



HINWEIS:

Eine Massageanwendung sollte nicht länger als ca. 20 Minuten dauern, um die Haut nicht zu stark zu reizen. Schalten Sie das Gerät nach der Anwendung in den Standby-Modus und verwenden Sie es erst nach Ablauf von ca. 30 Minuten erneut. Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf entzündeter oder verletzter Haut.

Tasten der Fernbedienung

Taste	Bedeutung
[POWER]	Massage starten / beenden
[Time setting]	Zeitspanne einstellen
[Intensity]	Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in eine andere Intensitätsstufe.
[Heat]	Wärmefunktion ein- / ausschalten
[Mode]	Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in ein anderes Programm.

Reinigung

Die Fußöffnungen des Massagegeräts sind mit Stofftaschen verkleidet, die Sie abnehmen können, indem Sie den Reißverschluss aufziehen. Waschen Sie die Stofftaschen in regelmäßigen Abständen.

Waschmaschine: niedrigste Temperatur (30°C)

Trockner: Niedrigste Temperatur

Bügeln: Niedrigste Temperatur

Geeignet für professionelle Trockenreinigung.

Bleichen Sie die Stofftasche nicht.



ACHTUNG

Die beste Verbindung zwischen Fernbedienung und Massagegerät erreichen Sie, wenn Sie die Fernbedienung auf den Infrarot-Empfänger am Gerät richten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektronischen Komponenten des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Beachten Sie bei den Stofftaschen die Reinigungs-Temperatur-Angaben.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Fußmassagegerät kann keine ärztliche Behandlung ersetzen. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn einer oder mehrere der folgenden Warnhinweise auf Sie zutreffen. Falls Sie unsicher sind, befragen Sie Ihren Arzt.

Verwendungshinweise

- Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Halten Sie das Massagegerät stets sauber. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht am Kopf oder Genitalbereich.
- Das Massagegerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.

Das Massagegerät ist ungeeignet für:

- Personen mit Herzerkrankungen oder die elektrische Medizingeräte wie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.
- Personen mit hohem Fieber, starken, schmerzhaften Erkrankungen oder mit unnormalen Blutdruck.
- Personen, die sich krank fühlen
- Personen mit bösartigen Tumoren oder tuberkulösen Erkrankungen

Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren.



VERWENDEN SIE DAS MASSAGEGERÄT

- **nicht bei Kindern**
- **nicht bei Tieren**
- **niemals an geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder verletzten Haut- und Körperpartien**
- **nicht während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt**
- **nie während Sie schlafen**
- **nicht nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol (eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit)**

Sicherheitshinweise



ACHTUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Wie jedes elektrische Gerät ist auch dieses Massagegerät vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Geräte zu vermeiden.

Betreiben Sie das Gerät deshalb:

- **nur mit der auf dem Gerät notierten Netzspannung**
 - **nie, wenn das Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweist**
 - **nicht während eines Gewitters**
- Schalten Sie das Gerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus und trennen Sie das Gerät vom Stromanschluss.
 - Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 - Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Halten Sie Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät.
 - Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät, der Stecker und das Kabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät deshalb
 - nur in trockenen Innenräumen
 - nur mit trockenen Händen
 - nie in der Badewanne, in der Dusche oder bei gefüllten Waschbecken
 - nie in Schwimmbecken, Whirlpools oder in der Sauna
 - nie im Freien
 - Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8057-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Produktsicherheits – Richtlinie 2001/95/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8057 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil de massage pour pieds. Des rouleaux puissants et différents types de massage au choix vous permettent de profiter d'un massage des pieds relaxant et qui stimule les zones de réflexologie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Masseur pour pieds
- Télécommande
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	40 W
Courant d'entrée	1,2 A max.
Alimentation télécommande	1 pile bouton CR2025
Niveaux d'intensité	2
Minuteur	15 min
Pointure max.	47
Composition housse intérieur	85 % polyester et 15 % polyéthane
Longueur du câble	140 cm
Dimension	49 x 49 x 26 cm
Poids	Env. 5 kg



L'appareil de massage ne convient pas aux personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou portant un appareil médical comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur.

Description du produit

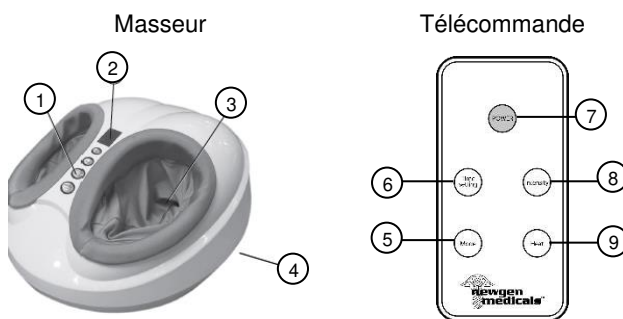

1. Touches de commande
2. Indicateur et récepteur infrarouge pour la télécommande
3. Housse en tissu / Ouverture pour les pieds
4. Port d'alimentation (dessous)
5. Touche Mode
6. Touche Minuteur
7. Touche Marche/arrêt
8. Touche Intensité
9. Touche Chaleur

Mise en marche

1. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale.
2. N'utilisez l'appareil que lorsque vous êtes assis. Le cas échéant, il pourrait être endommagé.
3. Placez l'appareil de massage devant une chaise ou un canapé, de manière à ce que vous puissiez glisser vos pieds confortablement dans les ouvertures.
4. Glissez vos pieds dans les ouvertures, et allumez l'appareil en appuyant sur la touche Power située à l'avant.



NOTE :

L'utilisation du masseur ne doit pas durer plus de 20 minutes environ, afin de ne pas irriter la peau. Après utilisation, mettez l'appareil en mode veille puis attendez environ 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez pas l'appareil de massage sur une peau infectée ou blessée.

Touches de la télécommande

Touche	Signification
[POWER]	Démarrer/Arrêter le massage
[Time settling]	Régler la durée
[Intensity]	Sélectionner l'intensité du massage : chaque pression sur la touche permet de passer au niveau d'intensité suivant.
[Heat]	Activer/Désactiver la production de chaleur
[Mode]	Sélectionner le mode de massage : chaque pression sur la touche permet de passer au programme suivant.

Nettoyage

Les ouvertures de l'appareil de massage prévues pour les pieds sont revêtues de housses en tissu, que vous pouvez retirer en ouvrant la fermeture à glissière. Lavez les housses en tissu régulièrement.

Lavage en machine : température minimale (30 °C)

Sèche-linge : température minimale

Repassage : température minimale

Compatible nettoyage à sec professionnel

N'utilisez pas de produit blanchissant sur la housse en tissu.



ATTENTION !

Pour une connexion optimale entre la télécommande et l'appareil de massage, dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouge de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez les éléments électroniques de l'appareil ni à l'humidité, ni à la chaleur extrême. Veillez à respecter les indications de température de nettoyage de la housse en tissu.
- Ne plongez jamais les composants électroniques de l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Utilisation conforme

Cet appareil de massage ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical. N'utilisez pas l'appareil de massage si une ou plusieurs des mises en garde vous concernent. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.

Consignes d'utilisation

- Le produit ne doit pas être utilisé sur ou à proximité de blessures ouvertes, ni en cas de maladies de la peau ou de réactions allergiques.
- N'utilisez pas l'appareil de massage si votre corps est encore mouillé, après une douche ou un bain.
- Gardez l'appareil toujours bien propre. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec.

- N'utilisez pas l'appareil de massage au niveau de la tête ou des parties génitales.
- L'appareil de massage n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants !

L'appareil de massage n'est pas adapté pour :

- Les personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou portant un appareil médical comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur.
- Les personnes ayant une fièvre élevée, une maladie grave, douloureuse, ou une tension artérielle anormale.
- Les personnes qui se sentent mal
- Les personnes présentant des tumeurs malignes ou des maladies tuberculeuses

Si vous êtes sous traitement médical, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.



N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DE MASSAGE :

- **sur les enfants**
- **sur les animaux**
- **sur une peau ou des parties du corps gonflées brûlées, enflammées ou abîmées**
- **pendant une grossesse ou après un accouchement**
- **lorsque vous dormez**
- **après la prise de médicaments ou d'alcool (capacité de perception altérée !)**

Consignes de sécurité



ATTENTION ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Comme tout appareil électrique, cet appareil de massage doit être utilisé avec précaution et discernement, afin d'éviter les dangers liés aux appareils électriques.

Vous devez donc faire fonctionner l'appareil :

- **uniquement avec la tension électrique indiquée sur l'appareil**
- **jamais si l'appareil ou un accessoire présente des dommages visibles**
- **jamais pendant un orage**

- En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique, ne tirez ni sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil.

- Ne tenez ou transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble d'alimentation. Maintenez le câble à l'écart des surfaces chaudes. N'ouvrez l'appareil en aucun cas.
- Assurez-vous que l'appareil de massage, la fiche d'alimentation et le câble n'entrent pas en contact avec de l'eau ou un autre liquide.
Vous devez donc faire fonctionner l'appareil :
 - uniquement en intérieur, dans un endroit sec
 - uniquement avec des mains sèches
 - jamais dans la baignoire, la douche ou si le lavabo est plein
 - jamais dans une piscine, un jacuzzi ou un sauna
 - jamais en extérieur
- Ne saisissez jamais l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8057 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.