


Dauerhaftes Haarentfernungsgerät mit Thermo-Technologie

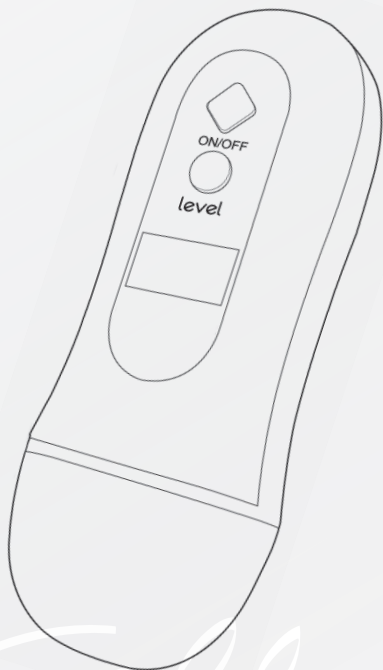

INHALTSVERZEICHNIS

IHR NEUES HAARENTFERNUNGSGERÄT	3
LIEFERUMFANG	3
WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN	4
Sicherheitshinweise.....	4
Gegenanzeigen	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	8
Konformitätserklärung	9
PRODUKTDDETAILS.....	10
LCD-Display	10
VERWENDUNG	11
Haarentfernungsgerät aufladen.....	11
Vorbereitung.....	12
Haarentfernungsmethode.....	14
Behandlungsdauer und geeignete Körperregionen ...	16
Ein/Ausschalten und automatisches Ausschalten.....	17
Temperatur einstellen.....	18
Hauttest durchführen	19
Behandlung.....	20
REINIGUNG UND PFLEGE	22
Lamelle ersetzen	22
Reinigungspad wechseln	23
ANHANG.....	24
Problembhebung.....	24
Häufige Fragen.....	25
Technische Daten	28

IHR NEUES HAARENTFERNUNGSGERÄT

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,

vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes zur dauerhaften Haarentfernung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Haarentfernungsggerät optimal einsetzen können.

LIEFERUMFANG

- Haarentfernungsggerät
- kleiner Aufsatz
- 2 große Aufsätze
- Bürste
- Netzteil
- Reinigungspad
- Schleifpapiere (5 Stück)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung



Sidel

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil auf.
- Prüfen Sie Gerät und Zubehör vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.

- Wenn sich das Gerät ungewöhnlich stark aufheizt oder auf andere Art nicht richtig funktioniert, unterbrechen Sie die Behandlung sofort und schalten Sie das Gerät aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Papier, Textilien, etc.).
- Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Hauttest durch. Wählen Sie hierfür eine Stelle am Arm und führen Sie eine testweise Behandlung durch - siehe **Hauttest durchführen**. Wenn sich daraufhin eine Rötung, Schwellung oder Verbrennung zeigt oder andere Hautirritationen auftreten, halten Sie Rücksprache mit einem Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Wenn Sie nach 24 Stunden keine Hautveränderung feststellen, können Sie das Gerät zur normalen Behandlung verwenden.
- Unterbrechen Sie die Verwendung, wenn sich Hautirritationen zeigen; eine weitere Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät in normaler Geschwindigkeit. Wenn die Lamelle zu heiß wird, besteht Verbrennungsgefahr und als Folge Blasen- und Narbenbildung.
- Bewegen Sie das Gerät bei der Haarentfernung an Gelenken immer parallel zur Hautoberfläche und kippen Sie es gegebenenfalls.
- Achtung! Verbrennungsgefahr besteht bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Reinigen Sie die behandelten Hautpartien nach der Behandlung, damit keine Entzündungen entstehen.


Siehe

- Die Hautporen bleiben nach der Behandlung geöffnet; Sie können die behandelten Hautpartien durch Auflegen eines kühlen Handtuchs beruhigen. Personen mit empfindlicher Haut können auch bei korrekter Verwendung des Gerätes Schmerzen empfinden oder eine Schwellung der behandelten Hautpartien entwickeln.
- Verwenden Sie das Gerät maximal 2 Minuten lang auf einer Körperstelle und behandeln Sie den gesamten Körper nicht länger als 30 Minuten.
- Achten Sie darauf, dass sich die Laufrolle und die Lamelle im richtigen Winkel befinden, um mit der richtigen Leistung arbeiten zu können.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Aufsatz in der korrekten Position befindet. Verletzungsgefahr besteht, wenn die Lamelle verbogen, beschädigt oder gebrochen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Lamelle korrekt befestigt ist; wenn sie nicht fest sitzt, besteht Verbrennungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf gereinigter und trockener Haut.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung von Haarüberresten und sonstigen Verunreinigungen, um Beschädigungen des Gerätes durch Verbrennen der Verunreinigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie bei der Behandlung sicher, dass die Laufrolle auf der Haut aufgesetzt wird und die Lamelle Hautkontakt hat.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tieren, um diesen keine Verletzungen und Verbrennungen zuzufügen.
- Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung abkühlen, bevor Sie den Aufsatz abnehmen und das Gerät reinigen.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GEGENANZEIGEN

Das Gerät darf nicht verwendet werden:

- im Gesicht, an Hals und Nacken, im Genitalbereich, auf Schleimhäuten
 - während der Schwangerschaft und Stillzeit
 - bei hitzeempfindlicher Haut
 - während der Menstruation
 - auf Leber- oder Pigmentflecken
 - auf Wunden
 - nach dem Genuss von Alkohol
 - bei Übermüdung
 - bei Unwohlsein
 - bei empfindlicher Haut
 - bei Dermatitis
 - bei trockener Haut
 - nach Verbrennungen
- 

- bei Hautkrankheiten
- vor dem Duschen, Baden oder Schwimmen
- bei Herzerkrankungen
- von Demenzkranken, die einen Herzschrittmacher oder andere Medizingeräte tragen
- bei auffälligen Blutwerten
- bei akuten Krankheiten oder Infektionen
- bei Hitzschlag
- bei Tumoren
- bei gebrochenen Knochen
- auf Tattoos
- nach Schönheitsoperationen
- bei Juckreiz oder Entzündungen der Haut

Wenn Sie unsicher sind, ob die Verwendung des Gerätes für Sie geeignet ist, ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate.



WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Sidel

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8062 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland




Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.07.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-8062 ein.




PRODUKTDDETAILS

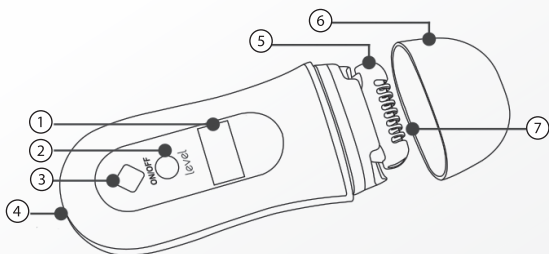

1. LCD-Display
2. Level-Taste
3. ON/OFF-Taste
4. Netzteil-Anschluss
5. Laufrolle
6. Abdeckkappe
7. Aufsatz

LCD-DISPLAY

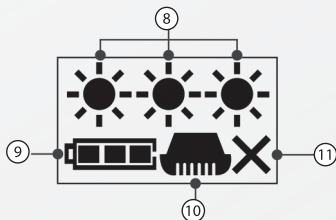

8. Temperaturanzeige
9. Akkuladestand
10. Normale Betriebsbedingungen
11. Schlechte Betriebsbedingungen

VERWENDUNG

HAARENTFERNUNGSGERÄT AUFLADEN

**HINWEIS:**

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird im LCD-Display der Ladestand des Akkus angezeigt. Führen Sie einen vollständigen Ladevorgang aus, wenn der Ladestand des Akkus niedrig ist. In diesem Fall wird zusätzlich zur Anzeige im LCD-Display viermal ein Signalton ertönen. Danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteil-Anschluss am unteren Ende des Gerätes.

Verbinden Sie anschließend das Netzteil mit einer Steckdose.

Den Ladestand des Akkus können Sie während des Ladevorgangs im LCD-Display ablesen: Das Batteriesymbol füllt sich kontinuierlich. Ist das Batteriesymbol komplett gefüllt, ist der Ladevorgang beendet.

Trennen Sie dann das Netzteil von der Steckdose und vom Haarentfernungsgerät.

Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden.


**HINWEIS:**

Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.

Sich

VORBEREITUNG

Nehmen Sie die Abdeckkappe des Haarentfernungsgerätes ab.

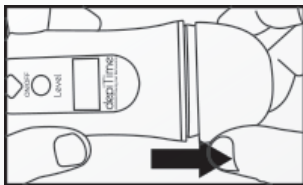

Entfernen Sie eventuell vorhandene Verunreinigungen von den Kontaktstiften.



Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf.



Silber


Den kleinen Aufsatz verwenden Sie für enge oder geschwungene Stellen wie z. B. in Gelenken.



Den großen Aufsatz verwenden Sie für größere und ebene Körperbereiche wie z. B. Arme und Beine.



Überprüfen Sie zum Abschluss die korrekte Position des Aufsatzes.

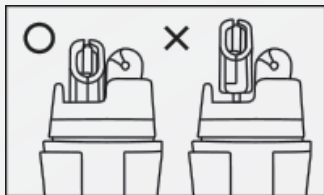

HINWEIS:

Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung abkühlen, bevor Sie den Aufsatz abnehmen und das Gerät reinigen.

HAARENTFERNUNGSMETHODE

Vor der Behandlung

Lassen Sie das Gerät zunächst ausgeschaltet und üben Sie, das Gerät über die Hautpartien zu führen.

Wählen Sie den richtigen Aufsatz für die zu behandelnde Körperpartie aus.

Behandlung

Während der Behandlung kann es zu leichtem Schmerzempfinden und leichten Hautschwellungen durch die Hitzeeinwirkung kommen. Die Schmerzempfindlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Nach der Behandlung lassen die Reaktionen nach.

Nach der Behandlung

Beruhigen Sie die behandelten Körperpartien durch Auflegen eines kühlen Handtuchs. Tragen Sie anschließend eine Körperlotion auf.

Sollten die Schmerzempfindlichkeit und die Hautreaktionen länger als 2 Tage anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

Wachstumsphasen

Das Haarwachstum durchläuft 3 Phasen:



Das neue Haar wächst unter der Hautoberfläche heran.



Das Wachstum stoppt, nachdem das Haar durch die Hautoberfläche durchgekommen ist und die volle Länge erreicht hat.




Das Haar beginnt sich zu lösen und die neue Wachstumsphase beginnt.

Für die Haarentfernung ist die Wachstumsphase (1. Phase) am besten geeignet. Die Wachstumsphasen der Körperhaare können von Körperbereich zu Körperbereich unterschiedlich sein. Nach mehreren Behandlungen werden die Körperhaare weniger.

Silber

BEHANDLUNGSDAUER UND GEEIGNETE KÖRPERREGIONEN

Für die Haarentfernung mit diesem Gerät geeignete Körperregionen:

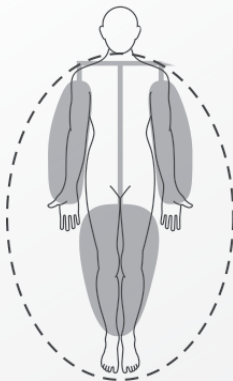

Behandeln Sie einen einzelnen Körperbereich nicht länger als 2 Minuten und bewegen Sie das Gerät maximal 4 bis 5 Mal über die behandelte Körperpartie.

Eine Behandlung aller Körperbereiche sollte nicht länger als 30 Minuten dauern.





HINWEIS:

Brechen Sie die Behandlung ab, wenn sich die behandelte Körperpartie rötet oder anschwillt. Exzessive Benutzung des Gerätes oder Behandlung von nicht zur Behandlung mit diesem Gerät geeigneten Körperpartien kann zu Verletzungen führen.

Silber



EIN/AUSSCHALTEN UND AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Einschalten

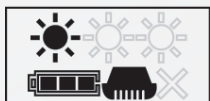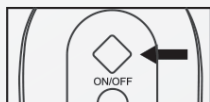


Schalten Sie das Gerät über die ON/OFF-Taste ein - halten Sie die Taste solange gedrückt, bis sich das LCD-Display einschaltet.

Ausschalten

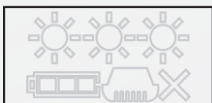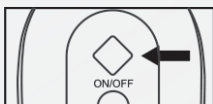

Schalten Sie das Gerät über die ON/OFF-Taste aus - halten Sie die Taste solange gedrückt, bis sich das LCD-Display ausschaltet.

Automatisches Ausschalten

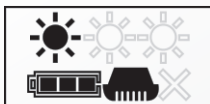


Das Gerät schaltet sich automatisch nach einer Betriebsdauer von 15 Minuten aus.

Das Gerät schaltet sich automatisch 5 Minuten nach dem Einschalten wieder aus, wenn keine Behandlung erfolgt.

Das Gerät schaltet sich auch automatisch wieder aus, wenn kein Aufsatz montiert wird.

TEMPERATUR EINSTELLEN


Sie können die Temperatur der Lamelle in 3 Stufen über die Level-Taste einstellen.

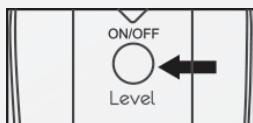


Wählen Sie die erste Stufe für den Beginn der Behandlung. Diese Stufe wird für die Behandlung von Personen empfohlen, die eine empfindliche Haut haben oder hitzeempfindlich sind.

Sibel

Die über die Level-Taste ausgewählte Temperaturstufe wird im LCD-Display angezeigt:

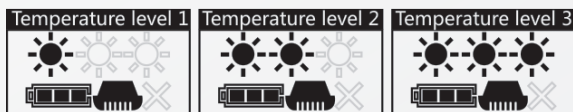

Die aktuelle Temperatur des kleinen und des großen Aufsatzes sind bei gleicher Temperaturstufe unterschiedlich:

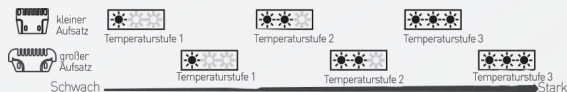

HAUTTEST DURCHFÜHREN

Wählen Sie die geeignete Temperaturstufe und die geeignete Geschwindigkeit sorgfältig aus, vor allem bei der ersten Verwendung des Gerätes oder wenn Sie das Gerät nach längerer Pause wieder verwenden.

Geschwindigkeit

Stellen Sie sicher, dass der kleine Aufsatz korrekt montiert ist und das Gerät ausgeschaltet ist.

Bewegen Sie das Haarentfernungsgerät vorsichtig mit einer Geschwindigkeit von ca. 3 bis 4 cm pro Sekunde über die zu behandelnde Hautpartie. Üben Sie die korrekte Handhabung zunächst bei ausgeschaltetem Gerät.

Sicher

Temperatur

Führen Sie vor der ersten Behandlung einen Hauttest durch. Wählen Sie hierfür eine Stelle am Arm und führen Sie eine testweise Behandlung durch:

Stellen Sie sicher, dass der kleine Aufsatz korrekt montiert ist und schalten Sie das Gerät über die ON/OFF-Taste ein.

Stellen Sie die Temperaturstufe 1 über die Level-Taste ein. Bewegen Sie das Haarentfernungsgerät 4 oder 5 Mal über die zu behandelnde Hautpartie.

Schalten Sie dann das Gerät über die ON/OFF-Taste wieder aus.

Reinigen Sie die Hautpartie nach der Behandlung.

Wenn sich nach der Behandlung eine Rötung, Schwellung oder Verbrennung oder andere Hautirritationen zeigen, halten Sie Rücksprache mit einem Arzt, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Wenn Sie nach 24 Stunden keine Hautveränderung feststellen, können Sie das Gerät zur normalen Behandlung verwenden.

BEHANDLUNG

1. Bevor Sie mit der Haarentfernung beginnen, schneiden Sie die Körperhaare auf eine Länge von 5 mm oder weniger zurück, um den Verbrennungsgeruch zu minimieren.
2. Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Aufsatz korrekt montiert ist.
3. Schalten Sie das Gerät über die ON/OFF-Taste ein.
4. Überprüfen Sie die im LCD-Display angezeigten Symbole zu Aufsatz/Betriebsbedingungen und Temperaturstufe.

5. Halten Sie das Gerät in der korrekten Position, wenn die Lamelle aufgeheizt wird.
6. Bewegen Sie das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 4 cm pro Sekunde über die zu behandelnde Körperpartie. Bewegen Sie das Gerät entgegen der Wuchsrichtung der Haare.
7. Bewegen Sie das Gerät 4 bis 5 Mal über die zu behandelnde Körperpartie. Behandeln Sie einen einzelnen Körperbereich nicht länger als ca. 2 Minuten.
8. Das Gerät schaltet sich automatisch nach einer Betriebsdauer von 15 Minuten aus. Das Aufheizen wird nach einer Behandlungsdauer von 7 Sekunden automatisch unterbrochen. Unterbrechen Sie in diesem Fall die Behandlung kurz und schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein.
Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung aus und lassen Sie es vollständig abkühlen.
Reinigen Sie das abgekühlte Gerät nach jeder Behandlung mit der Bürste und dem Reinigungspad.

Hinweise:

1. Wenden Sie bei der Behandlung keine große Kraft an und halten Sie das Gerät nicht zu lange auf einer einzelnen Körperstelle, dies kann zu Verbrennungen führen.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht, auf dem Kopf, im Genitalbereich oder auf Schleimhäuten.
3. Beruhigen Sie die behandelten Körperpartien durch Auflegen eines kühlen Handtuchs. Tragen Sie anschließend eine Körperlotion auf.
4. Sollten aufgetretene Schmerzempfindlichkeit und Hautreaktionen länger als 2 Tage anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung aus und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Reinigen Sie das abgekühlte Gerät nach jeder Behandlung mit der Bürste und dem Reinigungspad.

Reinigen Sie das Gerät und die Lamelle nicht mit Wasser.

Wenn sich ein Fremdkörper in der Halterung des Aufsatzes befindet, halten Sie das Gerät kopfüber und schütteln Sie den Fremdkörper vorsichtig heraus.

Die entfernten Haare setzen sich üblicherweise an der heißen Lamelle ab und verbrennen dort. Reinigen Sie deshalb die Lamelle regelmäßig mit der Bürste und einem weichen Tuch.

LAMELLE ERSETZEN

Setzen Sie eine neue Lamelle ein, wenn

- die Lamelle gebrochen oder beschädigt ist,
- die Haarentfernung nicht mehr so effektiv erfolgt wie zuvor,
- die Lamelle nicht heiß wird und im LCD-Display eine schlechte Betriebsbedingung angezeigt wird.



HINWEIS:

Bei normalem Gebrauch verfärbt sich die heiße Lamelle mit der Zeit schwarz.

Sidel

REINIGUNGSPAD WECHSELN

Das Reinigungspad sollten Sie regelmäßig nach einem Monat wechseln.

Ziehen Sie das alte Schleifpapier vom unteren Pad ab.

Ziehen Sie die Folie auf der Rückseite des neuen Schleifpapiers ab und setzen Sie das neue Schleifpapier auf das untere Pad auf.



Sichler

ANHANG

PROBLEMBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Ein Aufladen des Gerätes ist nicht möglich.	Das Netzteil ist nicht richtig an das Haarentfernungsgerät angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil korrekt an das Haarentfernungsgerät an.
	Das Netzteil ist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil korrekt an die Steckdose an.
Das Gerät bringt keine Leistung.	Das Gerät wurde nicht richtig eingeschaltet.	Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten.
	Der Akkuladestand ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku vollständig auf.
Das Gerät arbeitet nicht korrekt.	Keine Leistung vorhanden.	Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten.
	Keine Leistung vorhanden.	
	Der Aufsatz ist nicht korrekt montiert	Montieren Sie den Aufsatz korrekt in der entsprechenden Halterung.
	Es bestehen Probleme mit dem Aufsatz.	Überprüfen Sie, ob die Lamelle verbogen oder verschmolzen ist.
	Der Akku ist defekt.	Lassen Sie den Akku von Fachpersonal reparieren oder ersetzen.

HÄUFIGE FRAGEN

Fragen	Antworten
Kann das Haarentfernungsgerät im Badezimmer benutzt werden?	Verwenden Sie das Haarentfernungsgerät nicht in feuchten Umgebungen, da das Gerät nicht wasserfest ist.
Kann das Gerät während des Ladevorgangs benutzt werden?	Verwenden Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während des Ladevorgangs.
Ist es normal, dass während des Betriebs Geruch und Rauch entstehen?	Das Entstehen von Geruch und Rauch während des Betriebs ist normal. Sie können den Aufsatz und die Lamelle in kürzeren Abständen reinigen, um die Geruchs- und Rauchbildung zu verringern.
Können während der Verwendung Verletzungen entstehen?	Wenn Sie das Gerät mit zu viel Kraft oder zu schnell bewegen, kann dies zu Schnittverletzungen führen. Exzessive Benutzung des Gerätes oder Behandlung von nicht zur Behandlung mit diesem Gerät geeigneten Körperpartien kann zu Entzündungen und Verbrennungen führen.

<p>Welche Temperaturstufe soll ich einstellen?</p>	<p>Wählen Sie für den Beginn der Behandlung den kleinen Aufsatz und die Temperaturstufe 1. Diese Stufe wird für die Behandlung von Personen empfohlen, die eine empfindliche Haut haben oder hitzeempfindlich sind.</p>
<p>Ist das Gerät für die Verwendung durch Kinder geeignet?</p>	<p>Das Gerät ist für die Verwendung durch Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Ältere Kinder sollten in der Handhabung des Gerätes durch einen Erwachsenen angeleitet werden, um Verbrennungen und andere Verletzungen zu vermeiden.</p>
<p>Muss die Lamelle während der Behandlung immer rot werden?</p>	<p>Die Lamelle wird bei einer Behandlung mit Temperaturstufe 1 nicht rot, er heizt sich aber trotzdem auf.</p>



Kann es vorkommen, dass während der Behandlung nicht alle Körperhaare entfernt werden?

Überprüfen Sie die Haarlänge, die Geschwindigkeit und Richtung des Gerätes sowie den Hautkontakt.

Bewegen Sie das Gerät entgegen der Wuchsrichtung der Haare.

Wenn die Körperhaare zu kurz sind, kann die Lamelle sie nicht berühren und somit kann keine Haarentfernung durchgeführt werden. Die optimale Haarlänge für die Haarentfernung beträgt 2 bis 3 Millimeter.

Sie können versuchen, die Haare mit dem Reinigungspad zu entfernen. Sollte auch das keine Lösung bringen, können Sie die Haare rasieren.

Silber

TECHNISCHE DATEN

Akku	7,4 V / 650 mAh
Ladevorgang	Eingangsspannung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz Leistungsabgabe: 10 V, 500mA
Stromverbrauch	5,8 W (bei Temperaturstufe 3)
Ladezeit	1,5 Stunden
Betriebszeit bei vollständig geladenem Akku	großer Aufsatz: 45 Minuten, kleiner Aufsatz: 85 Minuten
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	30 bis 80 %
Abmessungen	52 cm x 28 cm x 127 cm
Gewicht	ca. 98 g

The logo for the brand 'Stiller' is written in a large, elegant, white cursive script. The letters are fluid and connected, with a prominent 'S' at the beginning and a long, sweeping tail that extends to the right. The logo is positioned at the bottom of the page, partially overlapping a light gray decorative wave.