

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 3 in 1 Massagegürtel-Sets. Entspannen Sie sich und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes für Ihren Körper! Dieser Massagegürtel vereint moderne Technik mit traditioneller chinesischer Stimulation mit elektrischen Impulsen. Bioelektrische Impulse regen die Blutzirkulation und den Stoffwechsel an und lockern Ihre Muskeln.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 3 in 1 Massagegürtel-Set optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 3 in 1 Massagegürtel-Set
- Fernbedienung
- Hüftgürtel
- 2 x Arm-/Oberschenkelgürtel
- 2 x Verlängerungen
- 7 x Massage Pads
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: 2 Batterien vom Typ AAA (Micro)

**Technische Daten**

|                          |                              |        |
|--------------------------|------------------------------|--------|
| Stromversorgung          | 2 x Batterie Typ AAA (1,5 V) |        |
| Massage-Frequenz         | 1-50 Hz                      |        |
| Aufgenommene Stromstärke | 28 mA                        |        |
| Betriebs-Modi            | 6                            |        |
| Intensitäts-Stufe        | 10                           |        |
| Automatische Abschaltung | nach 30 Minuten              |        |
| Maße                     | Massagegürtel                | 110 cm |
|                          | Verlängerung                 | 59 cm  |
|                          | Arm-/Oberschenkelgürtel      | 35 cm  |


**Produktdetails**

**Fernbedienung**

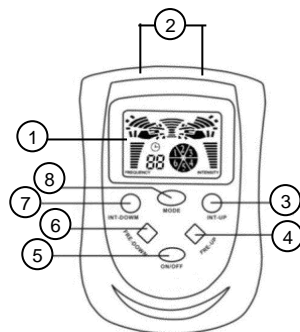

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 Display           | 5 Ein/Aus-Taste    |
| 2 Klinken-Anschluss | 6 [FRE-DOWN]-Taste |
| 3 [INT-UP]-Taste    | 7 [INT-DOWN]-Taste |
| 4 [FRE-UP]-Taste    | 8 Modus-Taste      |

**Display**

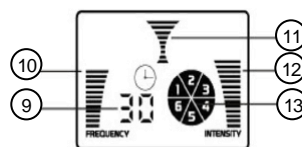


- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 9 Timer             | 12 Intensitäts-Stufe |
| 10 Massage-Frequenz | 13 Betriebs-Modus    |
| 11 Puls-Indikator   |                      |

**Batterien einsetzen / wechseln**

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

**Verwendung**

1. Reinigen und trocknen Sie die Hautpartien, auf denen Sie die Massage-Pads anlegen möchten, gründlich. Es darf sich keine Lotion, Öl oder Schmutz auf der Haut befinden.
2. Befeuchten Sie die Kontaktflächen der Massage-Pads mit etwas Wasser.
3. Bringen Sie die Massage-Pads mit Hilfe der Druckknöpfe an den Hüft-, Arm- oder Oberschenkelgürteln an.

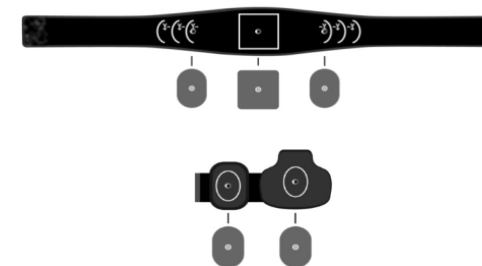

4. Verbinden Sie den Klinken-Stecker des Hüftgürtels mit einem Klinken-Anschluss der Fernbedienung.



5. Verbinden Sie den Klinken-Stecker eines Arm-/Oberschenkelgürtels mit der Klinken-Buchse des anderen Arm-/Oberschenkelgürtels.



6. Verbinden Sie den freien Klinken-Stecker des Arm-/Oberschenkelgürtels mit dem freien Klinken-Anschluss der Fernbedienung.



7. Legen Sie die Gürtel an den Körperregionen an, die massiert werden sollen.
8. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Fernbedienung einzuschalten.
9. Wählen Sie mit der Modus-Taste den gewünschten Modus aus. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in einen anderen Modus. Das entsprechende Kreissegment leuchtet im Display.
10. Stellen Sie mit den Tasten [INT-UP] (+) und [INT-DOWN] (-) die gewünschte Intensitätsstufe ein.



**HINWEIS:**

*Beginnen Sie die Massage immer mit der niedrigsten Intensitätsstufe (1), diese kann je nach Benutzer kaum spürbar sein. Steigern Sie diese langsam, bis Sie die für sich angenehme Intensitätsstufe gefunden haben.*

11. Stellen Sie mit den Tasten [[FRE-UP] (+) und [FRE-DOWN] (-) die gewünschte Massage-Frequenz ein. Beginnen Sie mit der niedrigsten Frequenz und steigern Sie diese langsam, wenn Sie sich an die Massage gewöhnt haben.
12. Nach dreißig Minuten schaltet sich Ihr Massagegürtel automatisch aus.
13. Drücken Sie während des Betriebs die Ein/Aus-Taste bis das Display der Fernbedienung erlischt, um Ihren Massagegürtel auszuschalten.



**ACHTUNG!**

**Der Massagegürtel ist kein medizinisches Gerät! Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie die Vibration als unangenehm empfinden.**

**Betriebs-Modi**

| Nr. | Modus                   | Bedeutung   |
|-----|-------------------------|---|
| 1   | Crunch-Kurzprogramm     | Lange Kontraktionen                                       |
| 2   | Crunch-Programm         | Sehr schnelle Impulse                                     |
| 3   | Rollende Massage-Welle  | Klopf-Schlag mit Pausen                                   |
| 4   | Lange Massage-Welle     | Übung mit unterschiedlichen Elementen und Pausen          |
| 5   | Rollender Tiefen-Impuls | Übung mit steigender Intensität                           |
| 6   | Langer Tiefen-Impuls    | Komplettes Übungsprogramm mit unterschiedlichen Elementen |

**Anwendungs- und Gesundheitshinweise**

- Auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen der Haut darf die Massage nicht angewendet werden.
- Verwenden Sie den Massagegürtel nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Halten Sie den Massagegürtel stets sauber. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie den Massagegürtel nicht am Kopf oder im Genitalbereich.
- Der Massagegürtel ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn fern von Kindern!
- Verwenden Sie das Gerät nicht Muskeln, die atrophiert sind, schmerzen oder zucken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Körperteil mit schmerzenden oder anderweitig eingeschränkten Gelenken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Muskelschulung, zur Prävention von atrophierenden Muskeln oder Zuckungen oder um den Bewegungsreichweite zu verbessern.

Für folgende Personen ist der Massagegürtel nicht geeignet:

- Personen mit einer Herzkrankheit oder Personen, die einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.
- Personen mit abnormalem Blutdruck, hohem Fieber, starken, schmerzhaften Krankheiten, bösartigen Tumoren oder tuberkulösen Krankheiten.
- Frauen in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt eines Kindes.
- Personen mit nicht diagnostizierten Schmerzen
- Personen, die vor kurzem operiert wurden oder ein Trauma erlitten haben
- Personen, die an Epilepsie leiden
- Personen, die an Muskelschmerzen leiden oder deren Muskeln atrophiert sind
- Personen, die an einem Leistenbruch leiden
- Personen mit eingeschränkter Gelenk-Bewegungsmöglichkeit

Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren.

**Reinigung**

Reinigen Sie die Massagepads nach der Anwendung mit einem trockenen Tuch und gegebenenfalls ein wenig Wasser. Bringen

Sie nach der Anwendung die Schutzfolien an und lagern Sie Ihren Massagegürtel an einem kühlen und trockenen Ort.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8068 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
05.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8068 ein.

Weitere Infos und FAQs zu newgen-medicals-Produkten finden Sie auf: [www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de).



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ceinture de massage 3 en 1. Les impulsions bioélectriques stimulent votre circulation sanguine et votre métabolisme tout en détendant vos muscles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Ceinture de massage 3 en 1
- Télécommande
- Ceinture de taille
- 2 ceintures de bras et de cuisse
- 2 rallonges
- 7 patches de massage
- Mode d'emploi


**Accessoires requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) : 2 piles AAA

**Caractéristiques techniques**

|                         |                                |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------|
| Alimentation            | 2 piles AAA / 1,5 V            |        |
| Fréquence de massage    | 1 – 50 Hz                      |        |
| Courant absorbé         | 28 mA                          |        |
| Modes de fonctionnement | 6                              |        |
| Niveaux d'intensité     | 10                             |        |
| Arrêt automatique       | Après 30 min                   |        |
| Dimensions              | Ceinture de massage            | 110 cm |
|                         | Rallonge                       | 59 cm  |
|                         | Ceintures de bras et de cuisse | 35 cm  |


**Description du produit**

Télécommande

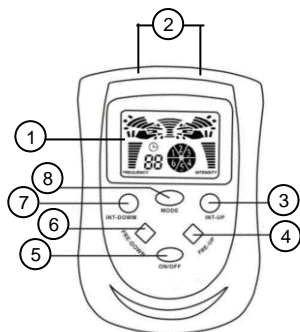

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1 Écran           | 5 Touche Marche/Arrêt |
| 2 Prise jack      | 6 Touche [FRE-DOWN]   |
| 3 Touche [INT-UP] | 7 Touche [INT-DOWN]   |
| 4 Touche [FRE-UP] | 8 Touche Mode         |

Écran

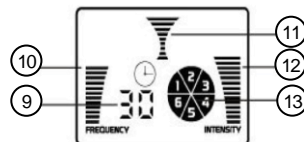



- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 9 Minuteur              | 12 Niveaux d'intensité    |
| 10 Fréquence de massage | 13 Mode de fonctionnement |
| 11 Indicateur de piles  |                           |

**Insérer / remplacer les piles**

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez-y deux piles AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.

**Utilisation**


1. Nettoyez et séchez soigneusement la peau sur laquelle vous souhaitez appliquer les patches de massage. Ne mettez pas de lotion, d'huile ou de saleté sur la peau.
2. Humidifiez les zones de contact des patches avec un peu d'eau, de manière à ce qu'ils adhèrent mieux.
3. Fixez les patches de massage à la ceinture de taille, de bras ou de cuisses à l'aide des boutons à pression.

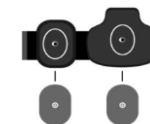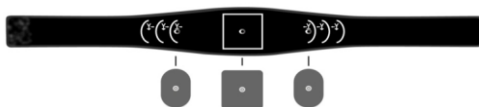

4. Branchez le connecteur jack de la ceinture de taille au port jack de la télécommande.



5. Branchez le connecteur jack d'une ceinture de bras ou de cuisse au port jack de l'autre ceinture de bras ou de cuisse.

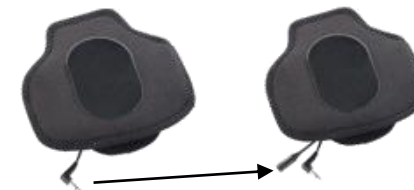

6. Branchez le connecteur jack libre de la ceinture bras ou de cuisse au port jack libre de la télécommande.



7. Attachez les ceintures autour des zones à masser.
8. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la télécommande.
9. Utilisez la touche Mode pour sélectionner un mode. Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre mode. Le cercle correspondant s'affiche sur l'écran.
10. Utilisez les touches [INT-UP] (+) et [INT-DOWN] (-) pour régler le niveau d'intensité souhaité.



**NOTE :**

Commencez toujours le massage au niveau d'intensité le plus bas (1) ; celui-ci peut être à peine perceptible selon l'utilisateur. Augmentez lentement l'intensité jusqu'à ce que vous ayez trouvé le niveau d'intensité avec lequel vous êtes à l'aise.

11. Réglez la fréquence de massage avec les touches [FRE-UP] (+) et [FRE-DOWN] (-). Commencez par la fréquence la plus basse et augmentez-la lentement au fur et à mesure que vous vous habituez au massage.
12. La ceinture s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.
13. Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran de la télécommande s'éteigne. Vous éteignez ainsi la ceinture de massage.



**ATTENTION !**

La ceinture de massage ne constitue pas un appareil médical. Ne l'utilisez pas si vous trouvez les vibrations désagréables.

**Modes de fonctionnement**

| N° | Mode                           | Signification   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Programme court crunch         | Contractions longues                                  |
| 2  | Programme crunch               | Impulsions très rapides                               |
| 3  | Massage par roulement de vague | Brefs coups avec pauses                               |
| 4  | Massage par vagues longues     | Exercices avec différents éléments et pauses          |
| 5  | Impulsions profondes roulantes | Exercice avec intensité croissante                    |
| 6  | Impulsions profondes longues   | Exercices complets avec différents éléments et pauses |

**Consignes importantes pour la santé**

- Le produit ne doit pas être appliqué sur ou à proximité d'une zone présentant des blessures externes, une pathologie cutanée ou une réaction allergique cutanée.
- N'utilisez pas la ceinture de massage si votre corps est encore mouillé (après une douche, un bain, etc.).
- La ceinture de massage doit toujours être bien propre. Pour nettoyer l'appareil, utilisez toujours un chiffon sec.
- N'utilisez pas la ceinture de massage au niveau de la tête ou des parties génitales.
- N'utilisez pas l'appareil sur des muscles atrophiés, douloureux ou contracturés.

- N'utilisez pas l'appareil sur des articulations douloureuses ou autrement limitées.
- N'utilisez pas l'appareil pour entraîner vos muscles, prévenir l'atrophie des muscles ou des contractions, ou pour améliorer l'amplitude des mouvements.

L'appareil ne convient pas pour les personnes suivantes :

- Les personnes souffrant de pathologies cardiaques et/ou portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur.
- Les personnes présentant une pression artérielle anormale, une fièvre élevée, des maladies graves et douloureuses, des tumeurs malignes ou des maladies tuberculeuses.
- Les femmes enceintes ou ayant récemment accouché.
- Les personnes présentant des douleurs non diagnostiquées.
- Les personnes ayant récemment subi une opération chirurgicale ou un traumatisme.
- Les personnes souffrant d'épilepsie.
- Les personnes souffrant de douleurs musculaires ou dont les muscles sont atrophiés.
- Les personnes souffrant d'une hernie inguinale.
- Les personnes à mobilité commune limitée.

Les personnes sous traitement médical doivent consulter un médecin avant toute utilisation de cet appareil.

**Nettoyage**

Nettoyez les patches de massage après utilisation avec un chiffon sec et un peu d'eau si nécessaire. Après utilisation, replacez les films de protection, et rangez la ceinture de massage 3 en 1 dans un endroit frais et sec.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8068 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

