

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Sitzauflage, mit der Sie Rücken- und Gesäßmassagen genießen können. Die Wärmefunktion sorgt dabei für zusätzliche Entspannung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Sitzauflage optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Sitzauflage mit Fernbedienung
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		12 V DC / 2 A
Leistungsaufnahme		24 W
Netzteil	Eingang	100-240 V AC, 50/60 Hz
	Ausgang	12 V DC / 2 A
Textilbezug		100 % Polyester
Programme		5
Maße	Sitzauflage	42 x 35 x 4 cm
	Rückenauflage	40 x 66 x 6 cm
Gewicht		2.200 g


Produktdetails

Sitzauflage

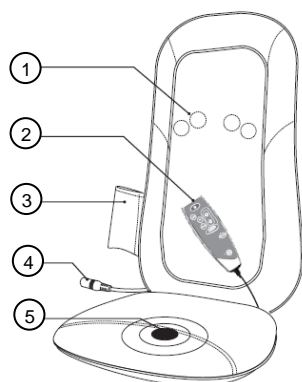

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1 Massage-Köpfe | 4 Stromanschluss |
| 2 Fernbedienung | 5 Vibrationspunkt |
| 3 Tasche | |

Fernbedienung

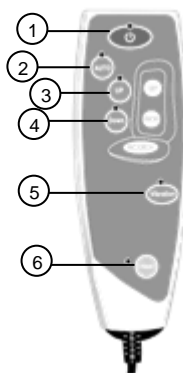

1. Ein/Aus-Taste
2. AUTO-Taste
3. UP-Taste
4. Down-Taste
5. Vibration-Taste
6. Heat-Taste

Verwendung

1. Legen Sie Ihre Sitzauflage auf eine geeignete Sitzgelegenheit mit Rückenlehne (z.B. Sofa).



HINWEIS:

Die Sitzauflage kann mit Hilfe des Klettverschlusses an den Seiten an einer Rückenlehne befestigt werden.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss Ihrer Sitzauflage.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Die Massage-Köpfe bewegen sich in die Grundposition. Die Ein/Aus-LED blinkt kurz.
4. Setzen Sie sich aufrecht auf Ihre Sitzauflage, so dass Ihr Rücken komplett anliegt.
5. Schalten Sie Ihre Sitzauflage ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die Ein/Aus-LED leuchtet.
6. Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie auf die entsprechende Taste drücken. Die Tasten-LED leuchtet.

AUTO

Massage-Bereich	gesamter Rücken
Massage-Dauer	15 Minuten
Die Massageköpfe wandern von oben nach unten und von Seite zu Seite, bleiben kurz an einem Punkt und wandern dann wieder weiter. Der Vorgang wiederholt sich, bis die Massage beendet wird.	

UP	
Massage-Bereich	mittlerer & oberer Rücken
Massage-Dauer	15 Minuten
Die Massageköpfe bewegen sich von der Grundposition aus nach oben, dann runter zum mittleren Rückenbereich und dann wieder nach oben. Der Vorgang wiederholt sich, bis die Massage beendet wird.	

Down	
Massage-Bereich	Unterer & mittlerer Rücken
Massage-Dauer	15 Minuten
Die Massageköpfe bewegen sich von der Grundposition aus nach unten, dann hoch zum mittleren Rückenbereich und dann wieder nach unten. Der Vorgang wiederholt sich, bis die Massage beendet wird.	



HINWEIS:

Pausieren Sie die Massage, indem Sie die entsprechende Programm-Taste erneut drücken. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Massage später an genau der gleichen Stelle fortgesetzt.

7. Zusätzlich zur Massage oder getrennt davon können die Vibrations- und Hitzefunktion aktiviert werden. Drücken Sie hierzu die entsprechende Taste. Mit einem weiteren Druck der Taste wird die Funktion wieder deaktiviert.

Taste	Funktion
Heat	Die Massageköpfe werden erwärmt und leuchten.
Vibration	Die Sitzfläche vibriert und massiert so das Gesäß.

8. Schalten Sie Ihre Sitzauflage aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die Ein/Aus-LED blinkt kurz, die Massage-Köpfe bewegen sich wieder in die Grundposition.
9. Warten Sie, bis die Massage-Köpfe die Grundposition erreicht haben. Trennen Sie Ihre Sitzauflage dann von der Stromversorgung.
10. Trennen Sie das Netzteil von Ihrer Sitzauflage.

Reinigung

Schalten Sie Ihre Sitzaufgabe aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Warten Sie gegebenenfalls, bis sie abgekühlt ist. Reinigen Sie Ihre Sitzaufgabe dann mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie weder Wasser noch Reinigungs- oder Verdünnungsmittel!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nutzen Sie unmittelbar vor der Anwendung keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Salben auf den betreffenden Körperzonen.

- Nutzen Sie das Massagegerät nicht länger als 30 Minuten durchgehend, danach bitte 20 Minuten ausschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nutzen sie das Massagegerät nicht im Badezimmer.
- Sollten Sie von einem der folgenden medizinischen Fälle betroffen sein, konsultieren Sie bitte vor Gebrauch des Massagegerätes einen Arzt:
 - Osteoporose
 - Erkrankungen der Wirbelsäule (z.B. Bandscheibenvorfall, etc.)
 - Gleichgewichtsstörungen
 - Schwindelattacken
 - Schwangerschaft
 - Kürzlich zurückliegende Operationen
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet oder mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen des Bezugs frei.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen Sprühdosen eingesetzt werden oder Sauerstoff verabreicht wird.

- Lassen Sie beim Einsatz der Wärmefunktion Vorsicht walten. Verwenden Sie die Funktion nicht übermäßig lange oder auf empfindlicher Haut.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-8810-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8810 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce siège de massage shiatsu qui vous masse agréablement le dos. Sa fonction chauffante vous permet de vous détendre encore plus. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Siège de massage avec télécommande
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V DC / 2 A	
Puissance absorbée	24 W	
Adaptateur secteur	Entrée	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
	Sortie	12 V DC / 2 A
Couverture	100 % polyester	
Programmes	5	
Dimensions	Assise	42 x 35 x 4 cm
	Dossier	40 x 66 x 6 cm
Poids	2200 g	


Description du produit

Siège

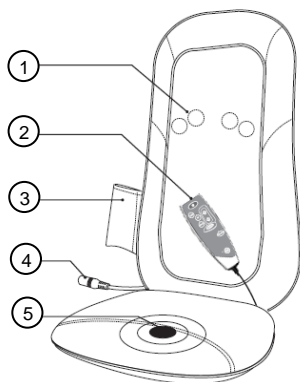

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Têtes de massage | 4 Port d'alimentation |
| 2 Télécommande | 5 Point de vibrations |
| 3 Étui | |

Télécommande

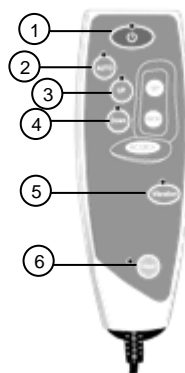

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Touche AUTO
3. Touche Up (haut)
4. Touche Down (bas)
5. Touche Vibrations
6. Touche Heat (chaleur)

Utilisation

1. Placez votre siège de massage sur un siège pourvu d'un dossier (p. ex. un canapé).



NOTE :

Le siège de massage peut être accroché au dossier à l'aide des bandes à scratch situées sur les côtés.

2. Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de votre siège de massage.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale appropriée. Les têtes de massage se placent dans leur position initiale. La LED de fonctionnement clignote brièvement.
4. Asseyez-vous sur le siège de massage en vous tenant droit, le dos complètement contre le dossier.
5. Allumez le siège de massage en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. La LED de fonctionnement brille.
6. Sélectionnez le programme de votre choix en appuyant sur la touche correspondante. La LED de la touche brille.

AUTO	
Zone de massage	Dos complet
Durée du massage	15 minutes

Les têtes de massage se déplacent de haut en bas et d'un côté à l'autre, s'arrêtent sur un point avant de repartir. Le procédé se répète jusqu'à ce que le massage soit terminé.

Up	
Zone de massage	Milieu et haut du dos
Durée du massage	15 minutes

Les têtes de massage partent de leur position initiale et se déplacent vers le haut. Elles redescendent ensuite vers le milieu du dos avant de remonter. Le procédé se répète jusqu'à ce que le massage soit terminé.

Down	
Zone de massage	Milieu et bas du dos
Durée du massage	15 minutes

Les têtes de massage partent de leur position initiale et se déplacent vers le bas. Elles remontent ensuite vers le milieu du dos avant de redescendre. Le procédé se répète jusqu'à ce que le massage soit terminé.



NOTE :

Appuyez à nouveau sur la touche du programme pour mettre le massage en pause. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre le massage. Le massage reprend alors à l'endroit exact où vous l'avez arrêté.

7. Vous pouvez activer les fonctions Vibrations et Chauffante pendant ou hors massage. Pour ce faire, appuyez sur la touche correspondante. La fonction est désactivée lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche.

Boutons	Fonction
Heat	Les têtes de massage sont chauffées et brillent.
Vibrations	L'assise vibre et masse ainsi vos muscles fessiers.

8. Éteignez le siège de massage en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. La LED de fonctionnement clignote brièvement et les têtes de massage se replacent dans leur position initiale.
9. Attendez que les têtes de massage aient atteint leur position initiale. Débranchez le siège de massage de l'alimentation électrique.
10. Débranchez l'adaptateur secteur de votre siège de massage.

Nettoyage

Éteignez votre siège de massage et débranchez-le de l'alimentation électrique. Si besoin, attendez qu'il ait refroidi. Nettoyez le siège à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez ni eau, ni produit nettoyant ou diluant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'utilisation de cet appareil est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans même sous la surveillance d'un adulte.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Avant utilisation, n'appliquez aucune crème, pommade ou onguent, cosmétique ou médical, sur les zones du corps que vous allez masser.
- Afin d'éviter toute surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes en continu, et laissez-le refroidir au moins 20 minutes après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil de massage dans une salle de bains.
- Si vous êtes concernés par au moins un des cas médicaux suivants, consultez absolument un médecin avant d'utiliser cet appareil de massage :
 - Ostéoporose
 - Affections de la colonne vertébrale (hernie discale, etc.)
 - Troubles de l'équilibre
 - Crises de vertige
 - Grossesse
 - Opération chirurgicale récente
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou branché à l'alimentation secteur.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération de la housse.

- N'utilisez pas l'appareil en extérieur, ou dans un environnement dans lequel des aérosols sont utilisés ou de l'oxygène est diffusé.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez la fonction Chauffante. N'utilisez pas la fonction pendant une durée excessivement longue ou sur une peau sensible.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8810 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE+ 2015/863/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.