

# Akku-Munddusche MD-700

Mit 180-ml-Wassertank, 1.700 Impulse/Min., 120 psi, USB

## Bedienungsanleitung





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihre neue Munddusche</b> .....	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
Optionales Zubehör.....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn</b> .....	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	8
Konformitätserklärung .....	8
<b>Produktdetails</b> .....	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
Akku laden.....	10
Wassertank füllen.....	10
<b>Verwendung</b> .....	<b>11</b>
<b>Nach dem Gebrauch</b> .....	<b>12</b>
<b>Reinigung</b> .....	<b>13</b>
<b>Problemlösungen</b> .....	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>15</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHRE NEUE MUNDDUSCHE

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Munddusche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Munddusche optimal einsetzen können.

## **Lieferumfang**

- Munddusche
- 2 Aufsätze
- Netzteil
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

## **Optionales Zubehör**

2er-Set Ersatzdüsen (NX-8871)

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

### **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
**Achtung Verletzungsgefahr!**
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,

- durch Personen einschließlich Kinder mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kleinteile können verschluckt werden!
  - Das Gerät muss so befestigt werden, dass es nicht ins Wasser oder auf den Boden fallen kann.
  - Achten Sie darauf, das Saugrohr im Wassertank nicht zu knicken oder zu verdrehen. Ziehen Sie nicht am Saugrohr!
  - Wenn Ihr Gerät dennoch ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach!
  - Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie baden.
  - Das Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
  - Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es

selbst oder das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist.

- Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Aufsatz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als in der Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Füllen Sie keine Mundspülung in den Wassertank. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Wenn Zahnschmerzen oder Schmerzen des Zahnfleischs während der Verwendung auftreten, unterbrechen Sie sofort die Nutzung. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
- Pressen Sie den Aufsatz nicht zu fest gegen Ihre Zähne oder Ihr Zahnfleisch. Verletzungsgefahr!
- Wenn Sie sich in zahnärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor Verwendung dieses Produkts Ihren Zahnarzt kontaktieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8870-675 in Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.




Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8870 ein.





## PRODUKTDDETAILS

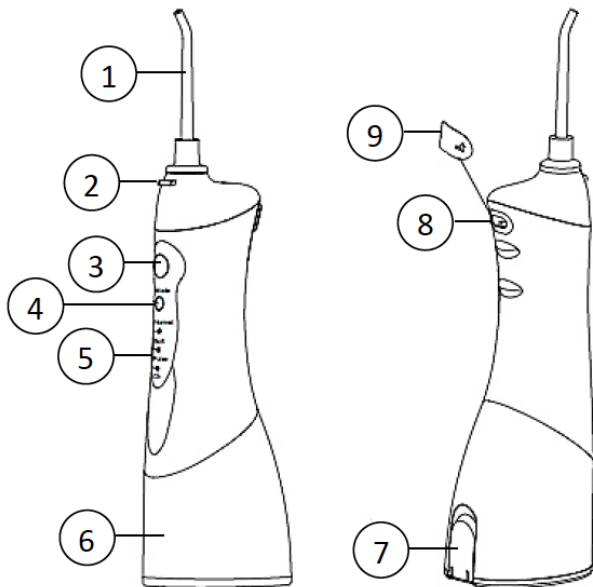

1. Aufsatz
2. Aufsatz-Entriegelungstaste
3. Power-Taste
4. Mode-Taste
5. Modus-LEDs (Normal, Soft, Pulse/Ch)
6. Wassertank
7. Wassertank-Kappe
8. Ladeanschluss
9. Ladeanschluss-Abdeckung

# INBETRIEBNAHME

## Akku laden

1. Prüfen Sie, dass sich kein Wasser und keine Wasserrückstände im Tank befinden.
2. Öffnen Sie die Ladeanschluss-Abdeckung und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Ladeanschluss des Geräts. Die Einkerbung am Stecker zeigt dabei nach unten.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils.
4. Verbinden Sie dann das Netzteil mit der Stromversorgung. Während des Ladevorgangs leuchtet die unterste Modus-LED (Ch) rot. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Ch-LED blau.
5. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und dem Gerät. Verschließen Sie den Ladeanschluss wieder mit der Abdeckung.



### HINWEIS:

*Wenn die Ch-LED während der Verwendung blinkt, ist der Akkustand niedrig. Laden Sie das Gerät wieder auf.*

## Wassertank füllen

Öffnen Sie den Wassertank, indem Sie die Wassertank-Kappe aufklappen. Füllen Sie Leitungswasser ein und schließen Sie die Kappe wieder. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht wärmer als 40 °C ist.

## VERWENDUNG



### *HINWEIS:*

*Bitte beachten Sie, dass sich vor Gebrauch bereits etwas Flüssigkeit im Tank oder Saugrohr befinden kann. Dies ist destilliertes Wasser, das für den Leistungstest verwendet wurde und im Gerät zurückgeblieben ist. Es handelt sich nicht um einen hygienischen Mangel.*

1. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass er richtig einrastet. Der Aufsatz muss direkt an der Munddusche anliegen.
2. Drücken Sie wiederholt die Mode-Taste, um den Modus zu wählen. Die entsprechende Modus-LED leuchtet blau:
  - Normal: normale Reinigung
  - Soft: sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch
  - Pulse: Reinigung und pulsierende Massage des Zahnfleischs
3. Beginnen Sie mit der sanftesten Stufe, um sich an das Gerät zu gewöhnen. Beugen Sie sich etwas über das Waschbecken und setzen Sie den Aufsatz an Ihre Zähne. Halten Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken abfließen kann.
4. Drücken Sie dann auf die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten. Richten Sie den Wasserstrahl auf Ihre Zähne und insbesondere auf die Zahnzwischenräume. Massieren Sie anschließend Ihr Zahnfleisch.
5. Schalten Sie nach der Verwendung das Gerät aus, indem Sie erneut auf die Power-Taste drücken.

## NACH DEM GEBRAUCH

Öffnen Sie den Wassertank und leeren Sie das restliche Wasser aus. Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten und das restliche Wasser aus dem Gerät zu entfernen. Schalten Sie es anschließend aus und schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks. Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.



### **ACHTUNG!**

*Um Bakterienbildung zu vermeiden, achten Sie immer darauf, dass keine Wasserrückstände im Gerät verbleiben! Wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen, reinigen und trocknen Sie es sorgfältig, bevor Sie es verstauen.*

## REINIGUNG


Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen! Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel wie Essig oder Kalkentferner! Diese können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie auch kein kochendes Wasser. Die Wassertemperatur zur Reinigung darf 50 °C nicht übersteigen.

Entfernen Sie den Aufsatz vom Gerät, indem Sie auf die Aufsatz-Entriegelungstaste drücken. Spülen Sie den Aufsatz nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser. Verwenden Sie ggf. ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Tauschen Sie den Aufsatz alle 6 Monate gegen einen Neuen aus. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel. Halten Sie es nicht unter fließendes Wasser! Trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch. Ziehen Sie den Wassertank vom Gerät ab und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus. Achten Sie darauf, den Wassertank trocken zu halten, wenn sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

## PROBLEMLÖSUNGEN

- **Das Gerät funktioniert nicht.**
  1. Sie haben das Gerät eben erst gekauft. Laden Sie vor Gebrauch den Akku für mind. 8 Stunden auf.
  2. Sie haben das Gerät für mehr als 3 Monate nicht verwendet. Laden Sie den Akku für mind. 8 Stunden auf.
- **Das Gerät funktioniert nur für wenige Minuten, selbst nach dem Laden.**
  1. Der Akku hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Ersetzen Sie das Gerät.
  2. Sie haben das Gerät nicht lange genug geladen. Laden Sie das Gerät für mind. 8 Stunden auf.
- **Der Wasserdruck ist sehr gering.**

Der Aufsatz ist verschmutzt oder verbogen. Reinigen oder ersetzen Sie ihn.
- **Es kommt kein Wasser aus dem Gerät.**
  1. Der Tank ist leer. Füllen Sie ihn wieder auf.
  2. Sie neigen das Gerät im Gebrauch zu stark. Halten Sie es aufrecht.
  3. Die Ventilplatte ist leicht verformt. Füllen Sie etwas Wasser in die Aufsatz-Öffnung.

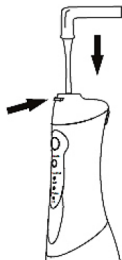

## TECHNISCHE DATEN

Ni-MH Akku	1.500 mAh
Ladezeit	Ca. 8 Stunden
Betriebsdauer	45 Minuten
Wassertank	180 ml
Wasserdruck	40 – 120 psi
Impulse	1.700 pro Minute
Abmessungen (B × H × T)	58 × 78 × 283 mm
Gewicht	ca. 215 g

**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350  
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202  
Importiert von:  
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
© REV2 / 03.09.2020 – EB//BS/FR//SK**



# MD-700

## Hydropulseur USB sans fil

*avec réservoir intégré, 1700 impulsions/min*

Mode d'emploi





# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouvel hydropulseur .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
Accessoire en option .....	4
<b>Consignes préalables.....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité .....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	9
Déclaration de conformité .....	9
<b>Description du produit .....</b>	<b>10</b>
<b>Mise en marche.....</b>	<b>11</b>
Chargement de la batterie .....	11
Remplir le réservoir d'eau .....	11
<b>Utilisation .....</b>	<b>12</b>
<b>Après l'utilisation .....</b>	<b>13</b>
<b>Nettoyage .....</b>	<b>13</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>14</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>15</b>

# VOTRE NOUVEL HYDROPULSEUR

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet hydropulseur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Contenu**

- Hydropulseur
- 2 buses
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Mode d'emploi

## **Accessoire en option**

8870 : Lot de 2 buses pour hydropulseur MD-700

(non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

## CONSIGNES PRÉALABLES

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un

coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Contient de petites pièces pouvant être avalées !
- L'appareil doit être fixé de manière à ce qu'il ne puisse tomber ni dans l'eau ni sur le sol.
- Veillez à ce que le tuyau d'aspiration situé à l'intérieur du réservoir d'eau ne soit ni plié ni tordu. Ne tirez pas sur le tuyau d'aspiration !
- Ne saisissez jamais l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.

- Conservez l'appareil hors de la portée et de la vue des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser l'appareil seulement s'ils sont surveillés par un adulte, et si l'entretien et le chargement de l'appareil sont effectués par un adulte.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires fournis.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur est endommagé.

- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation en tirant sur le câble. Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise électrique avec des mains mouillées. Cela peut entraîner un choc électrique.
- Maintenez le câble à distance des surfaces chaudes.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une buse.
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Ne versez pas de liquide pour bain de bouche dans le réservoir d'eau. Cela peut endommager l'appareil.
- Si des douleurs au niveau des dents ou des gencives apparaissent, cessez l'utilisation immédiatement. Adressez-vous alors à votre dentiste.
- N'appuyez pas la buse trop fort contre vos dents ou vos gencives. Risque de blessures !
- Si vous recevez des soins dentaires, demandez conseil à votre dentiste avant d'utiliser l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques



ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8870 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.




Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## DESCRIPTION DU PRODUIT

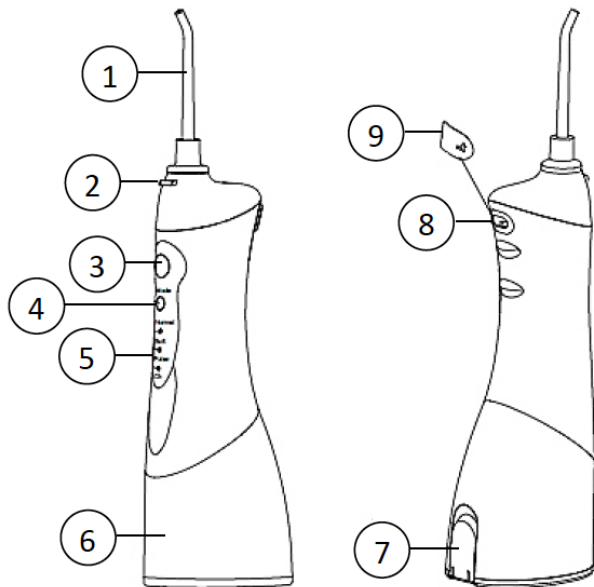

1. Buse
2. Bouton de déverrouillage de la buse
3. Touche Power
4. Touche Mode
5. LED de mode (Normal, Soft, Pulse/Ch)
6. Réservoir d'eau
7. Bouchon du réservoir d'eau
8. Port de chargement
9. Cache du port de chargement

# MISE EN MARCHÉ

## Chargement de la batterie

1. Veillez à ce que le réservoir d'eau soit vide et parfaitement sec.
2. Ouvrez le cache du port de chargement et branchez le câble USB au port de chargement de l'appareil. L'encoche située sur la fiche d'alimentation doit être orientée vers le bas.
3. Branchez l'autre extrémité du câble au port d'alimentation USB de l'adaptateur secteur.
4. Branchez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise électrique. Pendant le processus de chargement, la LED de mode la plus basse clignote en rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED brille en rouge en continu.
5. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et de l'appareil. Remplacez le cache sur le port de chargement.



### NOTE :

*Si la LED inférieure clignote pendant l'utilisation, cela signifie que le niveau de chargement de la batterie est faible. Rechargez alors l'appareil.*

## Remplir le réservoir d'eau

Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet, et refermez ensuite le capuchon. Veillez à ce que la température de l'eau ne dépasse pas 40 °C.

## UTILISATION



### NOTE :

*Notez qu'il est possible qu'un peu de liquide se trouve déjà dans le réservoir ou dans le tuyau d'aspiration avant la première utilisation. Il s'agit d'eau distillée qui a été utilisée pour tester l'appareil.*

1. Placez la buse choisie sur l'appareil. Veillez à ce qu'elle s'enclenche correctement.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour sélectionner le mode. La LED du mode correspondant brille en bleu :
  - "Normal" : nettoyage normal
  - "Soft" : nettoyage doux des dents et des gencives
  - "Pulse" : nettoyage et massage des gencives par un jet pulsé
3. Commencez avec le niveau le plus faible afin de vous habituer à l'appareil. Penchez-vous au-dessus du lavabo, et placez la buse contre vos dents. Ce faisant, maintenez la bouche légèrement ouverte, pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.
4. Appuyez maintenant sur la touche Power pour allumer l'appareil. Orientez le jet d'eau vers les dents et en particulier vers les espaces interdentaires. Terminez par un massage des gencives.
5. Après l'utilisation, éteignez l'appareil en appuyant à nouveau sur la touche Power.

## APRÈS L'UTILISATION

Ouvrez le réservoir d'eau et videz l'eau restante. Appuyez sur la touche Power afin d'allumer l'appareil et de faire sortir l'eau restante de l'appareil. Éteignez ensuite l'appareil et refermez le bouchon du réservoir d'eau. Séchez l'appareil avec un chiffon doux.



### **ATTENTION !**

*Afin d'éviter la formation de bactéries, veillez à ce qu'aucune eau résiduelle ne reste dans l'appareil ! Avant de laisser l'appareil inutilisé pendant une période prolongée, nettoyez-le et séchez-le soigneusement avant de le ranger.*

## NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Utilisez uniquement un produit nettoyant doux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs, comme du vinaigre ou du détartrant. Cela peut endommager l'appareil. N'utilisez pas non plus d'eau bouillante. La température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C.


Retirez la buse de l'appareil en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la buse. Après chaque utilisation, rincez la buse soigneusement sous l'eau courante. Pour le nettoyage, utilisez si besoin un chiffon humide. Remplacez la buse par une neuve tous les 6 mois.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux. Ne le placez jamais sous l'eau courante ! Séchez-le ensuite avec un chiffon doux. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil et rincez-le sous l'eau courante. Veillez à ce que le réservoir d'eau soit bien sec si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

## DÉPANNAGE

- **L'appareil ne fonctionne pas.**
  1. Vous venez d'acheter l'appareil. Chargez la batterie pendant au moins 8 heures avant l'utilisation.
  2. L'appareil est resté inutilisé pendant plus de 3 mois. Rechargez la batterie pendant au moins 8 heures.
- **L'appareil ne fonctionne que pendant quelques minutes, même après le chargement.**
  1. La batterie a atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez l'appareil.
  2. Vous n'avez pas rechargé l'appareil assez longtemps. Rechargez l'appareil pendant au moins 8 heures.
- **La pression de l'eau est très faible.**

La buse est sale ou déformée.  
Nettoyez-la ou remplacez-la.
- **Il n'y a pas de jet d'eau**
  1. Le réservoir est vide. Remplissez-le à nouveau.
  2. Vous inclinez trop fortement l'appareil pendant l'utilisation. Maintenez-le à l'horizontale.
  3. La plaque de la vanne est légèrement déformée. Versez un peu d'eau dans l'ouverture de la buse.

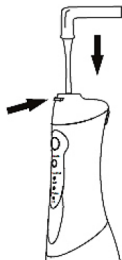

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie NiMH	1500 mAh
Durée du chargement	Env. 8 heures
Autonomie	Jusqu'à 45 minutes
Réservoir d'eau	180 ml
Pression hydraulique	de 40 à 120 psi
Impulsions	1700 par minute
Dimensions (L × H × P)	58 × 78 × 283 mm
Poids	435 g

**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350  
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202  
Importiert von:  
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
© REV2 / 03.09.2020 – EB//BS//FR//SK**