

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Akku-Munddusche, mit der Sie ganz einfach die Zahnzwischenräume reinigen und das Zahnfleisch massieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Akku-Munddusche optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- High-Power Akku-Munddusche
- USB-Ladegerät
- 2 x Aufsteckdüsen
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- Ersatzdüsen (NX-9148)

Technische Daten

Akku	1.500 mA/h
Ladezeit	5 bis 8 Stunden
Betriebszeit	50 Min. (aktive Laufzeit)
Kapazität Wasserbehälter	130 ml
Wasserdruck	10 bis 80 psi (0,6 bis 5,5 Bar), in 3 Stufen einstellbar

Produktdetails

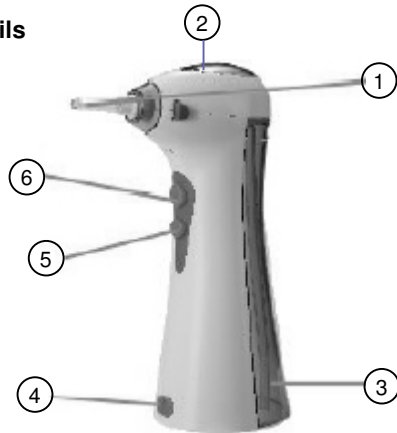

1. Düse
2. Wassereinlass
3. Wasserbehälter
4. USB-Anschluss

5. Wasserdruckregler
6. Ein/Aus-Taste

Akku aufladen

Stellen Sie die Munddusche auf eine ebene Fläche und verbinden Sie sie über das USB-Kabel mit dem USB-Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Laden Sie die Munddusche vor der ersten Verwendung für ca. 5 Stunden vollständig auf. Die rote Kontrollanzeige leuchtet während des Ladevorgangs. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die blaue Kontrollanzeige.

Laden Sie den Akku spätestens alle 3 Monate vollständig auf.

Munddusche verwenden

Reinigen Sie die Munddusche vor der ersten Verwendung, indem Sie den Wasserbehälter füllen, die Munddusche einschalten und das Wasser über das Handstück ins Waschbecken laufen lassen.

Die Zahnzwischenräume reinigen Sie mit dem Wasserstrahl der Munddusche, mit diesem können Sie auch das Zahnfleisch massieren.



HINWEIS:

Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, laden Sie den Akku vollständig auf.

Stecken Sie dazu eine der Aufsteckdüsen auf die Munddusche auf, sie muss in der Halterung leicht einrasten. Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und füllen Sie ihn mit warmem Wasser, in das Sie nach Wunsch eine Mundspüllösung (in der angegebenen Dosierung) geben können. Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters wieder

Beugen Sie den Oberkörper über das Waschbecken.

Setzen Sie die Aufsteckdüse an einem Zahnzwischenraum oder auf das Zahnfleisch auf und schließen den Mund wieder ein wenig. Schalten Sie die Munddusche durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein. Sie können über den Wasserdruckregler in drei Stufen die Stärke des Wasserstrahls einstellen.

Führen Sie die Munddusche von einem Zahnzwischenraum zum anderen bzw. über das Zahnfleisch.

Halten Sie dabei den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken abfließen kann.

Schalten Sie die Munddusche nach der Verwendung aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken, und leeren Sie den Wasserbehälter vollständig aus.

Die Munddusche schaltet sich automatisch nach 2 Minuten Betriebszeit aus.

Nehmen Sie die Aufsteckdüse ab, indem Sie die rote Entriegelungstaste gedrückt halten und die Aufsteckdüse nach vorne abziehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Achtung Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- Achtung Verletzungsgefahr! Spülen Sie mit der Munddusche nicht Ohren, Augen oder andere empfindliche Körperteile aus, dies könnte aufgrund des starken Wasserdrucks zu schweren Verletzungen führen.

- Mundduschen können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Mundduschen dürfen nur mit kaltem oder warmen Wasser benutzt werden oder speziellen Lösungen, wie sie in der Anleitung festgelegt sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9149 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9149 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet hydropulseur, qui permet d'effectuer un nettoyage des espaces interdentaires ainsi qu'un massage des gencives tout en douceur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Hydropulseur sans fil
- Chargeur USB
- 2 buses
- Mode d'emploi


Accessoires en option

Buses de rechange (disponibles sur www.pearl.fr sous la référence NX9148)

Caractéristiques techniques

Batterie	1500 mA/h
Temps de charge	De 5 à 8 heures
Autonomie	50 min (fonctionnement actif)
Capacité du réservoir d'eau	130 ml
Pression hydraulique	de 10 à 80 psi (0,6 à 5,5 bars) réglable sur 3 niveaux

Description du produit

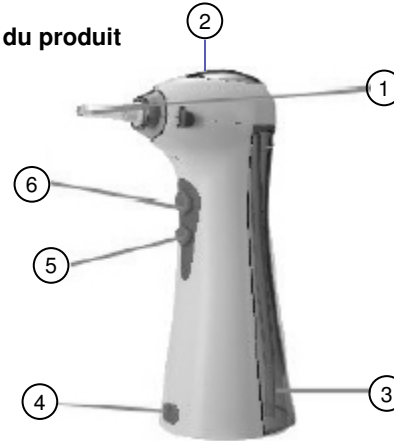

1. Buse
2. Entrée d'eau
3. Réservoir d'eau
4. Port USB
5. Touche de réglage de la pression de l'eau
6. Touche marche/arrêt

Chargement de la batterie

Placez l'hydropulseur sur une surface stable et plane, et branchez-le à un chargeur USB via le câble de chargement USB. Le processus de chargement démarre automatiquement.

Chargez l'hydropulseur totalement avant la première utilisation, pendant environ 5 heures. Le voyant de contrôle rouge brille pendant le processus de chargement. Lorsque le chargement est terminé, le voyant bleu s'allume.

Chargez la batterie complètement au minimum tous les 3 mois.

Utilisation de l'hydropulseur

Avant la première utilisation, nettoyez l'hydropulseur. Pour cela, remplissez le réservoir d'eau, allumez l'hydropulseur et faites passer l'eau par le manche en la laissant s'écouler dans le lavabo.



NOTE :

Chargez la batterie complètement lorsque la pression de l'eau est trop faible.

Le jet d'eau de l'hydropulseur permet de nettoyer les espaces interdentaires et de masser la gencive.

Pour cela, placez une des buses sur l'hydropulseur. Elle doit s'insérer facilement dans le support. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le avec de l'eau tiède, dans laquelle vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un bain de bouche (en respectant le dosage indiqué). Refermez le couvercle du réservoir d'eau.

Penchez-vous au-dessus du lavabo.

Placez la buse sur un espace interdENTAIRE ou sur la gencive, et refermez légèrement la bouche. Allumez l'hydropulseur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez régler la puissance du jet d'eau sur 3 niveaux à l'aide de la touche de réglage de la pression de l'eau.

Déplacez l'hydropulseur d'un espace interdENTAIRE à l'autre ou sur la gencive.

Ce faisant, maintenez la bouche légèrement ouverte, pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.

Après utilisation, éteignez l'hydropulseur en appuyant à nouveau sur la touche Marche/Arrêt, puis videz complètement le réservoir d'eau.

L'hydropulseur s'arrête automatiquement après 2 minutes d'utilisation.

Retirez la buse. Pour cela, maintenez appuyé le bouton de déverrouillage (de couleur rouge) et tirez la buse vers l'avant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Attention : risque de choc électrique !
- Ne débranchez jamais l'adaptateur secteur en le tirant par le câble.
- Attention, risque de blessure ! N'utilisez pas l'hydropulseur sur les oreilles, les yeux ou d'autres parties du corps sensible. En raison de la forte pression de l'eau, cela pourrait entraîner de graves blessures.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites que si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et si elles ont compris les dangers liés à cette utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants de 8 ans et moins.

- Les hydropulseurs ne doivent être utilisés qu'avec de l'eau froide ou tiède, ou avec des lotions spécialement conçues en se conformant au mode d'emploi de celles-ci.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9149 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.08.2016