

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Vibrations-Massagegeräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Massagegerät optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Massagegerät
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x Batterien Typ AAA / Micro (z.B. PX-1594)

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterien Typ AAA / Micro, 1,5 V
Maße (ØxH)	100 x 95 mm
Gewicht	165 g

Batterien einlegen

Schrauben Sie die obere Hälfte des Geräts ab, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie das Band flach ins Fach hinein und setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die im Batteriefach angegebene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Um die Batterien leichter zu entfernen, ziehen Sie am Band.

Verwendung

Drücken Sie auf die Taste oben am Gerät, um es ein bzw. auszuschalten. Führen Sie das Gerät über die Verspannung an Armen, Beinen, Schultern, Nacken oder Rücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9299-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9299 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) finden Sie auf der Internetseite: www.newgen-medicals.de.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini appareil de massage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini appareil de massage
- Mode d'emploi

Accessoires requis : 3 piles AAA (Micro)
(non fournies, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles de type AAA / Micro, 1,5 V
Dimensions (Ø x H)	100 x 95 mm
Poids	165 g

Mise en place des piles

Dévissez la moitié supérieure de l'appareil pour ouvrir le compartiment à piles. Placez la bande à plat au fond du compartiment et insérez les piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles. Tirez sur la bande pour retirer les piles plus facilement.

Utilisation

Appuyez sur la touche située en haut de l'appareil

pour l'allumer ou l'éteindre. Les LED s'allument. Faites rouler l'appareil sur les zones tendues telles que les bras, les jambes, les épaules, le cou ou le dos.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

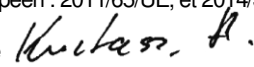
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9299 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.