

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Reflexzonen-Massage-Rings. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit und gute Handhabung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Reflexzonen-Massage-Ring optimal nutzen können.

Allgemeines

Dies ist kein „normaler“ Ring, den Sie wie ein Schmuckstück tragen können, sondern ein Reflexzonen-Massage-Ring, der die Durchblutung der Finger fördern soll. Sie müssen ihn ständig in Bewegung halten, wenn Sie ihn über den Finger gerollt haben. Andernfalls laufen Sie Gefahr, einen gegenteiligen Effekt zu erzielen: Das Blut im Finger würde abgeschnürt, wenn er längere Zeit an derselben Stelle getragen würde, ohne bewegt zu werden.


Funktionsweise

Mit unseren Händen und Fingern erledigen wir die wichtigsten Arbeiten; von hunderten von alltäglichen Handgriffen übers Schreiben, Tippen und SMS-Verfassen bis hin zu Haushalt, Gartenarbeit oder Klavierspiel.

Der Reflexzonen-Massage-Ring fördert die Durchblutung der Finger und stimuliert die Reflexzonen an den Fingern. So lassen sich ggf. Schmerzen an Fingern bzw. Fingergelenken lindern, „eingeschlafene“ Finger reaktivieren und durch monotone Bewegungsabläufe ermüdete Finger anregen.

Anwendung

Stecken Sie den Reflexzonen-Massage-Ring über den gewünschten Finger, und halten Sie ihn dann ständig in Bewegung, indem Sie ihn sanft über den Finger rollen lassen. Die empfohlene Anwendungsdauer liegt bei zwei Minuten pro Finger.

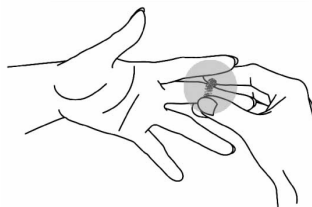

Pflege/Reinigung

Es genügt, wenn Sie den Ring bei Bedarf kurz in sauberes Wasser tauchen, in das Sie einen Tropfen mildes Spülmittel geben. Reiben Sie den Schmutz dann vorsichtig ab.

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie den Ring nicht, wenn Sie krank sind oder sich nicht wohl fühlen.
- Benutzen Sie den Ring nicht an Fingern mit Wunden oder Verletzungen.
- Der Reflexzonen-Massage-Ring ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.

- Verwenden Sie den Ring nur an Fingern und nicht an anderen Körperteilen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!