



## Elektro-Akupunkturgerät

### Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Elektro-Akupunkturgerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

#### Allgemeines

Das Elektro-Akupunkturgerät ist ein einfach zu bedienendes Gerät zur symptomatischen Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen. Die entsprechenden Körperpartien werden durch Elektroimpulse stimuliert. Sie können das Akupunkturgerät zum Beispiel an Rücken, Schultern, Knien und Hals einsetzen. Beachten Sie bitte, dass dieses Gerät keine medizinische Heilmethode darstellt und die ärztliche Behandlung nicht ersetzen kann.

Das Akupunktur-Verfahren wird bereits seit Tausenden von Jahren angewandt, um Krankheiten und Schmerzen durch Punktieren der entsprechenden Akupunkturpunkte zu behandeln. In der traditionellen Akupunktur sind diese über 700 Punkte entlang der so genannten Meridiane angeordnet. Nach Meinung der Anhänger der traditionellen chinesischen Medizin wird durch das Punktieren der Fluss des "Qi" (bedeutet Lebensenergie) beeinflusst. Die für das jeweilige Krankheitsbild oder die jeweiligen Beschwerden relevanten Punkte müssen in der Regel von einem Fachmann lokalisiert werden. Der breite Kopf des Elektro-Akupunkturgerätes mit seinen 36 vergoldeten Pulsnadeln erleichtert es Ihnen, auch ohne Fachkenntnisse die entsprechenden Punkte zu stimulieren.

#### Einlegen / Wechsel der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel nach unten – vom Gerät weg – schieben.
2. (Entnehmen Sie ggf. die alte Batterie). Legen Sie einen 9-Volt-Block ein. Achten Sie auf korrekte Polarität.
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder nach oben, bis er hörbar einrastet.

Wenn die Batterie korrekt eingelegt wurde, geht die LED an, sobald Sie das Gerät einschalten.

## Warnhinweise

Es gibt verschiedene Gruppen von Menschen, bei denen manche Ärzte von einer Akupunkturbehandlung abraten, zum Beispiel:

- Menschen mit Erkrankungen der Haut (Ekzeme, Nesselsucht, Dermatitis etc. an den lokal betroffenen Stellen)
- Menschen mit bestimmten Nervenkrankheiten und Sensibilitätsstörungen der Haut (zum Beispiel Polyneuropathien mit eingeschränktem Schmerzempfinden an den lokal betroffenen Stellen)
- Menschen mit Herzschrittmacher (dürfen nicht elektro-akupunktiert werden, weil der elektrische Strom das Gerät irritieren könnte)
- Menschen mit geistiger Behinderung und oder schweren psychischen Störungen (zum Beispiel Schizophrenie, Manie, Wahn)
- Epileptiker (die Elektro-Akupunktur darf bei Epileptikern nicht angewandt werden, weil der elektrische Strom epileptische Anfälle auslösen könnte)
- Menschen mit schweren ansteckenden Krankheiten (beispielsweise Tuberkulose)
- Menschen mit bestimmten Tumorarten
- Menschen mit einem schlechten Allgemeinzustand
- Babys und kleine Kinder

Menschen mit niedrigem Blutdruck bzw. Kollapsneigung sollten während der Akupunkturbehandlung liegen und sich danach eine Weile ausruhen.

## Anwendung

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie am Drehknopf (an der Seite des Gerätes) drehen. Stellen Sie die gewünschte Intensität des Elektroimpulses ein. Die LED blinkt abhängig von der eingestellten Intensität.
2. Führen Sie das Gerät an die gewünschte Stelle am Körper.
3. Drehen Sie den Drehknopf nur so weit, bis ein für Sie angenehmes Kribbeln hervorgerufen wird.
4. Stimulieren Sie die Körperpartie etwa 5 Minuten lang. Achten Sie darauf, dass Sie das Elektro-Akupunkturgerät nicht zu fest an den Körper drücken. Dies könnte sonst Entzündungen verursachen.  
**ACHTUNG:** Wenn Sie das Gerät auf höchster Stufe verwenden, führen Sie bitte nur kreisförmige Bewegungen aus.
5. Sofern Sie das Elektro-Akupunkturgerät gleich beim Auftreten der ersten Symptome einsetzen, sollten diese in der Regel wieder verschwinden. Bei langwierigen Erkrankungen oder chronischen Schmerzen können bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die Elektro-Akupunktur wiederholt angewandt und die Anwendungsdauer graduell gesteigert wird.

**Hinweis:** Eine leichte Hautrötung kann unmittelbar nach der Anwendung an den betreffenden Stellen auftreten. Diese verschwindet in der Regel nach kurzer Zeit wieder.

## Anwendungsbeispiele


### ➤ Rücken

Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den markierten Stellen an, um diese zu stimulieren.



### ➤ Ellenbogen

Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den markierten Stellen an und führen Sie kreisförmige Bewegungen aus, um diese zu stimulieren.

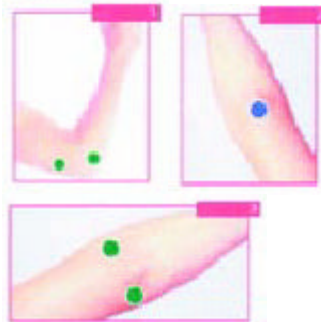

### ➤ **Schulter**

Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den markierten Stellen an und führen Sie kreisförmige Bewegungen aus, um diese zu stimulieren.



### ➤ **Knie**

Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den markierten Stellen an und führen Sie kreisförmige Bewegungen aus, um diese zu stimulieren.



## **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

### **Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:**

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber



## **Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





## Appareil d'acupuncture électrique

### Mode d'emploi

Chère cliente,  
Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

#### Généralités

Cet appareil d'acupuncture électrique vous permet de soulager vos douleurs à niveau des muscles et des articulations. Les parties concernées sont stimulées par des impulsions électriques. Vous pouvez l'appliquer aux épaules, au dos, aux genoux et à la nuque. Cet appareil ne soigne pas et ne remplace aucun traitement médical.

La large tête de l'appareil avec ses 36 points dorés vous permet de toucher le point voulu sans connaissance préalable.

#### Insertion/ Changement des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles en glissant le couvercle vers le bas.
2. (Retirez si nécessaire l'ancienne pile). Insérez une pile 9 volts. Vérifiez la bonne polarité.
3. Réinsérez le couvercle du compartiment à pile.

La LED s'allume lorsque vous allumez l'appareil.

## Avertissements

Certains médecins déconseillent l'utilisation de l'acupuncture à différents groupes de personnes, tels que:

- Les personnes à maladies de peau (eczéma, urticaire, dermatite sur les parties concernées par le traitement)
- Les personnes avec certaines maladies nerveuses et des dérèglements sensitifs de la peau (par exemple polyneuropathie sur les parties concernées par le traitement)
- Les personnes ayant un Pacemaker (les pulsions électriques de l'appareil peuvent dérégler le Pacemaker)
- Les personnes ayant des problèmes mentaux et/ou qui ont des troubles psychiques (par exemple schizophrénie, TOC, folie)
- Les personnes épileptiques (les pulsions électriques peuvent déclencher des crises d'épilepsie)
- Les personnes à maladies contagieuses (par exemple tuberculose)
- Les personnes avec certaines tumeurs
- Les personnes avec un mauvais état de santé
- Les bébés et les enfants

Les personnes avec des faiblesses de tension doivent utiliser l'appareil en étant couché et doivent se reposer après son utilisation.

## Utilisation

1. Tournez le bouton sur le côté pour allumer l'appareil. Réglez l'intensité souhaitée. La LED clignote suivant l'intensité réglée.
2. Amenez l'appareil vers la partie de votre corps souhaitée.
3. Vous devez ressentir des chatouillements agréables et supportables.
4. Stimulez la partie 5 minutes. N'appuyez pas trop fort sur votre peau. Vous risquez sinon d'être irrité.  
**ATTENTION:** Faites des mouvements circulaires si vous utilisez l'intensité la plus élevée.
5. En utilisant l'appareil dès l'apparition de la douleur vous augmentez les chances de résorption. Pour des douleurs prolongées, veuillez répéter l'utilisation de l'appareil ainsi qu'augmenter la durée.

**Remarque:** Des petites rougeurs peuvent apparaître juste après l'utilisation. Celles-ci disparaissent peu après.

## Exemples d'utilisation


### ➤ Dos

Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous pour les stimuler.



### ➤ Coudes

Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous pour les stimuler et faites des mouvements circulaires.

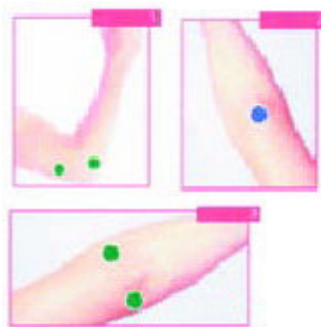

### ➤ **Epaule**

Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous pour les stimuler et faites des mouvements circulaires.



### ➤ **Genoux**

Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous pour les stimuler et faites des mouvements circulaires.



### Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.



Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

**Pb:** la pile contient du plomb

**Cd:** la pile contient du Cadmium

**Hg:** la pile contient du mercure

### Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

