



Augenmassage-Gerät



Bedienungsanleitung

PE-2931





Augenmassage-Gerät

**Appareil de massage
pour les yeux**




Anwendungsgebiete

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Augenmassage-Gerätes. Newgen medicals steht für Wohlfühlen, Wellness und Wohlergehen. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Augenmassage-Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Seit der Entwicklung der modernen Wissenschaft von Biomagnetismus haben viele Studien gezeigt, dass Magnetfelder einen großen Einfluss auf alle Teile des Menschlichen Körpers und sein Nervensystem haben können. Magnetische Felder können, wenn Sie an speziellen Akupunkturpunkten angebracht werden, Zellfunktionen aktivieren, die Blutgefäße erweitern und die Sauerstoffzufuhr erhöhen und vieles mehr.

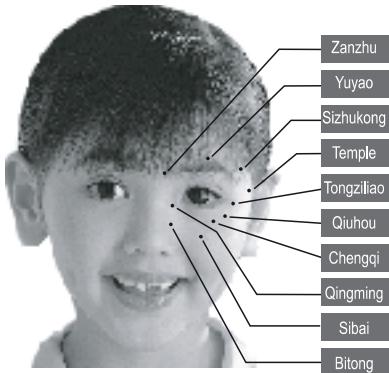

Ansprache von Akupunkturpunkten

Die Massagenoppen sprechen die nebenstehend genannten Akupunkturpunkte direkt an und können so zu Beruhigung und allgemeinem Wohlbefinden beitragen.

Für folgende Personen empfiehlt sich die Verwendung des Augenmassage-Gerätes

- Schüler, Studenten und andere Personen, die unter Augenermüdung durch Autofahren, Arbeit mit Büchern oder am Computer oder durch ständiges - Tragen einer Brille leiden
- Menschen, die unter Altersweitsichtigkeit leiden
- Menschen, deren Augen bei Wind tränen
- Menschen mit Augen- und Kopfschmerzen und Schlafstörungen



Theoretische Grundlagen

"Augenpflege"

Verwenden Sie das Augenmassage-Gerät drei mal täglich, und drei bis fünf Minuten pro Anwendung. Dadurch wird die Blutzirkulation an den Augen verstärkt und die optischen Nerven werden stimuliert. Das kann für bessere Sehkraft und allgemein für bessere Befindlichkeit in Kopf und Augen sorgen.



Produktdetails

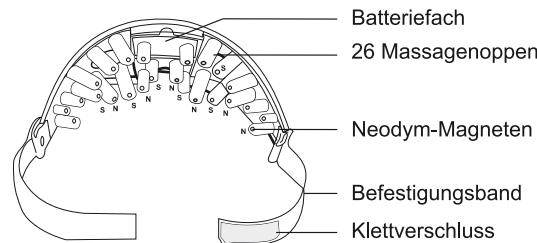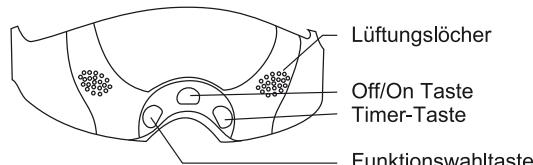


Anwendung

Wichtige Hinweise vorab

- Nehmen Sie vor der Augenmassage Ihre Kontaktlinsen heraus.
- Halten Sie die Massage-Noppen immer sauber. Wenn sie verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.

Inbetriebnahme

1. Drücken Sie die Taste "off/on", nachdem Sie die Batterien eingelegt haben. Das Augenmassage-Gerät schaltet sich dadurch ein und läuft durch die Funktionsmodi 1 bis 9 und beginnt dann wieder von vorn.
2. Drücken Sie die Taste "off/on" erneut, um das Augenmassage-Gerät wieder auszuschalten.
3. Drücken Sie während des Betriebes die Taste "mode", um damit manuell den Funktionsmodus umzuschalten. Die neun verschiedenen Funktionsmodi sind:
 - 1 starke Massage
 - 2 mittelstarke Massage
 - 3 sanfte Massage
 - 4 Kneten
 - 5 sanftes Kneten
 - 6 mittelstarkes Kneten
 - 7 starke Klopfmassage
 - 8 sanfte Klopfmassage
 - 9 mittelstarke Klopfmassage
4. Drücken Sie die Taste "Timer", um die Massagezeit auf 3 Minuten oder 5 Minuten zu begrenzen.

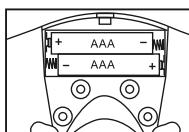

Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie in das Batteriefach zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Neodym-Magnet



Wenn der in die Noppen integrierte Neodym-Magnet herausfallen sollte, setzen sie ihn einfach wieder ein (wie im Bild gezeigt). Schalten Sie das Augenmassage-Gerät aber vorher aus.

Problembehebung

Nach der Verwendung

1. Nehmen Sie das Augenmassage-Gerät ab.
2. Reinigen Sie die Noppen und die Magneten mit einem Tuch.
3. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Mögliche Problem	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschläge
Augenmassagegerät schaltet sich nicht ein oder schaltet sich aus	<ul style="list-style-type: none">• Batterien sind aufgebraucht• Batterien sind falsch eingelegt	<ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie neue Batterien ein• Setzen Sie die Batterien in der richtigen Polarität ein
Funktionsmodus kann nicht geändert werden	<ul style="list-style-type: none">• Batterien sind aufgebraucht• Funktionswahltaste wurde nicht richtig gedrückt	<ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie neue Batterien ein• Drücken Sie die Funktionswahltaste noch einmal
Die Vibrationen sind schwach	Batterien sind aufgebraucht	Setzen Sie neue Batterien ein
Behandlungszeit (Timer) kann nicht eingestellt werden	Timer-Taste wurde nicht richtig gedrückt	Versuchen Sie es noch einmal
Bei der Behandlung treten Schmerzen auf	<ul style="list-style-type: none">• Behandlungszeit war zu lang• Kopfband wurde zu eng befestigt• Neodym-Magnet hat sich gelöst	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie niemals eine zu lange Behandlungszeit• Stellen Sie das Kopfband passend ein• Setzen Sie den Neodym-Magneten wieder ein
Massagenoppen ändern im Laufe der Zeit ihre Farbe	<ul style="list-style-type: none">• Noppen wurden nicht regelmäßig gereinigt• Noppen wurden mit Kosmetika verunreinigt	Reinigen Sie die Noppen nach jeder Anwendung mit einem feuchten Tuch

Wichtige Hinweise

Verwenden Sie das Augenmassage-Gerät nicht, wenn:

- Ihre Augen verletzt sind oder brennen,
- Sie eine Wunde am Kopf haben,
- Sie kürzlich eine Augenoperation hatten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Umgang. Beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Konsultieren Sie im Zweifelsfall vor der Anwendung immer einen Arzt, besonders aber wenn Sie unter starker Kurzsichtigkeit leiden.
- Kinder unter 10 Jahren dürfen das Augenmassage-Gerät nicht benutzen.
- Setzen oder legen Sie sich an einen ruhigen Ort, wenn Sie das Gerät benutzen. Laufen Sie dabei nicht herum.
- Benutzen Sie das Augenmassage-Gerät nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung.
- Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.



Appareil de massage pour les yeux



Mode d'emploi


PE-2931

Utilisation

Chère cliente, Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation. Newgen medicals innove sans cesse pour votre bien-être au quotidien. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Avec l'évolution de la médecine moderne et la découverte du biomagnétisme, plusieurs études ont prouvé que les champs magnétiques ont une grande influence sur toutes les parties du corps humain ainsi que sur le système nerveux. Si les champs magnétiques sont dirigés sur des points d'acupuncture spécifiques, ils activent les fonctions cellulaires, dilatent les vaisseaux sanguins, améliorent l'oxygénéation et bien plus encore.

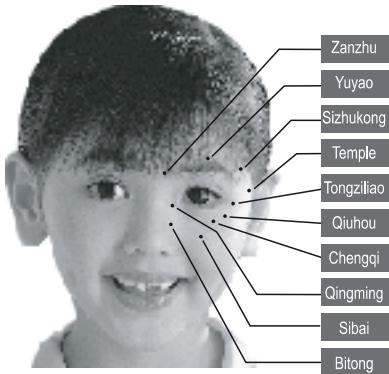

Positionnement des points d'acupuncture

Text rechts neben dem Bild, statt detaillierter Krankheitsbilder

Les parties magnétiques massantes correspondent aux points d'acupuncture ci-contre et peuvent ainsi contribuer à un apaisement et un bien-être général.

L'utilisation de l'appareil de massage est conseillée pour les personnes suivantes:

- Ecoliers, étudiants et autres personnes souffrant de fatigue oculaire due à la lecture, la conduite en voiture, une utilisation prolongée de l'ordinateur ou au port des lunettes.
- Personnes souffrant de problèmes liés à l'âge
- Personnes dont les yeux plurent dans le vent
- Personnes souffrant de maux de tête ou de troubles du sommeil



Bases théoriques

"Soin des yeux"

Utilisez l'appareil de massage trois fois par jours de 3 à 5 minutes par séance. La circulation sanguine près des yeux est ainsi améliorée et les nerfs optiques stimulés. Ceci peut améliorer vos capacités visuelles générales pour une meilleure perception.



Description du produit

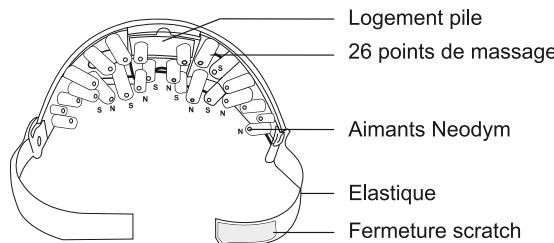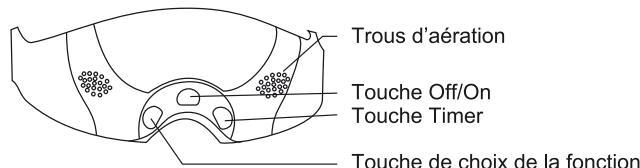


Utilisation

Note préalable

- Retirez vos lentilles de contact avant utilisation de l'appareil de massage.
- Maintenez toujours les parties magnétiques massantes bien propres en les nettoyant avec un chiffon humide si nécessaire.

Mise en route

1. Pressez la touche "off/on" après avoir inséré les piles. L'appareil de massage s'allume et enchaîne les modes de fonctionnement 1 à 9 puis recommence le cycle.
2. Pressez la touche "off/on" à nouveau pour éteindre l'appareil de massage.
3. Pendant utilisation, pressez la touche "mode" pour modifier manuellement le mode de fonctionnement. Les neuf modes de massage sont:
 - 1 Massage fort
 - 2 Massage moyen
 - 3 Massage doux
 - 4 Pincement
 - 5 Pincement doux
 - 6 Pincement moyen
 - 7 Pressions fortes
 - 8 Pressions douces
 - 9 Pressions moyennes
4. Pressez la touche "Timer" pour limiter le temps de massage à 3 ou 5 minutes.

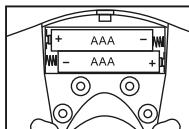

Ouvrez le logement pile. Insérez deux piles de type AAA. Assurez-vous de respecter la polarité puis refermez le couvercle.

Aimant Néodyme



Si l'aimant Néodyme intégré à une partie massante venait à tomber, replacez-le simplement (comme indiqué sur l'image). Eteignez d'abord l'appareil de massage.

Dépannage

Après utilisation

1. Retirez l'appareil de massage.
2. Nettoyez les points de massages et les aimants avec un chiffon humide.
3. Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
4. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.

Incident	Cause possible	Solution proposée
L'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint plus	<ul style="list-style-type: none">• Les piles sont usées• Les piles sont mal installées	<ul style="list-style-type: none">• insérez les nouvelles piles• Placez les piles dans le bon sens
Impossible de modifier le mode de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Les piles sont usées• Mauvaise pression sur la touche de choix de la fonction	<ul style="list-style-type: none">• Insérez de nouvelles piles• Pressez à nouveau la touche de choix de la fonction
Les vibrations sont faibles	Les piles sont usées	Insérez de nouvelles piles
Impossible de régler temps de marche (Timer)	Mauvaise pression sur la touche Timer	Pressez à nouveau la touche Timer
Des douleurs apparaissent pendant l'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Le temps d'utilisation était trop long• L'élastique est trop serré• L'aimant Neodyme est tombé	<ul style="list-style-type: none">• Respectez les temps d'utilisation• Réglez l'élastique à votre taille• Replacez l'aimant
Les points de massage ont changé de couleur avec le temps	<ul style="list-style-type: none">• Ils n'ont pas été correctement nettoyés• Les points de massage ont été salis par des produits cosmétiques	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyez les points de massage avec un chiffon humide après chaque utilisation



Attention

N'utilisez pas l'appareil de massage:

- en cas de blessure ou de brûlure aux yeux
- en cas de blessure à la tête
- si vous avez subi une opération des yeux récemment

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas utiliser l'appareil.
- En cas de doute, consultez un médecin avant utilisation surtout si vous êtes fortement myope.
- Placez-vous dans un endroit calme lorsque vous utilisez l'appareil. Ne vous déplacez pas avec l'appareil sur la tête.
- N'utilisez pas l'appareil de massage plus de 20 minutes sans interruption.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.





