

Ultraschall-Zahnstein- und Plaque-Entferner

mit HD-Kamera und WLAN für App-Steuerung und Live-Bild

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Zahnstein- und Plaque-Entferner	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zum Akku	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme	9
Akku laden.....	9
Aufsatz montieren	9
Verwendung	9
App installieren	10
Zahnstein- und Plaque-Entferner mit App verbinden	10
Steuerseite des Zahnstein- und Plaque-Entferners	10
Reinigung	10
Datenschutz	10
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Zahnstein- und Plaque-Entferner

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Zahnstein- und Plaque-Entferners zur gründlichen Reinigung Ihrer Zähne. Dank Kamera, WLAN und App-Steuerung können Sie die Reinigung über Ihr Mobilgerät steuern und sogar live verfolgen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Zahnstein- und Plaque-Entferner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Zahnstein- und Plaque-Entferner
- 2 Aufsätze
- Handspiegel
- Werkzeug zum Aufsatzwechsel
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Zahnstein- und Plaque-Entferner und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ULOOK**.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Gerät erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats müssen Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Gerätes wenden.
- Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung der Zahnbürste Ihren Arzt.
- Bei Beschwerden oder Schmerzen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Das Gerät ist zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung von mehreren Patienten in einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik geeignet.
- Bitte vor der Benutzung des Gerätes Ihren Zahnarzt konsultieren, wenn
 - in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde,
 - nach Benutzung dieses Geräts übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt oder Zahnfleischbluten länger als eine Woche anhält,
 - bei Benutzung Zahnbürste Unbehagen oder Schmerzen auftreten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Zahnstein- und Plaque-Entferner, Zubehör und Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Zahnstein- und Plaque-Entferner ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Reinigen Sie das Handstück nicht im Geschirrspüler!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-5212-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5212 ein.



Produktdetails

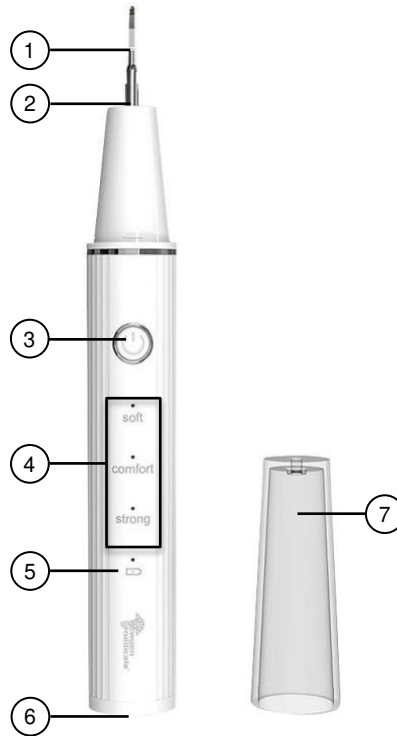

1. Reinigungsaufsatz
2. Kamera
3. Ein/Aus-Taste
4. Modus-LEDs

5. Akkustand-LED
6. Ladeanschluss
7. Schutzkappe


Inbetriebnahme

Akku laden

1. Ziehen Sie die Gummiabdeckung auf der Unterseite des Zahnstein- und Plaque-Entferners ab und stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel in den Ladeanschluss ein.
2. Stecken Sie dann das andere Ende des USB-Ladekabels in ein geeignetes USB-Netzteil und dieses dann in eine geeignete Steckdose ein. Die Akkustand-LED beginnt rot zu leuchten.
3. Trennen Sie das Netzteil aus der Steckdose und das USB-Ladekabel vom Zahnstein- und Plaque-Entferner, sobald die Akkustand-LED grün leuchtet und der Akku somit vollständig aufgeladen ist.
4. Drücken Sie die Gummiabdeckung wieder auf der Unterseite ein.

Aufsatz montieren

Ziehen Sie zuerst die Schutzkappe an. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall können Sie sich dann für einen spitzen oder flachen Aufsatz entscheiden. Schrauben Sie diesen im Uhrzeigersinn auf der Oberseite des Handstücks auf und drehen Sie ihn mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

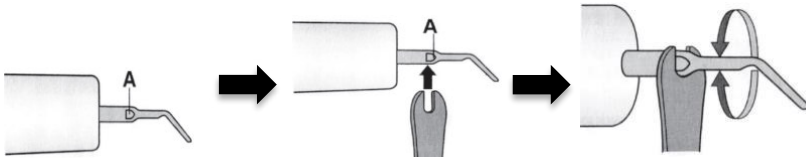

Um den Aufsatz zu wechseln, lockern Sie ihn durch Drehen mit dem mitgelieferten Werkzeug im Gegenuhrzeigersinn und drehen Sie ihn dann mit Ihrer Hand vollständig ab.



HINWEIS:

Um Beschädigungen am Handstück bzw. der Verschraubung zu vermeiden, achten Sie darauf, den Aufsatz nicht zu fest anzuziehen. Drehen Sie ihn daher nicht unter großer Kraftanstrengung fest!

Verwendung

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste zum Einschalten ca. 2 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie mehrfach kurz die Ein/Aus-Taste, um den Betriebs-Modus **Soft** (sanft), **Comfort** (mäßig) oder **Strong** (stark) auszuwählen.
3. Wenden Sie den Zahnstein- und Plaque-Entferner an den zu reinigenden Zähnen an.
4. Halten Sie nach dem Beenden der Zahnreinigung zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt.
5. Säubern Sie Aufsatz und Handstück (siehe unter Reinigung).



HINWEIS:

*Die Funktionen **Live-Bild** und **Aufnehmen** können erst nach dem Koppeln des Zahnstein- und Plaque-Entferners mit der App verwendet werden.*

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Zahnstein- und Plaque-Entferner und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ULOOK**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Zahnstein- und Plaque-Entferner mit App verbinden

1. Öffnen Sie die App und erlauben Sie gegebenenfalls geforderte Berechtigungen.
2. Tippen Sie in der App mittig des Bildschirms auf den ausgegrauten Start-Button. Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgerätes.
3. Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen das Netzwerk des Zahnstein- und Plaque-Entferners **TOOTH-CLEANER-FF372F** aus und wechseln Sie wieder zur App.
4. Tippen Sie in der App mittig des Bildschirms auf den jetzt roten Start-Button. Sie gelangen zur Steuerseite des Zahnstein- und Plaque-Entferners.

Steuerseite des Zahnstein- und Plaque-Entferners



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

- Mittig sehen Sie das Live-Bild.
- Tippen Sie auf **Zoom**, um die Ansicht zu wechseln.
- Tippen Sie auf **Snapshot**, um ein Live-Bild aufzunehmen.
- Tippen Sie auf **Record**, um ein Live-Video aufzunehmen bzw. die Aufnahme wieder zu beenden.




HINWEIS:

Die Aufnahmen dieser App finden Sie in der Foto- und Video-Galerie-App Ihres Mobilgerätes.

Reinigung

Befreien Sie Aufsatz und Handstück je mit einem sauberen und trockenen Tuch von eventuellen Verschmutzungen bzw. Feuchtigkeit und setzen Sie danach die Schutzkappe wieder auf.

Technische Daten

Stromversorgung		LiPO-Akku mit 3,7 Volt DC
Akkukapazität		500 mAh
Ladeanschluss		USB Typ C
Ladespannung		5 Volt DC
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.402 – 2.483 MHz
	Sendeleistung	max. 20 dBm
Schutzklasse Bildzeichen		
Schutzart		IPX6
Maße (Ø x H)		27 x 220 mm
Gewicht		90 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 21.03.2022 – GW//MF

Détartreur dentaire à ultrasons connecté

avec caméra HD

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau détartreur dentaire à ultrasons connecté	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant la batterie.....	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit.....	7
Mise en marche.....	8
Recharger la batterie	8
Fixer l'embout.....	8
Utilisation	8
Installer l'application.....	9
Connecter le détartreur dentaire à l'application	9
Page de commande du détartreur dentaire	9
Nettoyage.....	9
Caractéristiques techniques.....	10

Votre nouveau détartreur dentaire à ultrasons connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détartreur dentaire pour réaliser un nettoyage en profondeur de vos dents. Grâce à la caméra, à fonction wifi et au contrôle par application, vous pouvez contrôler le nettoyage via votre appareil mobile et même le suivre en direct.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détartreur dentaire
- 2 embouts
- Miroir de poche
- Outil pour changement d'embout
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre le détartreur dentaire et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ULOOK**.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- L'appareil est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre implant, il est impératif de consulter votre médecin ou le fabricant du dispositif implanté avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser la brosse à dents.
- En cas de gêne ou de douleur, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- L'appareil est conçu pour des soins bucco-dentaires individuels et ne convient pas à une utilisation par plusieurs patients dans un cabinet ou une clinique dentaire.
- Avant utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre dentiste :
 - si vous avez subi une intervention chirurgicale au niveau de vos dents ou de vos gencives au cours des deux derniers mois,
 - si un saignement excessif des gencives se produit après utilisation de cet appareil ou si le saignement des gencives dure plus d'une semaine
 - si vous ressentez une gêne ou une douleur lors de l'utilisation de la brosse à dents.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le détartreur dentaire, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Maintenez-les hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le détartreur dentaire ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Ne lavez pas le manche au lave-vaisselle !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-5212 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

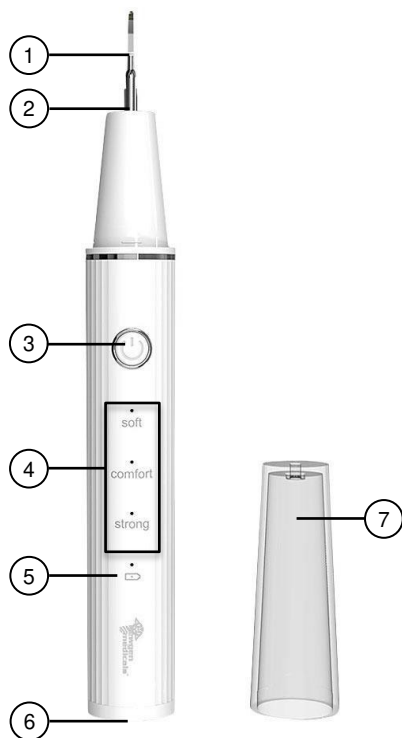

1. Embout de nettoyage
2. Caméra
3. Bouton Marche/Arrêt
4. LED de mode

5. LED de statut de la batterie
6. Port de chargement
7. Cache de protection


Mise en marche

Recharger la batterie

1. Retirez le cache en caoutchouc situé sous le détartreur dentaire, puis branchez une extrémité du câble de chargement USB fourni au port de chargement de l'appareil.
2. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de chargement USB à un adaptateur secteur USB approprié, puis branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée. La LED de statut de la batterie commence à clignoter en rouge.
3. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et débranchez le câble de chargement USB du détartreur dentaire lorsque la LED de statut de la batterie brille en vert et que la batterie est donc complètement rechargée.
4. Remettez le cache en caoutchouc sur le dessous de l'appareil.

Fixer l'embout

Retirez d'abord le cache de protection. En fonction de votre utilisation, vous pouvez opter pour un embout pointu ou plat. Vissez celui-ci sur le dessus du manche dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vissez-le fermement à l'aide de l'outil fourni.

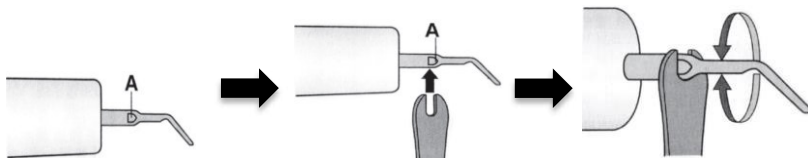

Pour changer d'embout, déverrouillez-le en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de l'outil fourni, puis dévissez-le complètement avec votre main.



NOTE :

Afin d'éviter d'endommager le manche ou le filetage, assurez-vous de ne pas visser trop fermement l'embout. Ne le vissez donc pas en forçant !

Utilisation

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant environ 2 secondes pour allumer l'appareil.
2. Appuyez brièvement de façon répétée sur le bouton Marche/Arrêt pour sélectionner le mode de fonctionnement **Soft** (doux), **Comfort** (moyen) ou **Strong** (fort).
3. Appliquez le détartreur dentaire sur les dents à nettoyer.
4. Après avoir terminé le brossage des dents, maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant environ 2 secondes pour éteindre l'appareil.
5. Nettoyez l'embout et le manche (voir Nettoyage).



NOTE :

*Les fonctions **Image en direct** et **Enregistrement** peuvent uniquement être utilisées lorsque le détartreur dentaire est apparié à l'application.*

Installer l'application

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre détartreur dentaire et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ULOOK**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS), puis installez-la sur votre appareil mobile.

Connecter le détartreur dentaire à l'application

1. Ouvrez l'application et accordez les autorisations requises, si nécessaire.
2. Dans l'application, appuyez au milieu de l'écran sur le bouton de démarrage grisé. Vous accédez aux réglages wifi de votre appareil mobile.
3. Dans les réglages wifi, sélectionnez le réseau du détartreur dentaire **TOOTH-CLEANER-FF372F**, puis revenez à l'application.
4. Dans l'application, appuyez au milieu de l'écran sur le bouton de démarrage rouge. Vous accédez à la page de commande du détartreur dentaire.

Page de commande du détartreur dentaire



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

- Vous pouvez visionner l'image en direct au milieu de l'écran.
- Appuyez sur **Zoom** pour changer de vue.
- Appuyez sur **Snapshot** pour enregistrer une image en direct.
- Appuyez sur **Record** pour enregistrer une vidéo en direct ou interrompre l'enregistrement.




NOTE :

Vous trouverez les enregistrements de cette application dans l'application de galerie photo et vidéo de votre appareil mobile.

Nettoyage

Retirez les éventuelles saletés ou l'humidité présente sur l'embout et le manche l'aide d'un chiffon propre et sec, puis remettez le cache de protection en place.

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-polymère 3,7 V DC
Capacité de la batterie		500 mAh
Port de chargement		USB-C
Tension de charge		5 V DC
Réseau Internet sans fil	Bande	2,4 GHz
	Fréquence radio	2402 – 2483 MHz
	Puissance d'émission	max. 20 dBm
Pictogramme de classe de protection		
Indice de protection		IPX6
Dimensions (Ø x H)		27 x 220 mm
Poids		90 g

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV1 – 21.03.2022 – GW//MF