

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Akku-Schallzahnbürste.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Akku-Schallzahnbürste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Zahnbürste
- 3x Aufsteckbürste
- USB-C-Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- ZX-8461: 10er-Set Aufsteckbürsten
- USB-Netzteil

Technische Daten

Input	5V DC 0,3A
Leistungsaufnahme	1,5 W
Li-Ion-Akku	3,7 V DC 700 mAh
Schwingungen pro Minute	40.000
Schutzart	IPX7
Maße	22,8 x 2,4 x 2,3 cm
Gewicht	114 g

Produktdetails

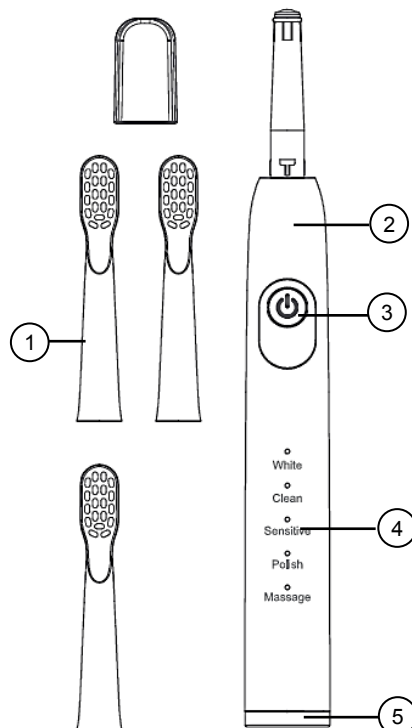

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Aufsteckbürste | 4. Status-LEDs |
| 2. Griff | 5. Ladebuchse |
| 3. Multifunktions-Taste | |

Gesundheitshinweise

- Benutzer, die zum ersten Mal eine elektrische Zahnbürste benutzen, können nach den ersten Anwendungen ein leichtes Taubheitsgefühl verspüren. Die Beschwerden sollten nach ein paar Tagen verschwinden. Wenn Sie danach immer noch Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.
- Wenn Sie in den letzten zwei Monaten eine Mund- oder Zahnfleischoperation hatten, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Wenn Sie nach wiederholter Anwendung Zahnfleischblutungen haben oder die Blutungen länger als 7 Tage anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.

Inbetriebnahme

Schallzahnbürste aufladen

- Laden Sie Ihre Schallzahnbürste vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie dazu das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-C-Buchse der Schallzahnbürste und einem geeigneten USB-Netzteil. Den Ladefortschritt lesen Sie über die Status-LEDs ab.
- Sobald die Schallzahnbürste vollständig aufgeladen ist, erlöschen die Status-LEDs. Trennen Sie das USB-Ladekabel von der USB-C-Buchse.

Anzahl LEDs	Ladestand
1 LED	<20%
2 LEDs	20-40%
3 LEDs	40-60%
4 LEDs	60-80%
5 LEDs	80-100%




HINWEIS:

Wenn die Akkukapazität nachlässt, blinken die Status-LEDs 10-mal, um darauf hinzuweisen, dass die Schallzahnbürste aufgeladen werden muss.

Aufsteckbürste wechseln

- Anbringen** Schieben Sie den Bürstenkopf nach unten Richtung A. Drehen Sie den Bürstenkopf im Uhrzeigersinn, bis A auf B trifft.
- Abnehmen** Drehen Sie den Bürstenkopf gegen den Uhrzeigersinn, bis A auf B trifft. Ziehen Sie ihn dann in Richtung 1 heraus.

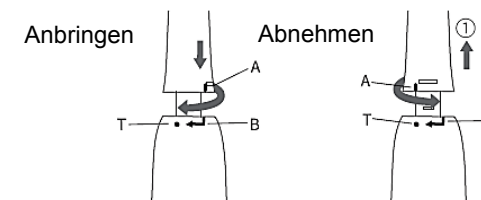

Verwendung

1. Befeuchten Sie die Borsten des Bürstenkopfes und tragen Sie eine angemessene Menge Zahnpasta auf.
2. Nehmen Sie die Schallzahnbürste in den Mund. Halten Sie die Multifunktions-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Schallzahnbürste einzuschalten.
3. Drücken Sie wiederholt die Multifunktions-Taste, um durch die verschiedenen Betriebs-Modi zu wechseln.



HINWEIS:

Die Zahnbürste schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Dieses Produkt kann nur die speziellen Zahnbürstenköpfe ZX-8461 verwenden.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8460-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8460 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour d'avoir choisi cette brosse à dents sonore.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse à dents
- 3 têtes de brosse
- Câble de chargement USB-C
- Mode d'emploi


Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- ZX8461 : 10 têtes de brossage dureté moyenne
- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC / 0,3 A
Puissance absorbée	1,5 W
Batterie lithium-ion	3,7 V DC / 700 mAh
Vibrations/minutes	40000
Indice de protection	IPX7
Dimensions	22,8 x 2,4 x 2,3 cm
Poids	114 g

Description du produit

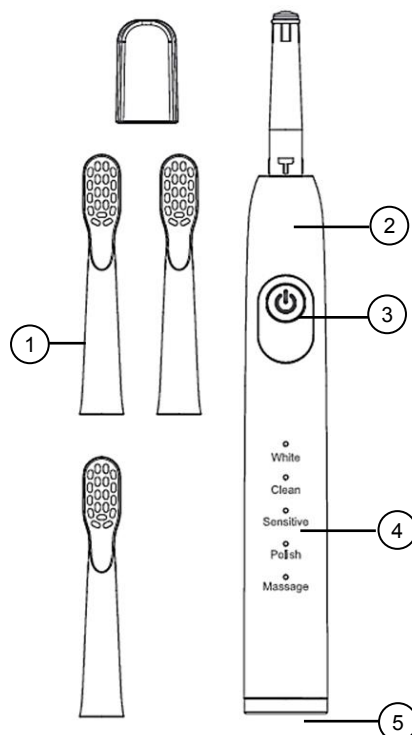

- 1. Têtes de brosse
- 2. Poignée
- 3. Touche Multifonction
- 4. LED de statut
- 5. Port de chargement

Consignes importantes pour la santé

- Les utilisateurs qui utilisent une brosse à dents électrique pour la première fois peuvent ressentir un léger engourdissement après les premières utilisations. Les symptômes devraient disparaître au bout de quelques jours. Si la gêne persiste, veuillez consulter votre dentiste.
- Si vous avez subi une chirurgie buccale ou gingivale au cours des deux derniers mois, veuillez consulter votre dentiste avant d'utiliser le produit.
- Si vous avez des saignements de gencives après une utilisation répétée ou si les saignements persistent pendant plus de 7 jours, veuillez consulter votre dentiste.

Mise en marche

Charger la brosse à dents

- Avant la première utilisation, rechargez complètement votre brosse à dents sonore. Pour ce faire, branchez le câble de chargement fourni à la prise USB-C de la brosse à dents et à un adaptateur secteur approprié. La progression du chargement est indiquée par les LED de chargement.
- Dès que la brosse à dents sonore est complètement chargée, les LED d'état s'éteignent. Débranchez le câble de chargement USB de la prise USB-C.

Nombre de LED	Niveau de charge
1 LED	< 20 %
2 LED	20 à 40 %
3 LED	40 à 60 %
4 LED	60 à 80 %
5 LED	80 à 100 %



NOTE :

Lorsque la capacité de la batterie diminue, les LED de statut clignotent 10 fois pour indiquer que la brosse à dents sonore doit être rechargée.


Changer les têtes de brosse

Installation

Poussez la tête de la brosse vers le bas en direction du A. Tournez la tête de la brosse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le A rejoigne le B.

Retirer l'obturateur de la caméra

Tournez la tête de la brosse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le A rejoigne le B. Retirez-le ensuite dans la direction 1.

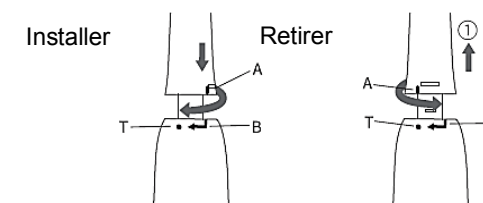

Utilisation

- Humidifiez les poils de la tête de brosse et appliquez une quantité appropriée de dentifrice.
- Mettez la brosse à dents sonore dans votre bouche. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant quelques secondes pour mettre la brosse à dents sonore en marche.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton multifonction pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre.



NOTE :

La brosse à dents s'éteint automatiquement après 2 minutes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ce produit ne peut utiliser que les têtes de brosse à dents spéciales ZX-8461.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie et son recyclage

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement de la batterie. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veuillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-8460, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

