

6in1-Körperanalysewaage

Mit Bluetooth 4.0 & iPhone- / Android-App

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Körperanalysewaage	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Inbetriebnahme	7
Batterien einsetzen.....	7
Aufstellort.....	7
App installieren.....	7
Verwendung	7
Ersteinrichtung.....	7
Wiegen	9
Baby-Modus	9
Zielgewicht.....	10
Gesundheitseinschätzung der aktuellen Messung aufrufen	11
Messergebnisse aufrufen	11
Ältere Messergebnisse aufrufen	12
Benutzer hinzufügen.....	12
Benutzer wechseln	13
Benutzerprofil bearbeiten.....	13
Benutzer löschen.....	13
App-Einstellungen	14
Gerät hinzufügen	14
Gerät löschen	15
Datenschutz.....	15
Technische Daten	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Körperanalysewaage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Körperanalysewaage mit Bluetooth. Mithilfe dieser innovativen Körperanalyse-Waage und der Analyse-App können Sie nicht nur Ihr Körpergewicht messen, sondern erhalten auch wertvolle Informationen über Ihren Körperfett- und Körperwasseranteil sowie über Ihre Muskel- und Knochenmasse

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Waage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Körperanalysewaage mit Bluetooth
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterie AAA (Micro)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Waage auf eine stabile, ebene Fläche, um die bestmögliche Präzision und Wiederholung zu ermöglichen.
- Wiegen Sie sich immer am selben Ort. Ein unebener Untergrund kann die Messungen beeinflussen.
- Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel (falls notwendig).
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und Hitzequellen.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- Lagern Sie die Waage in einer horizontalen Position.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- **WARNUNG:** Das Gerät lässt elektrischen Strom durch den Benutzer fließen, um Messungen durchzuführen. Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten verwendet werden. Lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8827-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Kurtasz, A.".

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8827 ein.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage und legen Sie drei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Aufstellort

Stellen Sie die Waage auf einen flachen, stabilen Untergrund.

App installieren


Per App haben Sie die Möglichkeit Messungen für mehrere Personen über einen längeren Zeitraum zu speichern und auswerten zu lassen. Hierfür empfehlen wir die kostenlose App **Fitbrick2** (Android) bzw. **FitBrick** (iOS). Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.




Verwendung

Ersteinrichtung


1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
2. Öffnen Sie die App.
3. Wählen Sie zutreffende Variante aus, **Fettwaage / Body Fat Scale**, indem Sie darauf tippen.

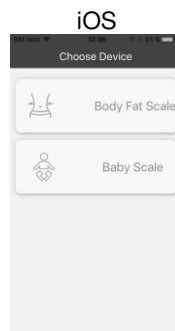

4. Stellen Sie sich auf Ihre Waage. Ihre Waage wird von der App erkannt.


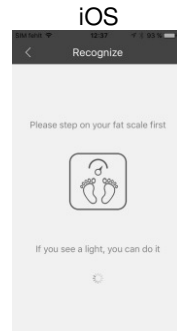


5. Tippen Sie auf den Pfeil neben Device Name, um den Namen der Waage in der App zu ändern. Geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **Bestätigen / Confirm**.

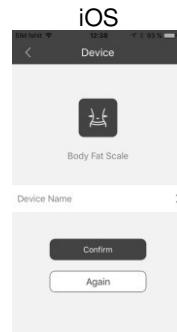



6. Tippen Sie unten auf **Bestätigen / Confirm**. Die Waage wird in ihrer App gespeichert.

7. Das Benutzerprofil wird geöffnet. Füllen Sie die Felder entsprechend aus.

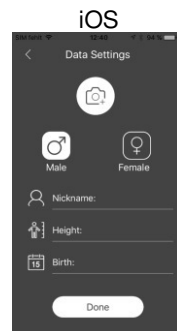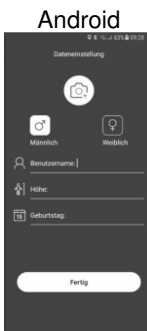

8. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie unten auf **Fertig / Done** tippen.

9. Tippen Sie sich durch die Kurzeinführung. Sie gelangen zur Hauptseite der App.

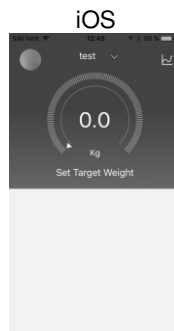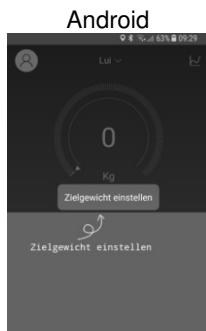

HINWEIS:

Sollte sich die App in der englischen Version öffnen, tippen Sie bitte nach der Einrichtung auf der Hauptseite der App links oben auf das Profilbild und anschließend auf **System Settings**. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Language** und dann auf die gewünschte Sprache (z.B. **German**). Die Einstellung wird sofort übernommen.

Wiegen



HINWEIS:

Ihr Mobilgerät sollte sich in der Nähe der Waage befinden, um den Datenaustausch über Bluetooth zu ermöglichen.

1. Stellen Sie sich auf die Waage.
2. Die Gewichtsanzeige auf dem Display blinkt drei Mal. Einige Sekunden später wird die Messung über Bluetooth an die App auf Ihrem Mobilgerät gesendet.
3. Das Messergebnis wird auf der Hauptseite der App angezeigt.



HINWEIS:

Das Display auf der Waage zeigt das gemessene Körpergewicht in kg an. Alle weiteren Daten lassen sich nur über die App abrufen.


Baby-Modus

Messen Sie ganz unkompliziert das Körpergewicht von Kleinkindern:

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie auf der Hauptseite der App links oben auf das Profilbild tippen oder von rechts nach links wischen.
2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Baby-Modus**.



3. Stellen Sie sich auf die Waage und warten Sie, bis die App die Gewichtsdaten empfangen hat.
4. Stellen Sie sich nun zusammen mit dem Kleinkind auf die Waage und warten Sie, bis die App die Gewichtsdaten empfangen hat.
5. Die App subtrahiert automatisch Ihr gemessenes Gewicht von dem danach gemessenen Gewicht, um das Gewicht des Kleinkindes zu berechnen.

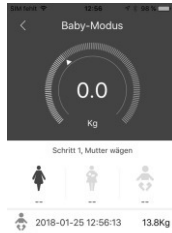


6. Verlassen Sie die Funktion, indem Sie oben auf den Pfeil nach links tippen.

Zielgewicht

Legen Sie in der App ein Zielgewicht fest, das Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erreichen möchten:

1. Wiegen Sie sich.
2. Tippen Sie auf der Hauptseite der App unterhalb der Gewichtsanzeige auf **Zielgewicht einstellen**. Die Zielgewichtseinstellungen werden geöffnet.
3. Stellen Sie das gewünschte Zielgewicht ein, indem Sie auf einen Punkt der Messlatte tippen und diese zur Seite ziehen, bis über dem Pfeil das gewünschte Zielgewicht angezeigt wird.

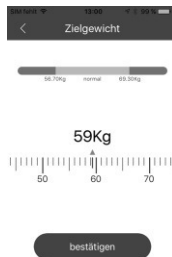

4. Tippen Sie unten auf **bestätigen**. Die Einstellung wird gespeichert.
5. Verlassen Sie die Zielgewichtseinstellungen, indem Sie oben auf den Pfeil nach links tippen.
6. Auf der Hauptseite wird nun grafisch im Halbkreis die aktuelle Differenz zum Zielgewicht angezeigt.

Gesundheitseinschätzung der aktuellen Messung aufrufen

So rufen Sie den Messbericht der aktuellen Messung auf:

1. Tippen Sie auf der Hauptseite der App links vom Halbkreis auf folgendes Symbol:



2. Der Messbericht wird geöffnet. Die Smileys zeigen an, an welchem Punkt der Gesundheits-Skala Sie sich befinden.



Messergebnisse aufrufen

Scrollen Sie auf der Hauptseite nach unten. Neben den entsprechenden Symbolen, werden die ermittelten Messergebnisse angezeigt.



Gewicht (kg/lb)



Knochen (kg/lb)



Körperfett (%)



BMI (Body Mass Index)



Wasser (%)



Grundumsatz (Kcal)



Muskel (%)



Viszeralfett



Standardgewicht



Gewichtskontrolle



Fettmasse



Fettfreie Masse



Physisches Alter

Ältere Messergebnisse aufrufen

So rufen Sie die Ergebnisse älterer Messungen auf:

1. Tippen Sie auf der Hauptseite der App rechts oben auf folgendes Symbol:



2. Wählen Sie zwischen der Wochen-, Monats- und Jahresanzeige, indem Sie oben auf den entsprechenden Begriff (**Woche / Monat / Jahr**) tippen.



HINWEIS:

Ein genaues Datum lässt sich über den Kalender einstellen. Rufen Sie diesen auf, indem Sie oben rechts auf das folgende Symbol tippen:



3. Tippen Sie unten auf das Symbol, dessen Messergebnisse Sie aufrufen möchten.

Benutzer hinzufügen

Richten Sie ein Benutzerkonto für jedes Familienmitglied ein:

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie oben links auf das Profilbild tippen oder von links nach rechts wischen.
2. Tippen Sie auf **Nutzerverwaltung**.



3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol:



4. Füllen Sie das Benutzerprofil des neuen Benutzers aus. Tippen Sie dann unten auf **Fertig**. Der Neue Benutzer wird in der Liste der Nutzerverwaltung angezeigt.

Benutzer wechseln

Der Wechsel zwischen Benutzerkonten ist spielend leicht:

1. Tippen Sie auf der Hauptseite der App oben auf den aktuellen Benutzernamen.
2. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Benutzer aus, indem Sie auf ihn tippen.



Benutzerprofil bearbeiten

Ihr Benutzerkonto lässt sich jederzeit bearbeiten:

1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, dessen Profil Sie bearbeiten möchten, der aktuelle Benutzer ist.
2. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie auf das Profilbild tippen oder von links nach rechts wischen.
3. Tippen Sie auf **Nutzerverwaltung**.



4. Tippen Sie auf den Benutzer, dessen Profil Sie bearbeiten möchten.
5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (z.B. wenn ein Kind gewachsen ist).
6. Tippen Sie unten auf **Änderun...bestätigen**.

Benutzer löschen

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie auf das Profilbild tippen oder von links nach rechts wischen.
2. Tippen Sie auf **Nutzerverwaltung**.



3. Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie löschen möchten, und wischen Sie nach links.
4. Tippen Sie auf **Löschen**. Der Benutzer wird aus der App entfernt.

App-Einstellungen

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie auf das Profilbild tippen oder von links nach rechts wischen.
2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen**.



3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor:

- **Thema-Farbe**

Tippen Sie auf die gewünschte Farbe. Die Einstellung wird sofort übernommen.

- **Zielgewicht**

Stellen Sie das gewünschte Zielgewicht ein, indem Sie auf einen Punkt der Messlatte tippen und diese zur Seite ziehen, bis über dem Pfeil das gewünschte Zielgewicht angezeigt wird.

- **Einheit einstellen**

Legen Sie fest, welche Messeinheiten in der App angezeigt werden sollen.



HINWEIS:

Das Gewicht auf der Waage wird immer in kg angegeben. Die Änderung der Messeinheit bezieht sich nur auf die in der App angezeigten Daten.

- **Sprachauswahl**

Stellen Sie die gewünschte Menüsprache ein.

- **Über uns**

Rufen Sie Informationen über die App auf.

Gerät hinzufügen

So fügen Sie eine weitere Waage der App hinzu:

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie auf das Profilbild tippen oder von links nach rechts wischen.
2. Tippen Sie auf **Geräteverwaltung**.



3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol:



4. Wählen Sie das Waage-Modell aus, indem Sie darauf tippen (**Fettwaage**).
5. Folgen Sie Schritt 3 bis 8 des Abschnittes **Ersteinrichtung**.

Gerät löschen

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie auf das Profilbild tippen oder von links nach rechts wischen.
2. Tippen Sie auf **Geräteverwaltung**.



3. Tippen Sie auf die Waage, die Sie aus der App entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **Gerät löschen**. Die Waage wird aus der App entfernt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		3x Batterie Typ AAA
Sensoren		Dehnmessstreifen
Maximalgewicht		180 kg / 396 lb
Gewichtseinheiten		kg / lb (in 100 g / 0,2 lb Schritten)
Messungen		Gewicht, Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Muskelmasse (in Prozent), Knochenmasse (in Prozent), BMI, BMR
Bluetooth	Version	4.0
	Frequenzbereich	2.402-2.480 MHz
	Max. Sendeleistung	1,92 mW
Maße		300,5 x 300,5 x 23,5 mm
Gewicht		1900 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV7 – 04.09.2018 – LZ/BS//BR

Pèse-personne connecté 6 en 1

à fonction bluetooth 4.0

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau pèse-personne.....	3
Contenu	3
Accessoires requis	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité.....	5
Mise en marche	6
Mise en place des piles	6
Lieu d'installation	6
Installer l'application	6
Utilisation.....	6
Première configuration	6
Pesée	8
Mode Bébé	8
Poids cible	9
Afficher le bilan de santé correspondant à la mesure	10
Afficher le résultat de la mesure	10
Afficher	11
Ajouter un utilisateur	11
Changer d'utilisateur.....	11
Modifier le profil de l'utilisateur.....	12
Supprimer l'utilisateur	12
Réglages de l'application.....	12
Ajouter un appareil	13
Supprimer l'appareil.....	13
Protection des données	14
Caractéristiques techniques	15

Votre nouveau pèse-personne

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pèse-personne.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pèse-personne à fonction bluetooth
- Mode d'emploi

Accessoires requis

3 piles AAA (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Placez le pèse personne sur une surface stable et plane afin d'obtenir une précision optimale ainsi qu'un bon retour.
- Pesez-vous toujours au même endroit. Un sol inégal peut influencer les mesures.
- Lavez le pèse-personne avec un chiffon humide, en utilisant un peu de liquide vaisselle si besoin.
- Protégez le pèse-personne des coups, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des fortes variations de températures, des champs électromagnétiques et des sources de chaleur.
- Tenez les éléments d'emballage hors de portée des enfants.
- Rangez le pèse-personne en position horizontale.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser le pèse-personne pendant un long moment.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : L'instrument diffuse un courant électrique à travers le corps de l'utilisateur pour effectuer des mesures. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté. Les femmes enceintes ou soupçonnant d'être enceintes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8827 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Mise en marche

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du pèse-personne et insérez trois piles AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.

Lieu d'installation

Placez le pèse-personne sur une surface plane et stable.

Installer l'application



L'application vous permet d'enregistrer et d'évaluer des mesures pour plusieurs personnes sur une longue période de temps. Nous vous recommandons l'application gratuite **Fitbrick2** (Android) ou **FitBrick** (iOS). Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Utilisation

Première configuration

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application.
3. Choisissez la variante **Graisse corporelle / Body Fat Scale** en appuyant dessus.

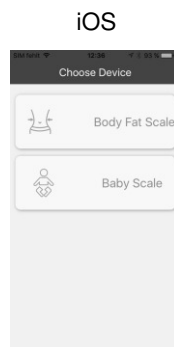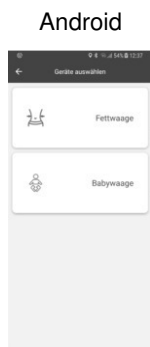


4. Placez-vous sur la balance. La balance est reconnue dans l'application.

Android




iOS

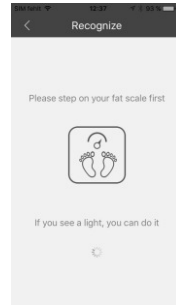


5. Appuyez sur la flèche à côté de Device Name (Nom de l'appareil) pour modifier le nom de la balance dans l'application. Entrez le nouveau nom et appuyez sur **Confirmer** / **Confirm**.

Android

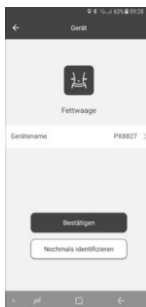


iOS

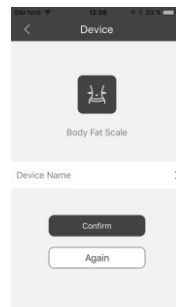


6. Appuyez en dessous sur **Confirmer** / **Confirm**. La balance est sauvegardée dans l'application.
7. Le profil utilisateur est ouvert. Remplissez les champs comme il convient.

Android

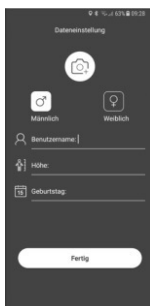


iOS

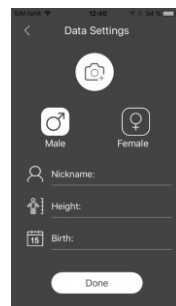


8. Enregistrez les réglages en cliquant en bas sur **Terminé** / **Done**.

- Appuyez pour passer l'introduction rapide. Vous accédez à la page principale de l'application.

Android

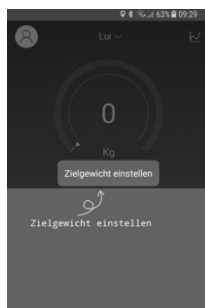

iOS

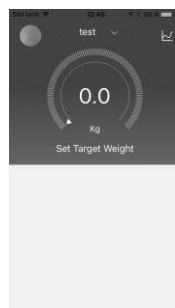**NOTE :**

*Si l'application s'ouvre en version anglaise, appuyez sur l'image de profil située dans le coin supérieur gauche de la page principale de l'application, puis sur **System Settings**. Appuyez sur le point de menu **Language** puis sur la langue souhaitée (p.ex. **French**). Le réglage est immédiatement enregistré.*

Pesée**NOTE :**

Pour le transfert de données via bluetooth, votre appareil mobile doit se trouver à proximité du pèse-personne.

- Montez sur le pèse-personne.
- L'affichage du poids clignote trois fois sur l'écran. Au bout de quelques secondes, les mesures sont transmises sur l'application de votre appareil mobile via bluetooth.
- Le résultat de la mesure s'affiche sur la page principale de l'application.

**NOTE :**

L'écran du pèse-personne indique le poids en kg. Toutes les autres données sont uniquement consultables via l'application.


Mode Bébé

Mesurez facilement le poids des enfants en bas âge :

- Accédez au menu principal en appuyant en haut à gauche de l'image de profil située sur la page principale de l'application, ou en faisant glisser votre doigt de droite à gauche.
- Appuyez sur l'élément de menu **Mode Baby**.



- Montez sur le pèse-personne et attendez que l'application reçoive les données concernant le poids.
- Montez sur le pèse-personne avec votre enfant en bas âge et attendez que l'application reçoive les données concernant le poids.
- Pour calculer le poids de votre enfant, l'application soustrait automatiquement votre poids du poids calculé ensuite.

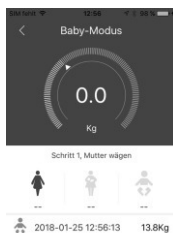


- Quittez cette fonction en appuyant sur la flèche orientée vers la gauche.

Poids cible

Dans l'application, fixez le poids cible que vous souhaitez atteindre au cours d'une période donnée :

- Pesez-vous.
- Sur la page principale de l'application, sous l'affichage du poids, appuyez sur **Définir le poids cible**. Les réglages du poids cible s'affichent.
- Définissez le poids cible en appuyant sur le point situé sur la mesure et en le faisant glisser d'un bord à l'autre. Procédez ainsi jusqu'à ce que le poids visé soit affiché au-dessus de la flèche.

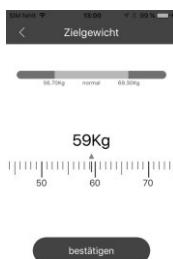

- Appuyez en dessous sur **Confirmer / Confirm**. Le réglage est enregistré.
- Quittez les réglages en appuyant sur la flèche orientée vers la gauche.
- L'écart entre votre poids et le poids cible est représenté graphiquement par un demi-cercle sur la page d'accueil.

Afficher le bilan de santé correspondant à la mesure

Affichez l'état de mesure de la mesure ainsi :

1. Dans la page principale de l'application, appuyez sur le symbole à gauche du demi-cercle :



2. L'état de mesure est ouvert. Les smileys vous indiquent votre résultat sur l'échelle de santé.



Afficher le résultat de la mesure

Faites défiler la page principale vers le bas. Les résultats de mesure déterminés sont affichés à côté des symboles correspondants.



Poids (kg/lb)



Masse osseuse (kg/lb)



Masse grasseuse (%)



IMC (indice de masse corporelle)



Eau (%)



Métabolisme (Kcal)



Muscle (%)



Graisse viscérale



Poids normal



Contrôle du poids



Masse grasseuse



Masse non grasseuse



Âge physique

Afficher

Accédez aux résultats de mesures précédentes comme suit :

1. Dans la page principale de l'application, appuyez en haut à droite sur le symbole suivant :



2. Choisissez entre l'affichage par semaine, par mois ou par année en appuyant sur le terme correspondant (**Semaine** / **Mois** / **Année**) en haut.



NOTE :

Réglez une date dans les réglages du calendrier. Affichez-le en appuyant sur le symbole suivant dans le coin supérieur droit :



3. Appuyez sur l'icône en bas de l'écran dont vous souhaitez afficher les résultats de mesure.

Ajouter un utilisateur

Créez un compte utilisateur pour tous les membres de la famille :

1. Affichez le menu principal en appuyant sur l'image de profil dans le coin supérieur gauche ou en faisant glisser votre doigt de gauche à droite.
2. Appuyez sur **Gestion des utilisateurs**.



3. Appuyez en haut à droite sur le symbole + :



4. Remplissez le profil utilisateur du nouvel utilisateur. Appuyez ensuite sur **Terminé**. Le nouvel utilisateur est affiché dans la liste de gestion des utilisateurs.

Changer d'utilisateur

Passez d'un compte utilisateur à l'autre ainsi :

1. Sur la page principale de l'application, appuyez sur le nom d'utilisateur actuel en haut de la page.

2. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez le compte de votre choix en appuyant dessus.



Modifier le profil de l'utilisateur

À tout moment, vous pouvez modifier votre compte utilisateur :

1. Assurez-vous que l'utilisateur dont vous voulez modifier le profil est bien l'utilisateur actuel.
2. Affichez le menu principal en appuyant sur l'image de profil ou en faisant glisser votre doigt de gauche à droite.
3. Appuyez sur **Gestion des utilisateurs**.



4. Appuyez sur l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le profil.
5. Procédez aux modifications de votre choix.
6. Appuyez en bas sur **Enregistrer modifications**.

Supprimer l'utilisateur

1. Affichez le menu principal en appuyant sur l'image de profil ou en faisant glisser votre doigt de gauche à droite.
2. Appuyez sur **Gestion des utilisateurs**.



3. Appuyez sur l'utilisateur à supprimer et faites-le glisser vers la gauche.
4. Appuyez sur **Supprimer**. L'utilisateur est supprimé de l'application.

Réglages de l'application

1. Affichez le menu principal en appuyant sur l'image de profil ou en faisant glisser votre doigt de gauche à droite.
2. Appuyez sur **Réglages système**.



3. Procédez aux réglages de votre choix :

- **Couleur de thème**

Appuyez sur la catégorie de votre choix. Le réglage est immédiatement enregistré.

- **Poids cible**

Définissez le poids cible en appuyant sur le point situé sur la mesure et en le faisant glisser d'un bord à l'autre. Procédez ainsi jusqu'à ce que le poids visé soit affiché au-dessus de la flèche.

- **Réglages des unités**

Spécifiez les unités de mesure à afficher dans l'application.



NOTE :

Le poids s'affiche toujours en kg sur le pèse-personne. La modification de l'unité de mesure ne concerne que les données affichées dans l'application.

- **Choix de la langue**

Réglez la langue souhaitée pour les menus.

- **À propos de nous**

Affichez les informations sur l'application.

Ajouter un appareil

Ajoutez une autre balance à l'application ainsi :

1. Affichez le menu principal en appuyant sur l'image de profil ou en faisant glisser votre doigt de gauche à droite.
2. Appuyez sur **Gestion de l'appareil**.



3. Appuyez en haut à droite sur le symbole + :



4. Choisissez le modèle de balance en appuyant dessus (**Graisse corporelle**).
5. Suivez les étapes 3 – 8 du paragraphe **Première configuration**.

Supprimer l'appareil

1. Affichez le menu principal en appuyant sur l'image de profil ou en faisant glisser votre doigt de gauche à droite.
2. Appuyez sur **Gestion de l'appareil**.



3. Appuyez sur la balance que vous souhaitez supprimer de l'application.
4. Appuyez sur **Supprimer l'appareil**. L'appareil est supprimé de l'application.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		3 piles AAA
Capteurs		Jauge de contrainte
Poids maximum supporté :		180 kg / 396 lb
Unités de mesure du poids		kg / lb (par étapes 100 g / 0,2 lb)
Mesures		Poids, masse graisseuse, masse hydrique, masse musculaire (%), masse osseuse (%), IMC, MB
Bluetooth	Version	4.0
	Plage de fréquences	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	1,92 mW
Dimensions		300,5 x 300,5 x 23,5 mm
Poids		1900 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV7 – 04.09.2018 – LZ/BS//BR